



Icon⁴⁰ - kokoontaitettava puoliaktiivipyörätuoli

Icon⁴⁰ malleja on uudistettu: Saatavana 2 eri runkoversiota ja max. käyttäjäpaino on kasvanut!

Icon⁴⁰ on kevyt, kokoontaitettava, alumiinirunkoinen pyörätuoli laajoilla asennusvaihtoehdoilla lyhytaikaiseen tai sairaala- ja lainaamokäyttöön. Se sopii hyvin aktiivisen, itsekelaavan käyttäjän tarpeisiin.

Icon⁴⁰ :ssa on säädettävät käsi- ja jalkatuet ja -laudat, työntökahvat, istuinkorkeus ja -syvyys sekä tarrasäädettävä selkäosa.

Vakiona kaatumisesteet, vipukäsijarrut, vaatesuojat, käsitukipehmusteet, puhkeamattomat renkaat ja alukelausvanteet.

Istuinleveydet 37,5–50 cm **Max. 150 kg.**

Icon⁴⁰ XL Istuinleveydet 53–61 cm **Max. 190 kg** (tuplaristikkorunko + selkäosan poikkitanko).

Varastoväri shampanja, musta verhoilu- ja muoviosat.

Ominaisuudet



Säädettävät jalkatuet

Jalkatuet kääntyvät ulos, sisään, ja alle. Irrotettavat, ylöskääntyvät kulma- ja kork.säädettävät jalkalevyt, joissa kantaremmit.



Uusi sivusuojapehmuste (icon40i)

Korkeussäädettävät, irrotettavat tai taakse kääntyvät lyhyet pöytäkäsinajat. sis. vaatesuojat ja käsitukipehmusteet.



Ylöskääntyvät kaatumisesteet korkeussäädettävä ilman työkaluja käännettävissä / irrotettavissa **ja polkaisuputki** kynnyksen ylityksiin.



Uusi istuinsyvyyden säätö ja tarra säädettävä istuinkangas

Useat kelauspyörän kiinnityspisteet mahdollistavat säädettävät eri istuinkorkeudet ja -syvyydet.



Tarrasäädettävä selkäosa

Tarrasäädettävä selkäosa lisää yksilöllistä istuinmukavuutta



Korkeussäädettävät tai kiinteät työntökahvat

kokoonpanosta riippuen



Puhkeamattomat 24" kelausrenkaat ja alumiinikelauvanteet

pikakiinnitysnavoilla



Uusi etuhaarukan ripustus

(5 / 5,5) 7" mustat, kiinteät PU-tukipyörät alumiinihaarukoilla.

LISÄVARUSTEINA mm:

- Vaakatasoon säädettävät jalkatuet
- Amputaatiojalkatuet
- Korkeussäädettävät työntökahvat
- Kepinpidike
- Perusistuinyyny



Kokoontaitettava ristikorunko



Vipukäsijarrut vakiona


Tekniset tiedot



Istuinleveys
37,5-50 cm
XL: 53-61 cm



Leveys
kokoontaitettuna
34 cm

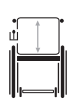

Selkäosan
korkeus
42 cm



Istuinkorkeus
vakio 48 cm
(sääd.) *



Korkeus
kokoontaitettuna
92,5 cm



Kokonaispituus
101 cm tai
ilman jalkatukia
76 cm



Istuinsyvyys
(35-40 cm tai)
40-45 cm tai
45-50 cm



Kuljetuspaino
8,8 kg
Kokonaispaino
15,9 / 16,6 kg



Max. käyttäjäpaino
150 kg
XL 190 kg

*kokoonpanosta riippuen myös muita istuinkorkeuksia
(36) / 38 / 40 / 43 / 45 / 48 cm

Värit



Musta verhoilu



Champagne

Takuu: rajoitettu 2 vuoden takuu valmistusvirheille.

Kaikki Rehasense tuotteet ovat testattu ja hyväksytyt ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Valmistaja:
Rehasense Sp. z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility
Versio 12/2022

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi