



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

**Trolli**





# Pyörätuolilla liikkumista fiksulla lähestymistavalla

Trolli by Ormesa on kompakti kevytpyörätuoli nuorille ja aikuisille, joka on **suunniteltu käytettäväksi kaikissa tilanteissa**.

Trollissa on **vakaa ja kestävä rakenne** joka on vahvistettu **tuplaristikkorungolla** ja sijoitettu selkäosan taakse ja istuimen alle antamaan parempaa stabiliteettia ja käyttömukavuutta.

**Kansainvälisesti patentoidun kokoontaittomekanismin** ansiosta, Trolli taittuu kasaan nopeasti yhdellä toimenpiteellä ja vie mahdollisimman vähän tilaa. Taitettuna se pysyy kasassa kompaktina paketti ja sitä voidaan kuljettaa vetämällä kuin matkalaukku.

**Verhoilu** on valmistettu **edistyneistä teknologisista materiaaleista**: se on erittäin **hengittävä, kestävä, helposti pestävää ja paloturvallista** materiaalia.

Saatavana 2 mallia: Trolli T30 ja Trolli T60 kelauspyörillä.

Laajan **komponenttivalikoiman** ansiosta se täyttää helposti eri käyttäjien tarpeet.



Trolli on **TÖRMÄYSTESTATTU ISO 7176/19 ja ANSI RESNA WC/19** standardien mukaan.

PRODUCT  
MARKED



TROLLI on LÄÄKINNÄLLINEN LAITE joka täyttää EU ASETUKSEN (EU) 2017/745 TURVALLISUUSVAATIMUKSET.



# Enemmän autonomiaa ja Kaksi versiota eri tarpeisiin: Trolli T30 ja



Helppo työntää ja käsitellä, sitä voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona kotipoluilla ja matkalla, käytännöllisesti ja mukavasti.

**Kevyt paino ja yksinkertainen kokoontaitto** tekevät sen nostamisesta tai siirtämisestä helppoa: se on täydellinen, jos haluat säilyttää sitä autossa. Se on niin helppo käsitellä, että sitä voidaan työntää jopa yhdellä kädellä.

Tämä tekee **Trolli T30**:stä ihanteellisen ratkaisun liikkuville perheille, jotka matkustavat usein, ja jotka etsivät vakaata, käytännöllistä ja mukava käyttöistä tuotetta - **kaikki yhdessä!**

Trolli T30 on varustettu **työntökahvoihin sijoitetuilla avustajanjarruilla** joita on helppo avustajan operoida.

**“Ormesa Design”** originaalit profiilirenkaat adaptoituvat eri maastoihin ja tarjoavat maximuaalista käyttömukavuutta sekä avustajalle että käyttäjälle.

- **Kääntyvät puhkeamattomat etupyörät** (pistosuojatut) 7" (17 cm) halkaisijalla kokoihin 36 ja 40; ja 8" (20 cm) halkaisijalla kokoon 43.
- **Puhkeamattomat takapyörät** (pistosuojatut) **avustajan rumpujarruilla**, 10" (25 cm) halkaisijalla kokoihin 36 ja 40; ja 12" (30 cm) halkaisijalla kokoon 43 43.  
**Polkaisuputki/esteenylittäjä** molemmissa takapyörissä.



# suorituskykyä

## Trolli T60 kelauspyörillä

**Trolli T60** kelauspyörillä on kevyt pyörätuoli, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan jokapäiväistä elämää toimivuudesta ja mukavuudesta tinkimättä. Se on kevyt ja helppo käsitellä, ja myös tämä Trolli-versio on kokoonlaitettava ja helppo kuljettaa mukana.

Se on varustettu manuaalisella jarrujärjestelmällä, jota siinä istuva henkilö voi käyttää suoraan itse.

**Ormesa design** renkaat takaavat optimaalisen pidon kaikissa maastoissa:

- Kääntyvät puhkeamattomat etupyörät (pistosuojatut) 7" (17 cm) halkaisijalla
- Puhkeamattomat 22" (56 cm) kelauspyörät (pistosuojatut) käyttäjän jarruilla

Polkaisuputki/esteenylittäjä ja kaatumisesteete molemmissa takapyörissä.



# Functional Design



## Kokoontaitto yhdellä toimenpiteellä

**Trolli T30:ssa** ja **kelausrenkaallisessa Trolli T60:ssa** on alumiininen **kokoontaittava ristikkorunko**, joka on maalattu myrkyttömällä epoksimaalilla.

Helppo käsitellä **kansainvälisesti patentoidun kokoontaittomekanismin** ansiosta, joka mahdollistaa kokoontaiton yhdellä toimenpiteellä. Kääntyvät jalkatuet ovat samassa linjassa rungon kanssa, joten **kokoontaitettuna vie vain vähän tilaa**: tämän ansiosta **Trollia** voi liikutella helposti perässä takapyörien varassa.

**Keuyen painon ja taittamisen yksinkertaisuuden ansiosta** sitä on helppo nostaa tai siirtää: ne vastaavat kaikkiin liikkumistarpeisiin ja ovat ihanteellinen ratkaisu liikkumisvaikeuksista kärsivien ihmisten kuljetukseen **lentokentillä ja asemilla sekä ahtaissa tiloissa**.



# Kuten matkalaukku





# Erittäin hengittävä



## Vallankumouksellinen verhoilu

Trolli T30 ja Trolli T60 kelauspyörillä verhoilussa on huippurakenne, joka on valmistettu edistyneistä teknologisista materiaaleista ja on erittäin hengittävä ihokosketuksessa.

Takuulupauksemme:

> **Hygienia:** erinomaisen hengittävyys ansiosta se vähentää hikoilua ja bakteerien muodostumista.

> **Pesu ja desinfiointi:** vaikka verhoilua ei voi irrottaa, kankaan koostumus mahdollistaa helpon desinfioinnin ja pesun.

> **Nopeasti kuivuva.**

> **Kestävyys:** Korkea kulutuskestävyys. Suuri vastustuskykyinen rakenne säilyttää suorituskykynsä jopa suurilla kuormituksilla (**ISO 12947**).

> **Palosuojaus:** EN 1021-1: 2014 ja EN 1021-2: 2014 standardin mukaisesti.



# Tekniset ominaisuudet ja säädettävyys



## Istuin

Ergonominen ja hieman kallistettu istuin estää lantion luisumisen ja lisää mukavuutta. Istuimen alla oleva ristikko varmistaa vakauden, mukavuuden ja kestävyden.



## Työntökahvat

Työntökahvat käsi- ja seisontajarruilla. Erittäin hyödylliset kahvat rattaiden hallintaan eri ympäristöissä. Käsijarrut ei saatavana Trolli T60.



## Jalkatuet

Korkeus- ja kulmasäädettävät ja sivullekääntyvät jalkatuet kääntyvät vaivattomasti rungonsuuntaiseksi. Mukana myös pohjetukiremmi mukavuuden lisäämiseksi.

# Lisävarusteet




**947 Lantiovyö kulmasäädöillä**  
2 kokoa



**920 4-pistelantiovyö**  
2 kokoa



**853 4-pistetukiliivi Slim**

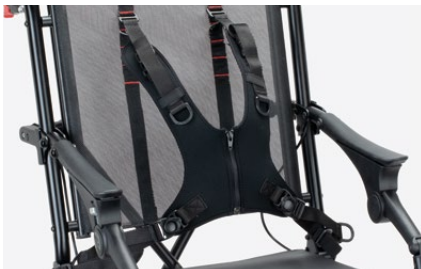

**853 Vartalotukiliivi vetoketjulla**  
2 kokoa



**858 Lantion sivutuet**  
Irrotettavalla sisäpehmusteella. Vähentävät istuimen leveyttä 4 tai 8 cm (1,6 tai 3,2") poistamalla sisemmän pehmusteen. (ei saatavana Trolli T60)



**960 Kantaremmit**

# Lisävarusteet



**956 Kulmasäädettävät jalkalevyt**



**858 Alakori / Shopping Basket**



**812 Suuntalukitus etupyöriin**



**951 Korkeussäädettävät työntökahvat**  
Lisää korkeutta max. 7 cm (94-101 cm)



**891 Taksikoukut ajoneuvokuljetukseen**


Kasvot menosuuntaan kuljettamiseen moottoriajoneuvossa (yksityisautot, linja-autot...).  
Katso tuotteen mukana toimitettu käyttö- ja huolto-ohje





# Trolli T30 koot ja painot

Mittayksikkö cm (tuuma) ; kg (lb)

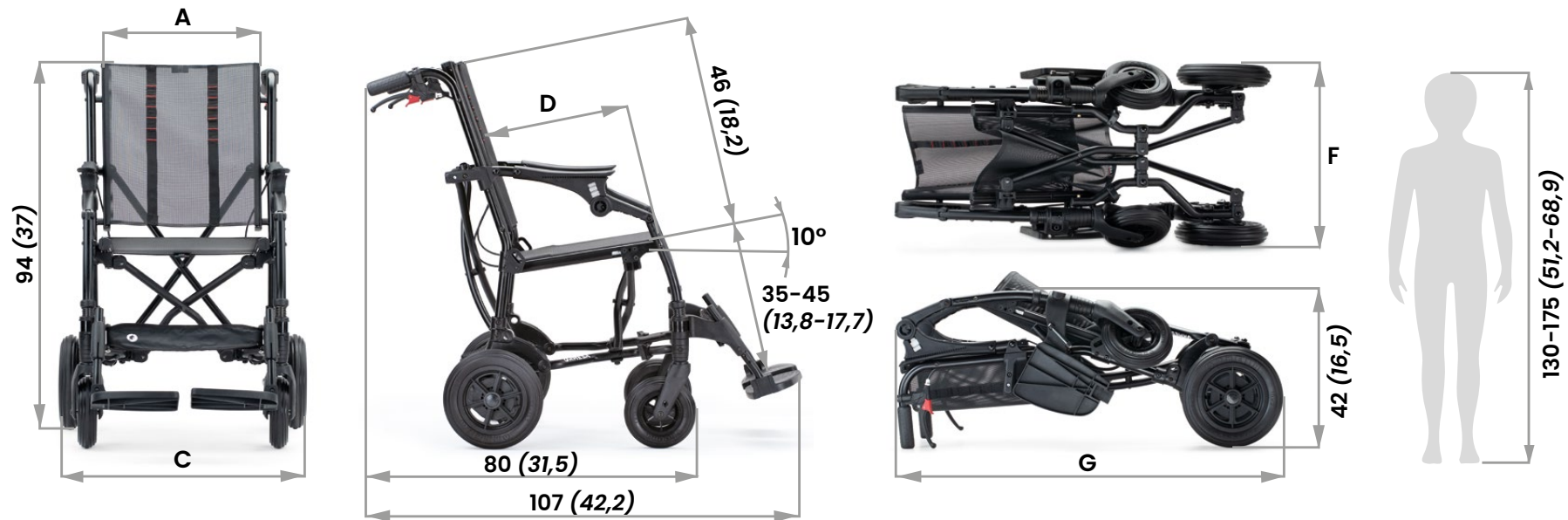

	A	C	D	F	G	Trolli T30 Paino	Max. kuormitus
<b>koko 36</b>	36 (14,2)	59 (23,2)	36 (14,2)	42 (16,5)	94 (37)	13,1 kg (28,8 lb)	80 kg (176 lb)
<b>koko 40</b>	40 (15,7)	63 (24,8)	40 (15,7)	46 (18,1)	94 (37)	13,6 kg (30 lb)	90 kg (198 lb)
<b>koko 43</b>	43 (16,9)	66 (26)	40 (15,7)	42 (16,5)	97 (38)	14,1 kg (31 lb)	110 kg (242 lb)











# Trolli T60 kelauspyörillä

## koot ja painot

Mittayksikkö cm tuuma) ; kg (lb)

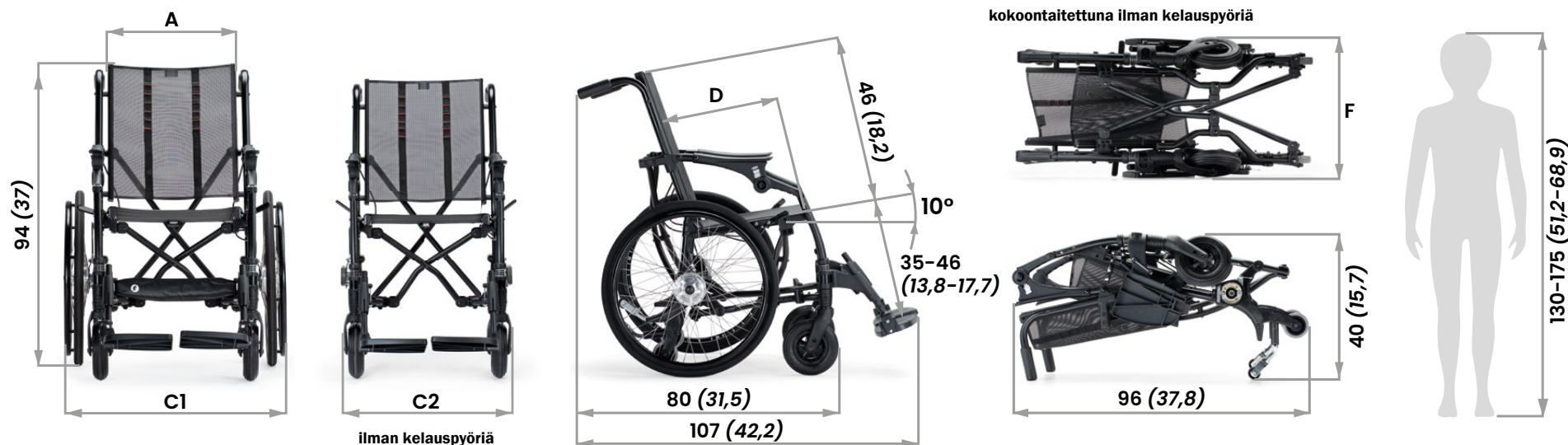

	A	C1	C2	D	F	Trolli T60 paino	Max. kuormitus
<b>koko 36</b>	36 (14,2)	64 (25,2)	49 (19,3)	36 (16,5)	42 (16,5)	16,5 kg (36,3 lb)	80 kg (176 lb)
<b>koko 40</b>	40 (15,7)	68 (26,8)	53 (20,9)	40 (15,7)	46 (18,1)	17 kg (37,4 lb)	90 kg (198 lb)
<b>koko 43</b>	43 (16,9)	71 (27,9)	56 (22)	40 (15,7)	42 (16,5)	17,5 kg (38,5 lb)	110 kg (242 lb)

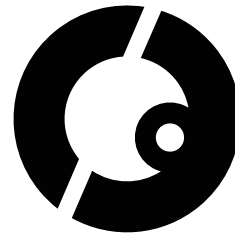

**CE** according to MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= **ISO 13485** =

---

**Ormesa srl** - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**