



rea

Confidence in posture solutions

rea

**Spirea^{®4}
NG**

Återupptäck din frihet

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®

Rea **Spirea⁴**_{NG} är en dynamisk och hållbar hopfällbar lättviktsrullstol, idealisk för daglig användning.

Genom att i designen införliva önskemål från våra brukare, erbjuder **Spirea⁴**_{NG} enkel hantering, individuell anpassning, hög teknisk kvalitet och låga underhållskostnader. Detta gör den till ett perfekt val för brukare såväl som för vårdare och tekniker.



Enkel att manövrera

Den uppskattade designen hos **Spirea**-familjen finns också i konstruktionen hos Rea **Spirea⁴**_{NG}, vilket gör rullstolen lätt att köra för både brukare och vårdare. Höjdjusterbara körhandtag och de olika justeringsmöjligheterna för drivhjulets position förbättrar manövrerbarheten hos **Spirea⁴**_{NG} samtidigt som den stabila ramen ger lågt rullmotstånd. Drivhjulets nydesignade infästning erbjuder ett brett urval av möjligheter och hjälper dig att hitta den mest optimala positionen.

Optimal manövrerbarhet och stabilitet

Med **Spirea⁴**_{NG} är det en ren glädje att manövrera trånga utrymmen tack vare att benstöden lätt svänger in under stolen, eller åt sidan, vid förflyttning/passage. Ramkonstruktionen har ett unikt dubbelkryss som erbjuder dubbelriktad stabilitet, en funktion som kräver mindre energi vid framdrivning.

Hög kompatibilitet och enkelhet

Spirea⁴_{NG} drar nytta av en stark tradition av säker konstruktion med sin hållbara, höga stabilitet och aluminiumramen som är nästintill underhållsfri.

Alla komponenter från hjul till benstöd finns i vårt sortiment av rullstolar från Rea och Invacare®. Bara tre enkla verktyg krävs för alla justeringar på **Spirea⁴**_{NG}.

Spirea⁴_{NG} är en mångsidig och lätt rullstol. I hopfällt läge och när drivhjulen tagits bort, får **Spirea⁴**_{NG} lätt plats bakom framsätet eller i bagageutrymmet på bilen. Dess vikt utan bakhjulen är bara 9,5 kg, vilket gör den enkel att hantera och transportera.





Låg sitthöjd

Med 22" drivhjul får **Spirea⁴_{NG}** en låg sitthöjd som är lämplig för den som sparkar sig fram.



Ryggstödsfäste

Det vinkelfasta 7° ryggstödet och den vinkeljusterbara versionen kan enkelt monteras på ryggstödsfästet.



Amputationsstöd

Det specialdesignade amputationsstödet på **Spirea⁴_{NG}** är både praktiskt och stabilt.



Inbyggd camber

Spirea⁴_{NG} har två olika inbyggda cambervinklar. Vänd fästet enkelt för att få 0° till 2° cambervinkel. Fungerar med drivhjulsfästet på **Spirea⁴_{NG}** Basic och Active.



Armstöd

Armstöd med kort, lång eller bred dyna. Uppfällbara, avtagbara hemiplegiarmstöd.



Transportversion

Vinkelfast rygg, 16" drivhjul.



Tippskydd

Tippskyddens position och höjd kan justeras för att erbjuda extra säkerhet och förebygga tippning. Finns både som standard och swing-away.



Drivhjulets positioner

Drivhjulets infästning på Basicmodellen erbjuder tre olika positioner, Activemodellen erbjuder 8 olika positioner för optimala köregenskaper. Kan placeras framför och bakom ramröret.



Benstöd

Benstödsöverdel vinkelställbar ① eller vinkelfast ② med fast eller justerbar fotplatta samt fasta vinkelställbara amputations- och gipsbenstöd ③ och ④.



Basic version






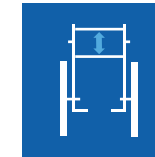
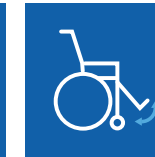
Vinkelfast rygg, drivhjul med standardinfästning.








Active version (bild se framsidan)

Vinkelställbar rygg, drivhjul med aktivinfästning.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Seat angle	Sitthöjd	Intervall ryggstödsvinkel	Ryggstödhöjd	Benstödsvinkel
<i>Rea Spirea⁴ NG</i>							
	355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm (-50 mm)	0° / 3° / 6°	380 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	7° / -6 - +13°	380 - 460 / 350 - 480 / 420 - 550 mm	80° / 0° - 80°

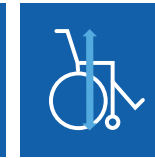
	Benstödslängd	Intervall armstödhöjd	Hjulbas	Bredd ihopfälld	Totallängd inkl fotplatta	Totallängd utan benstöd	Totalhöjd
<i>Rea Spirea⁴ NG</i>							
	320 - 440 / 410 - 530 mm	190 - 290 mm	Sittbredd + 200 mm	305 mm	920 - 1170 mm	690 - 950 mm	720 - 1220 mm

	Max brukarvikt	Vikt	Transportvikt
<i>Rea Spirea⁴ NG</i>			
	135 kg	16 kg	9,5 kg




Ramfärg

Slate Grey

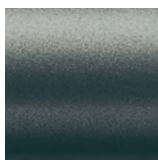

Klädsel

Svart Jemima

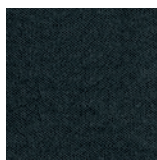

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®