

Uudelleenmääritä **liikkuminen.**

Ensimmäinen manuaalinen
seisomaannostava pyörätuoli,
joka mahdollistaa liikkumisen
pystyasennossa.

Nouse ylös ja lähde liikkeelle!



Ongelmat muissa seisomapyörätuoleissa



Hinta

sähköinen

> 15 - 30K €, eikä usein kuulu vakuutuksen piiriin.

Erittäin painavia

sähköinen

Yli 70 kg eikä yleensä purettavissa osiin. Vaatii kuljetukseen erikseen mukautetun ajoneuvon.

Riippuvainen akusta

sähköinen

Moottoreiden sekä muiden monimutkaisten komponenttien käyttö.

Hidas siirtyminen

manuaalinen

Hidas siirtyminen istuma- ja seisoma-asennon välillä.

sähköinen

Pystyasennossa ei voi liikkua

manuaalinen

Manuaalisissa pyörätuoleissa ei ole mahdollisuutta liikkua seisten.

Meet THE EZER



∞ J53

EZER

seisomapyörätuoli on erilainen.

Tässä syyt miksi.

Välitön siirtyminen seisoma- ja istuma-asennon välillä

Liikkuminen seisten

Manuaalinen rakenne

Patentoitu turvallisuus

Yksilöllisesti säädettävä painon ja pituuden mukaan



Sujuva siirtyminen

Mahdollistaa käyttäjän siirtymisen vaivattomasti istuma-asennosta seisoma-asentoon.



Liikkuminen seisoma-asennossa

Mahdollistaa käyttäjän liikkumisen pystyasennossa.



Turvallisuus

Etupyörät laajenevat ulospäin kasvattaen akseliväliä, mikä lisää turvallisuutta, vakautta ja mukavuutta seisomaan noustessa.



Täysin manuaalinen

Yhtä helppo korjata kuin polkupyörä.

get up



Turvallisuus,
vakaus ja
mukavuus



Pienemmät
kustannukset kodin
mukauttamisessa



Täysin
manuaalinen ja
yksilöitävissä



& go



Keskustelut
silmien tasolla



Terveempi &
aktiivisempi
elämäntyyli





Työskentely &
Itsenäisyys

EZER 02 Alumiininen seisomapyörätuoli

- mittataulukko

Massa / ominaisuudet	
Malli	EZER 0
Väri	Musta + Sininen (matta) / Kokomusta (matta)
Tyyppi	Seisomapyörätuoli liikumistoiminnolla
Istuimen ja jalkatuen välinen etäisyys (FS)	25-50 cm
Istuinleveys (SW)	41 cm
Istuinkorkeus (SH)	49 cm
Istuinsyvyys (SD)	46 cm
Pyörätuolin korkeus (RH)	85 cm
Selkäosan korkeus (LH)	34 cm
Pyörätuolin kokonaisleveys (RB)	72 cm
Pyörätuolin kokonaispituus (RL)	96.5 cm
Istuinkulma	4°
Enimmäiskäyttäjäpaino	120 kg
Kuljetuspaino	28 kg
Kokonaispaino	35 kg
Akselin keskikohdan ja selkäosan välinen etäisyys	0-4 cm

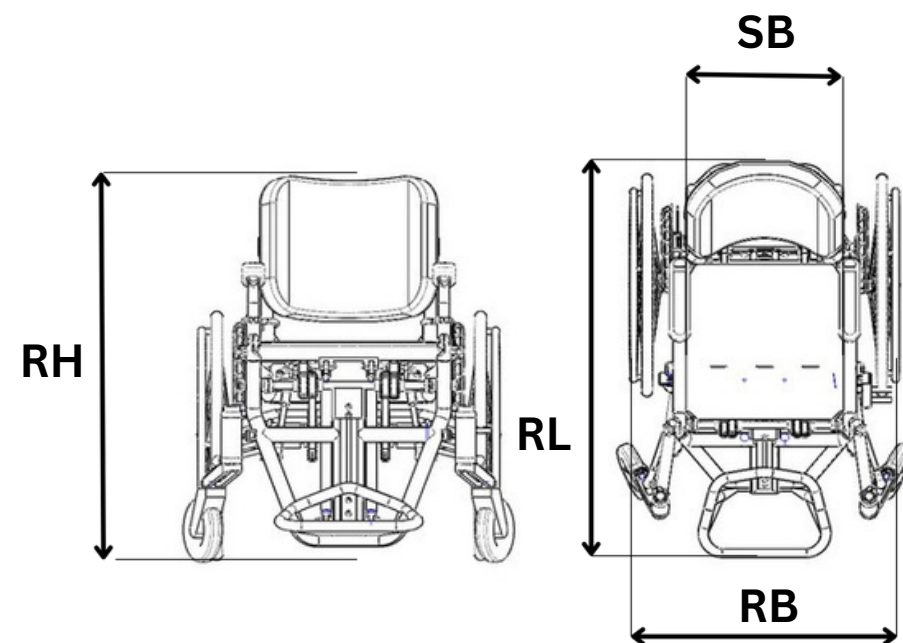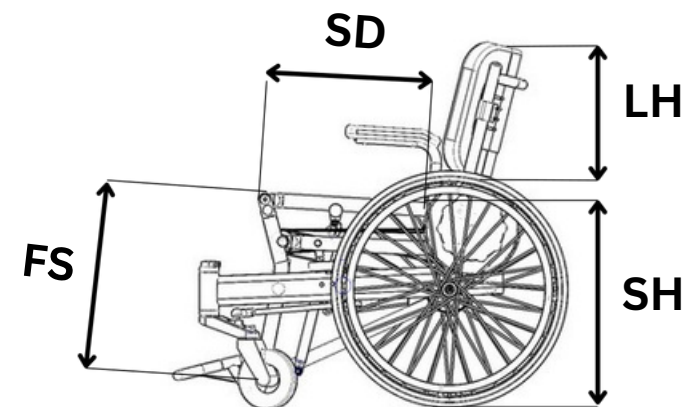

Koe keskustelut silmien tasolla.

Henkilöille, joilla on paraplegia tai muita liikkumisen haasteita, keskustelut **silmien tasolla** voivat olla tärkeitä **osallisuuden** tunteen säilyttämiseksi arjen vuorovaikutustilanteissa. Pyörätuolin käytön sisällyttäminen kuntoutukseen tukee sujuvampaa **sopeutumista** muuttuvaan elämäntilanteeseen.





Nopeampi mukautuminen. Enemmän liikkumis- mahdollisuuksia.

Ezerin kyky liikkua seisten
auttaa yksilöitä **siirtymään**
helpommin
kuntoutusharjoituksista
päivittäisiin toimintoihin,
edistään parempaa
itsenäisyyttä ja
motivaatiota
kuntoutusjakson aikana.

Tehostettu fysio- terapia.

Seisten liikkuminen aktivoi useita lihasryhmiä, mikä parantaa **keskivartalon voimaa** sekä edistää **luuston terveyttä** ja vähentää toissijaisten vammojen, kuten painehaavojen, riskiä.





Monipuolinen ja kustannus- tehokas

Mekaaninen pyörätuoli,
joka mahdollistaa
seisomisen ja liikkumisen,
**vähentää useiden
erikoislaitteiden tarvetta.**

Se **säästää tilaa** ja
pienentää ympäristön
mukauttamisen
kustannuksia samalla
tarjoten monipuolisia
terapian mahdollisuuksia
erilaisiin tarpeisiin.

THE EZER



Oikean elämän tilanteissa



Tunteita herättäviä hetkiä perheen ja ystävien kanssa.

Martin, yksi beta-käyttäjistämme, nousi seisomaan ensimmäistä kertaa 18 vuoteen. Ensimmäinen asia, jonka hän teki, oli pyytää vaimoltaan suudelmaa – seisten. Tällaiset hetket osoittavat, kuinka innovaatiot voivat palauttaa arvokkuuden ja yhteyden toisiin ihmisiin.



Esteettömyys museoissa ja julkisissa tiloissa.

Kiki haluaa **vapauden** nauttia
museoista ja konserteista
ilman rajoitteita;
EZER auttaa häntä nousemaan
nähdäkseen korkeammalle
sijoitetut teokset, välttämään
lasipintojen heijastuksia ja
käymään luontevia, kasvokkain
tapahtuvia keskusteluja.

Lisää joustavuutta työpaikalla.

Useimmat ympäristöt on suunniteltu seisomakorkeudelle. EZERin avulla Erik voi nyt **tavata asiakkaita silmien tasolla**, seurata tuotantoprosesseja tuotantotiloissa ja **käyttää seisomatyöpistettä**—valiten istumisen tai seisomisen tarpeensa mukaan joustavuuden ja mukavuuden varmistamiseksi.



Jakelija Suomessa:

Camp Scandinavia Oy
Patamäenkatu 5,
33900 Tampere, Finland
info@campmobility.fi



Valmistaja:
J58 Holding B.V.
Europalaan 188,
7543 DK Enschede,
The Netherlands



Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

