

Alerta Sensaflo Hybrid on 4-in-1 hybridipatja, jossa on vaahtotäytteiset ilmakeennot, **SensaGel**-adaptoituvat jalkapohjakennot sekä 150 mm (6") syvät ilmakeennot tehokkaaseen painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon käyttäjillä, joilla on korkea riski (ilman pumpppua) tai erittäin korkea riski (pumpun kanssa) painehaavojen kehittymiseen.

Ilman pumpppua käytettynä **Alerta Sensaflo Hybrid** toimii korkean riskin patjana, ja pumpun kanssa käytettynä se toimii vaihtuvapaineisena patjana. Käyttäjää ei tarvitse siirtää pois sängystä otettaessa pumpppu ja vaihtuvapaineinen asetus käyttöön. **Alerta Sensaflo Hybridissä** on evakuointipäällinen hihnoilla ja kahvoilla, mikä mahdollistaa patjan ja käyttäjän nopean siirtämisen hätätilanteissa.

Patjan kantapääalueella on neljä muokattavaa geelivaahtokennoa, jotka voidaan poistaa ja sijoittaa uudelleen yksittäin, jotta kantapään alle saadaan täysin paineeton alue. Patja voidaan täyttää ilmalla, irrottaa letkusto pumpusta ja sulkea kuljetustoiminnon tulppa, jolloin siitä muodostuu tasapainotetulla ilmalla toimiva, itsesäätävä puoliaktiivinen patja. **Alerta Sensaflo Hybrid** hyödyntää huipputeknologista **SensaCare TruFlo Technology®** -järjestelmää, joka yhdistää jatkuvan paineentunnistuksen ilmasensorin avulla ja mikroprosessoriohjatun säädön. Näin patja tarjoaa erittäin matalan pintapaineen sekä erittäin hiljaisen pumpun toiminnan, mikä tukee luonnollisia unirytmeyttä ja ylläpitää vakaata verenkiertoa.

TEKNISET TIEDOT

Patja

- > Patjan mitat
 - 198 x 90 x 14 cm (+2cm pumpulla)
 - 198 x 120 x 14 cm (+2cm pumpulla)
- > Patjan paino: 15,5kg
- > Kennorakenne: vaahtotäytteiset ilmakeennot ja SensaGel-adaptoituvat kantapään kennot
- > CPR: Pikavapautus
- > Max. käyttäjäpaino: 250kg
- > Min. käyttäjäpaino: 30kg
- > Evakuointipäällinen: kantokahvat ja hihnät
- > Kantapääalue: 4 mukautuvaa, yksittäin irrotettavaa geelivaahtokennoa

Pumppu (lisävaruste)

- > Käyttöjärjestelmä: SensaCare TruFlo Technology®
- > Pumpun mitat: 34,5 x 24 x 12,5 cm
- > Pumpun paino: 2,8kg
- > Jaksoaika: 10, 15, 20, 25 minuuttia
- > Virransyöttö: AC220-240V, 50-60Hz
- > Virrankulutus: 7W
- > Varustettu ripustuskoukuilla
- > Vaihtuvapaineinen/Staattinen tila
- > Visuaalinen ja äänivaroitus matalasta paineesta, sähkökatkosta ja vuorottelutoiminnan häiriöstä
- > Maksimitäyttötoiminto
- > Ohjauspaneelin lukitus


Päällinen

- > Monisuuntaisesti joustava PU
- > Höyryä läpäisevä
- > Vedenkestävä
- > Konepestävä
- > Antimikrobinen
- > Vetoketju koko patjan ympäri
- > Päällisen alapinta valkoinen
- > BS7177: Crib 5 -paloluokitus


KESKEISET OMINAISUUDET JA HYÖDYT




Uritettu vaahtomuovi-
täytteen ilmakkenno

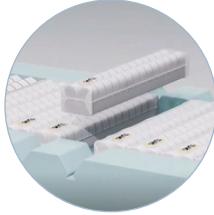


Yksittäin
irrotettavat
kennot

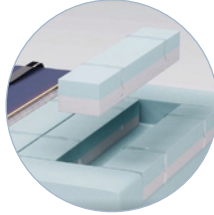

Irrotettavat
kantapään kennot

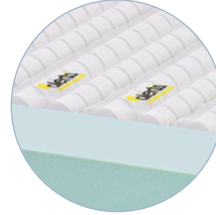


Tuotemerkityt
kennot

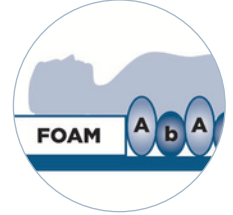

Tyynytoiminto



CPR-
häätävapautus

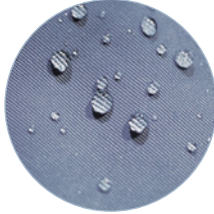

Monisuuntajoustava,
vedenpitävä ja höyryä
läpäisevä PU-päällinen



Antimikrobinen,
konepestävä



Vetoketju patjan
ympäri



Vankka
pumppuliitäntä



Kuljetustoiminto




Muotoillut sivuosat

OHJAUSPANEELI

Automaattinen paineentunnistus ja ilman tasainen jakautuminen

Valo- ja äänimerkki
ilmanpaineen
laskusta,
sähkökatkosta ja
paineen vaihtuvuuden
häiriöstä

Ohjauspaneelin
lukitus luvattoman
tai tahattoman
käytön estämiseksi
(pidä painettuna 2
sekuntia)

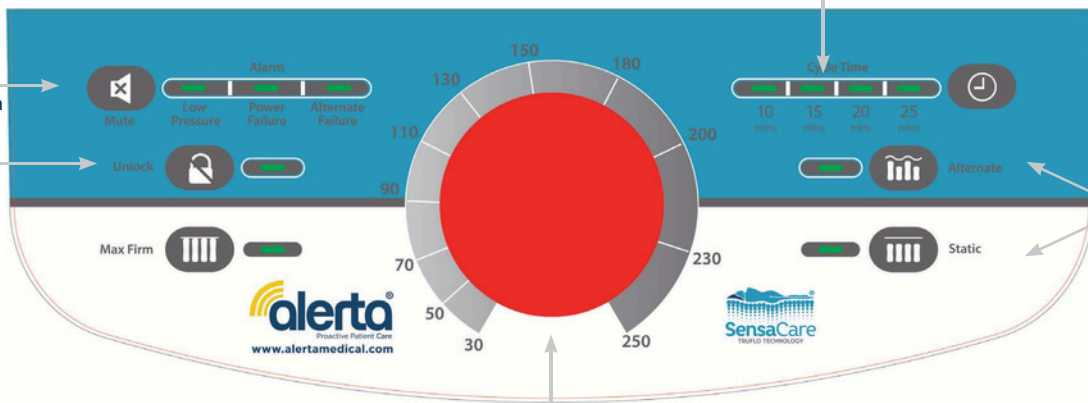

Painon
asetussäädin

Usean jakson säätö
tehokkuuden
parantamiseksi



Ultra-Silent™-
pumpputoiminto
häiriöiden
välttämiseksi


Staatinen/
vuorotteleva tila

Tuotekoodit

805580010 - Sensaflo Hybrid patja 90x198 evakuointipäällisellä

805580011 - Sensaflo Hybrid patja 120x198 evakuointipäällisellä

805580012 - Sensaflo Hybrid pumppu

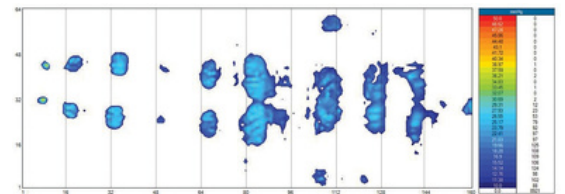

Kliinisen pintapainemittauksen tulos