
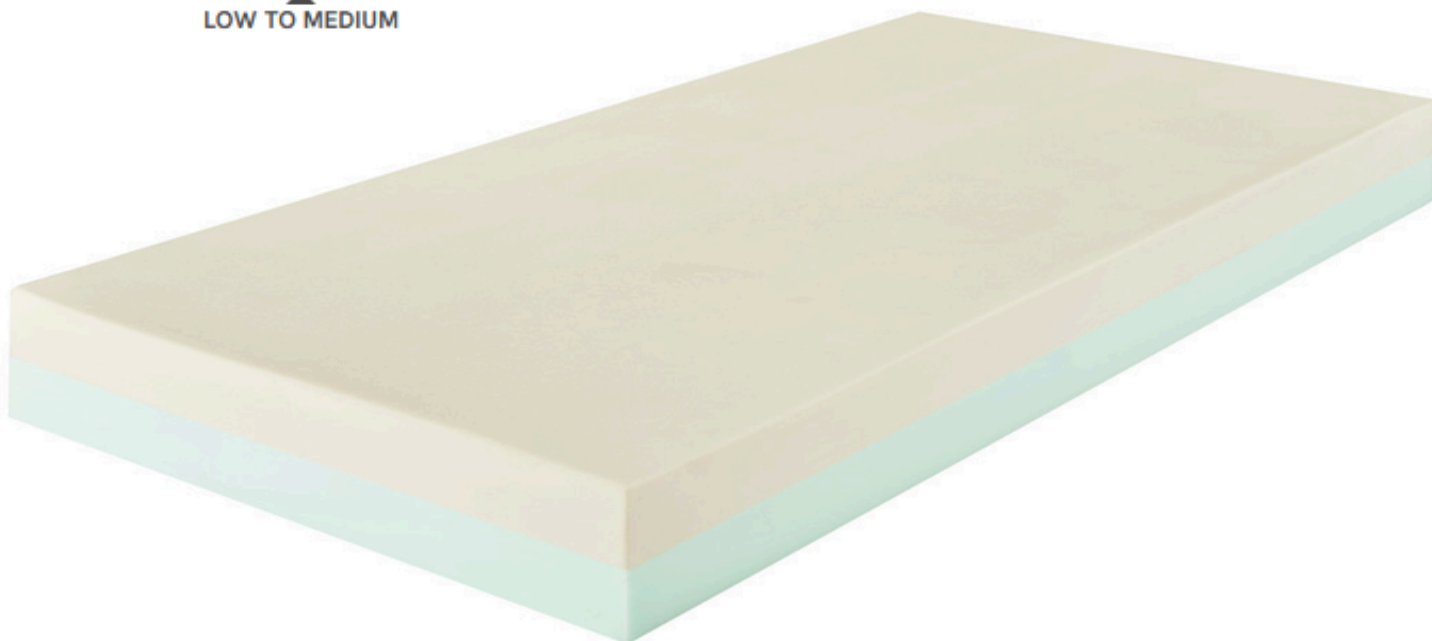


Lastenpatja

Alova™ Junior

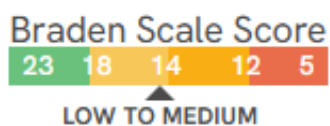

Lasten vaahtomuovipatja

Alova™ Junior on yksiosainen viskoelastinen vaahtomuovipatja lasten hoivasänkyihin. Muotoonvaletun viskoelastisen pintakerroksen tiheys on $\geq 75 \text{ kg/m}^3$ ja kovuus 1,8 kPa. Patjan pohjakerros korkearesilienttistä (HR) vaahtomuovia, jonka tiheys 28 kg/m^3 ja kovuus 3,6 kPa.

Viskoelastinen vaahto tarjoaa erinomaisen paineen jakautumisen; keho uppoaa tasaisesti vaahtoon, mikä lisää tukipinta-alaa ja vähentää painetta painehaavoille alttiilla alueilla.

Mukana irrotettava, pestävä päällinen.




Käyttöaiheet:

- Vuodepotilaina oleville lapsipotilaille, joilla on liikkumisrajoitteita ja keskisuuri tai korkea painehaavariski (Braden-asteikon tai muun validoidun asteikon mukaan sekä lääkärin ohjeen perusteella). Tukee vaiheen 1–2 painehaavojen hoitoa EPUAP-luokituksen mukaisesti ja jopa vaiheeseen 4 saakka tukialueen ulkopuolella.

Irrotettava CIC-päällinen

Irrotettava ja pestävä CIC-päällinen on hopeaionikäsitelty, joten sen bakteriostaattinen vaikutus vähentää tehokkaasti ristikontaminaation riskiä.

Soveltuu usean potilaan käyttöön. Parantaa kestävyyttä ja nesteenpitävyyttä.

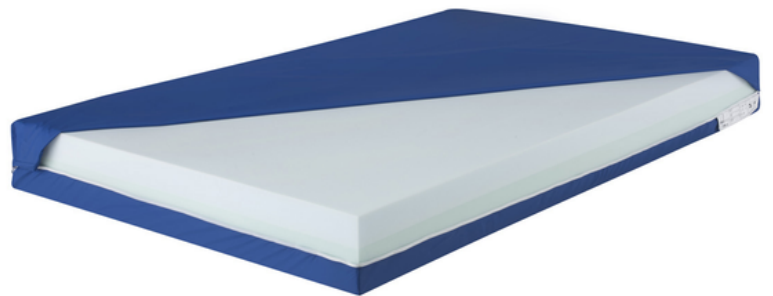

Patja täyttää EN 597-1 ja 2 GPEM D1 90 luokan D paloturvallisuusstandardin vaatimukset.

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------|--------|
| Pituus | 170 cm |
| Leveys | 82 cm |
| Korkeus | 14 cm |
| Patjan paino | 12 kg |
| Käyttäjän vähimmäispaino | 15 kg |
| Käyttäjän enimmäispaino | 70 kg |
| Käyttäjän vähimmäispituus | 125 cm |
| Käyttäjän enimmäispituus | 145 cm |



Materiaalit ja rakenne

- Vaahtomateriaali: 100 % PU
- Päällinen: PE-verkko, PU-pinta

Päällisen puhdistus ja desinfiointi

- Pesukoneessa max 90 °C
- Ei kemiallista pesua
- Kuivaus matalassa lämpötilassa
- Käytä hyväksyttyä pintadesinfiointiainetta/pesuainetta

Valmistaja: WINNCARE FRANCE

4, Le Pas du Château
85670 Saint-Paul Mont-Penit
France
Tél. : +33 (0)4 66 02 15 15
www.winnicare.com



- Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä kuvastossa ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility 2026



Asiakaspalvelu:
09-350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat:
09-350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto:
09-350 76 313
huolto@campmobility.fi