

VICAIR[®]

Vicair[®] Madrass



Effektiv tryckavlastning och
minimering av skjuvkrafter



Invacare **Vicair madrassen** ger en god tryckfördelning och stöd till kroppen hos brukare med hög risk att utveckla trycksår samt brukare med redan utvecklade sår utan någon elektrisk utrustning.

Med lågfriktions luftceller formar madrassen sig kontinuerligt efter kroppens konturer och rörelser. Konceptet erbjuder en optimal kombination av tryckavlastning, stöd och stabilitet samtidigt som skjuv och friktionskrafterna minimeras effektivt.




Unik design

Invacare **Vicair madrassen** använder sig av Invacare **Vicair Technology™**, en unik och innovativ metod, som ger en dynamisk liggyta och stöd med hjälp av flera hundra små trekantsformade luftceller, kallade **SmartCells™**. Dessa flexibla celler har en låg friktionsyta, glider därför lätt mot varandra och formar sig således efter kroppens konturer. **Vicair** madrassen består av 36 sektioner med **SmartCells™**. Sektionerna är individuellt indelade och följsamma, därmed minimeras skjuvkrafterna optimalt.

Effektiv tryckavlastning

Varje enskild **SmartCell™** bidrar till individuell anpassning som tillåter kroppen att sjunka ner i madrassen, därmed uppnås en optimal tryckavlastning. Madrassen är dessutom ytterst komfortabel och stabil att ligga på. **Vicair Technology™** gör, att det är möjligt, för brukaren med svåra felställningar att sjunka ner i materialet och uppnå optimal komfort, stöd och effektiv tryckavlastning.

Specifikation

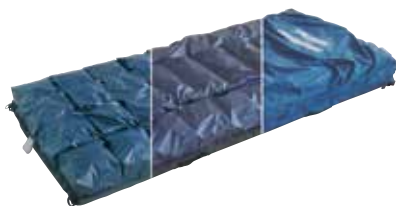

Överdrag

Vicair madrassen levereras med ett löst 2-lags hygienöverdrag, som både tillåter brukaren att sjunka ner i madrassen och minimerar skjuv- och friktionskrafter.

Flexibel inställning

Vicair madrassen är följsam i reglerbara sängar.

Madrassens uppbyggnad

De 36 sektionerna är placerade på en botten av kallskum. Sektionerna är formade så att de ger en stor understödsyta som tillåter kroppen att sjunka ner och ge en god tryckavlastning.

Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.

Bredd	Längd	Höjd	Vikt	Max brukarvikt	Rengöring ytter- och inneröverdrag
Vicair madrassen 800 / 900 / 1050 / 1200 mm	2000 mm	140 mm	8 / 9 kg	250 kg	95°

Hygienöverdraget kan tvättas i 95°.
Se tvättråd i bruksanvisningen.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

INVACARE
Yes, you can.®