



Yes, you can.®

Dacapo

Täyttää
EN597-1 ja
EN597-12
vaatimukset



TÜV hyväksytty



Dacapo viskoelastiset vaahtomuovipatjat

Invacare® Dacapo -patjat ovat painehaavojen ennaltaehkäisyyn tarkoitettuja vaahtomuovitäytteisiä painehaavapatjoja. Dacapo-patjat on valmistettu ympäristöystävällisestä, viskoelastisesta vaahtomuovista, joka ainutlaatuisen rakenteen ansiosta mukautuu kehon muotoihin normaaleja patjoja paremmin.

Patjojen rakenne antaa paremman tuen, mukautuu kehon muotojen mukaan ja vähentää kitkaa ja kudoksen venytystä. Soveltuu käytettäväksi matalan ja keskisuuren painehaavariskin omaavilla henkilöillä. Päällinen on 100% nesteitä läpäisemätön, hengittävä ja kahteen suuntaan joustava. Konepesu +95°C.

Mallit Combi ja Heavy User Light ovat kaksi- ja kolmikerroksisia yhdistelmäpatjoja. Comfort ja Comfort Plus ovat ympäristöystävällistä viskoelastista materiaalia.

Pituus 200 cm (Child: 140/160/180 cm Kid: 136/156/175 cm)
Leveydet 85 cm, 90 cm, 105 cm ja 120 cm. (Child: 54-80 cm
Kid: 77/79 cm) Paksuus: 8-15 cm mallista riippuen.

Dacapo-patjat täyttävät EN597-1 ja -2 vaatimukset. Takuu 3 vuotta. Lisävarusteena saatavana pelastuslakana.

CAMP[®]
MOBILITY

Standard


- Paksuus 10 cm
- Korkea tiheyskainen vaahtomuovi
- Tiheys 50kg/m³
- Kovuus 140 N
- Max. 100 kg

Standard päällinen:

- 100% puuvillaa
- Konepestävä +40°C
- Vetoketju kolmella sivulla

Dacapo Standard on 10 cm paksua vaahtomuovia, jonka tiheys on 38 kg/m³ ja kovuus 140N.

Dacapo Standard on vakioapatja, joka täyttää hyvän potilassänkyapatjan perusvaatimukset. Korkea laatu ja korkea tiheyskainen vaahtomuovi tarjoaa kestävän ja tukevan makuu-alustan. Täyttää palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1.

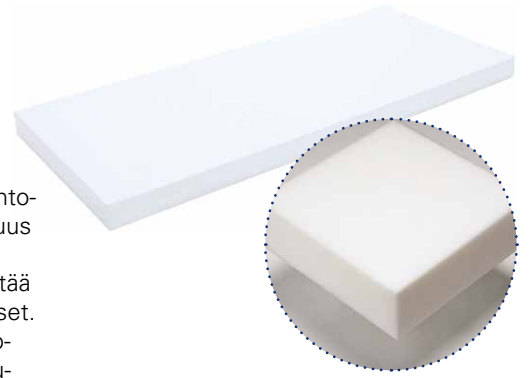

Basic

- Paksuus 12 cm
- Korkea tiheyskainen vaahtomuovi
- Tiheys 50kg/m³
- Kovuus 140 N
- Max. 120 kg

Dacapo-päällinen:

- 100% nesteitä läpäisemätön
- Polyuretaanipäällysteistä polyesteriä
- Hengittävä
- Kahteen suuntaan joustava
- Konepestävä +95°C ja rumpukuivaus
- Allergiatestattu ja käsitelty pölypunkkeja vastaan
- Huomaamaton, suojan alle piiloutuva vetoketju kolmella sivulla.

Dacapo Basic on ensimmäinen Dacapo-sarjan inkontinenssipatja. Patja täyttää hyvin makuu-alustan perus mukavuus- ja hygienivaatimukset. Tiheä ja kestävä vaahtomuovi tarjoaa tukevan alustan.

Basic on vahva ja kestävä patja. Patjan paksuus on 12 cm. Max. 130 kg.

Saatavana myös Basic Low: Paksuus 5 cm.

Täyttää palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1 ja European Standard EN 597-2.



Comfort

- Paksuus 12 cm
- Ympäristöystävällistä vaahtomuovia
- Tiheys 53kg/m³
- Kovuus 145N
- Max. 130 kg

Dacapo Comfort -patjat ovat valmistettu ympäristöystävällisestä, erittäin joustavasta vaahtomuovista, jonka jokainen neliöleikkaus mukautuu yksilöllisesti kehon muotoihin ja antavat paremman tuen keholle kuin perusvaahtomuovipatjat.

Comfort-patjan paksuus on 12 cm. Täyttää palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1 ja European Standard EN 597-2.




Comfort Plus

- Paksuus 14 cm
- Ympäristöystävällistä vaahtomuovia
- Tiheys 53 kg/m³
- Kovuus 145 N.
- Max. 140 kg

Dacapo Comfort Plus -patjat ovat valmistettu ympäristöystävällisestä, erittäin joustavasta vaahtomuovista, jonka jokainen neliöleikkaus mukautuu yksilöllisesti kehon muotoihin ja antavat paremman tuen keholle kuin perusvaahtomuovipatjat. Comfort Plus -patjan paksuus on 14 cm. Max. 140 kg.

Täyttää palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1 ja European Standard EN 597-2.

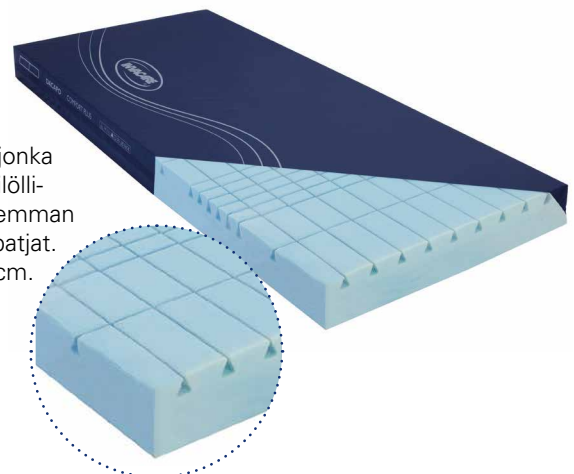

Combi

- Paksuus 14 cm
- Max. 140 kg
- **Top (6 cm)**
 - viskoelastinen vaahtomuovi
 - tiheys 50 kg/m³ ja
 - kovuus 100 N.
- **Base (8 cm)**
 - vaahtomuovi
 - tiheys 38 kg/m³
 - kovuus 140 N.

Dacapo Combi - on painehaavojen ennalta ehkäisyyn tarkoitettu kaksikerroksinen yhdistelmäpatja, joka antaa paremman tuen keholle kuin peruspatjat. Combi -patjojen kaksikerroksinen rakenne antaa paremman tuen, mukautuu kehon muotojen mukaan ja vähentää kitkaa ja kudosten venytystä. Soveltuu käytettäväksi matalan ja keskisuuren paine haavariskin omaavilla henkilöillä. Täyttää palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1 ja European Standard EN 597-2.



Dacapo Heavy User Light

- Paksuus 15 cm
- Max. 250 kg
- (saatavana myös Heavy User 350 kg)
- **Top (5 cm):**
 - viskoelastinen vaahtomuovi
 - tiheys 50 kg/m³
 - kovuus 100 N
- **Base (5 cm):**
 - vaahtomuovi
 - tiheys 38 kg/m³
 - kovuus 140 N
- **Base (5 cm):**
 - korkea tiheyksinen vaahtomuovi
 - tiheys 50 kg/m³
 - kovuus 145 N


Dacapo Heavy User Light on räätälöity kookkaampien käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja tarjoaa tukevan ja mukavan pehmeän tuen. Uniikissa rakenteessa on kaksi kovaa kerrosta ja pehmeämpi päällikerros. Patjan voi kääntää myös toisinpäin jos käyttäjä haluaa makuualustaan entistä kovemman tuen. Suuremmat leveydet tekevät patjasta erinomaisen käytettäväksi Invacaren kotihoitosänkyjen kanssa. Patjan paksuus on 15 cm. Täyttää palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1 ja European Standard EN 597-2.



Lastenpatja Dacapo Child

- Paksuus 8 cm
- Leveys 50-80 cm
- Pituus 140/160/180 cm
- Max. 100 kg
- Ympäristöystävällistä vaahtomuovia
- Tiheys 50 kg/m³
- Kovuus 145 N


Dacapo Child -lastenpatja on yksikerroksinen patja ympäristöystävällisestä vaahtomuovista. Patja on suunniteltu pienemmille, nuoremmille käyttäjille, se on extra pehmeä, kestävä ja siinä on erityisen hyvä hengittävyys. Lisäksi sen suuri tilavuuspaino maksimoi kehon paineen ja patja muotoutuu käyttäjän kehon muotojen mukaisesti ja palautuu muotoonsa täydellisesti. Patjan paksuus on 8 cm. Täyttää palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1 ja European Standard EN 597-2. Saatavana myös vaihtoehtoisesti puuvillapäällisellä.

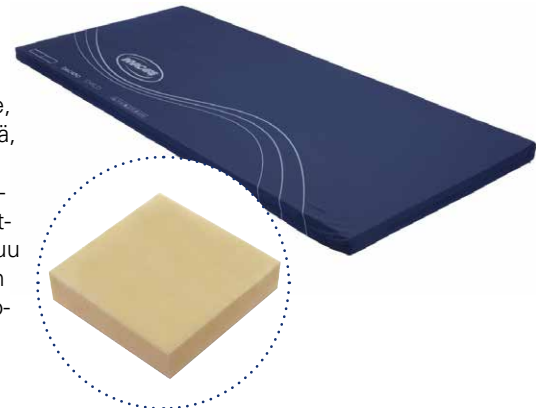

Lastenpatja Dacapo Kid

- Paksuus 10 cm
- Max. 70 kg
- Leveys 77/79 cm
- Pituus 136/156/175 cm
- Ympäristöystävällistä vaahtomuovia
- Täysin piilotettu vetoketju.

Dacapo Kid -lastenpatja on erityisesti NordBed Kid lastensänkyihin suunniteltu yksikerroksinen joustava, tiheä vaahtomuovipatja, jossa neliökuviainen ääriiviiveleikkaus, joka jakaa painetta, vähentää hankaumia ja lisää hengittävyyttä. Saatavana 6 kokoa. Patjan paksuus on 10 cm. Täyttää palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1 ja European Standard EN 597-2.

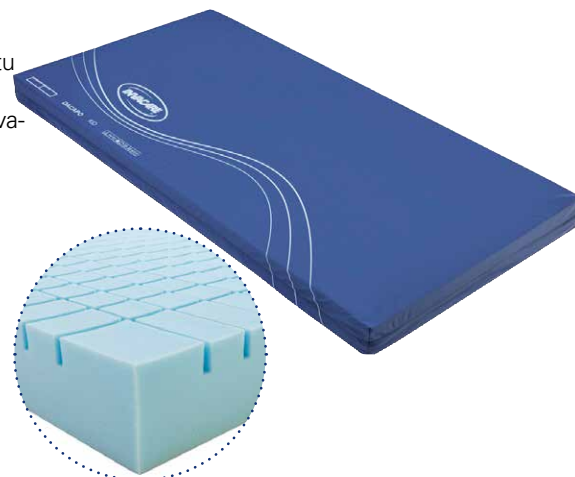

Ominaisuuksia



Optiona päällinen evakuointivöin




Vetoketju

Päällisessä on huomaamaton suojan alle piiloutuva vetoketju kolmella sivulla.



Optiona kantokahvat

Kantokahvat sivuilla helpottaa kantamista

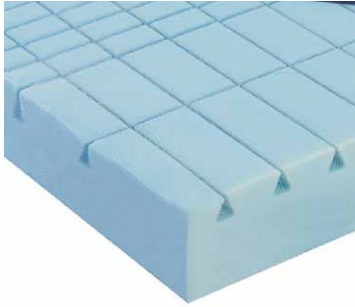

Comfort-materiaali

Pehmeä vaahtomuovi, jonka jokainen neliöleikkaus mukautuu yksilöllisesti kehon muotoihin.



Heavy User -materiaali

kaksi kovaa kerrosta ja pehmeämpi päällikerros.



Combi-yhdistelmä-materiaali

Top (6 cm)

viskoelastinen vaahtomuovi tiheys 50kg/m³ ja kovuus 100N.

Base (8 cm)

vaahtomuovi tiheys 38kg/m³ ja kovuus 140N.

Tekniset tiedot


CE



Paino ▼



Max.käyttäjäpaino ▼

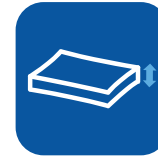

Paksuus ▼

	Paino ▼	Max.käyttäjäpaino ▼	Paksuus ▼
Standard	7 - 10.5 kg	100 kg	100 mm
Basic	8.5 - 12.5 kg	130 kg	120 mm
Heavy User Light	11 - 16.5 kg	250 kg	150 mm
Heavy User	12 - 17.5 kg	350 kg	150 mm
Comfort	11.5 - 17kg	130 kg	120 mm
Comfort Plus	13.5 - 19kg	140 kg	140 mm
Combi	8.5 - 13 kg	140 kg	140 mm
Child	3 kg	100 kg	80 mm
Kid	6 kg	70 kg	100 mm

Päällinen

Konepesu +95°C.
(Puuvillapäällinen +40°C)



Navy blue

- 100% nesteitä läpäisemätön
- Polyuretaanipäällysteistä polyesteriä
- Hengittävä
- Kahteen suuntaan joustava
- Konepestävä +95°C ja rumpukuivaus
- Allergiatestattu ja käsitelty pölypunkkeja vastaan
- Täyttää palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1 ja European Standard EN 597-2.

Valmistaja:

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
h@europe@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita. ©Camp Mobility Finland 2021