

**Vicair® -painehaavapatjat – innovatiivinen ratkaisu
asentohoitoon ja painehaavojen ennaltaehkäisyyn**

Vicair® Academy painehaavapatjat tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän paineentasausta, kivun lievitystä ja optimaalista asentohoitoa, jopa korkean painehaavariskin potilaille.

Vicair® -patjoja voi säätää solujen tiheyden mukaan käyttäjän muotoihin yksilöllisesti sopivaksi ja näin mahdollistaa korkealaatuinen paineentasaus

SmartCells™-solurakenne takaa dynaamisen makuupinta-alan, jota voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän kehonmuotojen mukaan. Nesteitä läpäisemätön hygieniapäällinen voidaan konepestä + 95°:ssa.

**SmartCells™**

Ominaisuuksia



SmartCells™

INDIKAATIOT:

Painehaavojen hoito (taso I-IV), reumatismi, palovammat, terminaalihoito, spastisuus, kyfoosi, kivun lievitys

Ainutlaatuinen SmartCells™ -solurakenne

Vicair tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja vartalon tuentaan: Jokainen patja koostuu sadoista **SmartCells™** -soluista, jotka ovat pieniä ilmatäytteisiä, pyramidin muotoisia soluja, jotka on jaettu **36**:een yksittäiseen "osastoon" patjan sisällä. Joustavat, kangaspäällysteiset solut aiheuttavat vain vähän hankausta kosketuksissa toisiinsa ja adaptoituvat jatkuvasti vartalon muotojen mukaisesti.

Optimaalinen, painetta tasaava ja keventävä makuuasento

Korkealuokkaisen paineen vähennyksen lisäksi, patjat tarjoavat miellyttävän käyttömukavuuden ja erittäin hyvän makuuasennon. Tämän ansiosta Vicair-painehaavapatjat soveltuvatkin myös erittäin korkean painehaavariskin omaaville henkilöille ja henkilöille joilla on jo painehaavaumia (luokka I-IV).

Kevyt ja helppohoitoinen

Innovatiivisen designin ansiosta Vicair-painehaavapatjat ovat turvallisia, kevyitä ja helppoja huoltaa. **SmartCell™**-solut ei hajoa eikä patjan puhkeamista tarvitse pelätä. Yksittäinen osasto voidaan vaihtaa helposti ilman, että koko patjaa tarvitse uusia. Kun patja on kerran säädetty käyttäjän tarpeiden mukaiseksi, ei hoitajien tarvitse jatkossa juurikaan puuttua patjan säätöihin eikä päivittäisiä tarkistuksia tarvita, kuten ilmakennopatioissa.



Irroitettava, kaksikerroksinen hygieeninen päällinen minimoi leikkaus- ja hankausvoiman ja jonka ansiosta käyttäjä voi uppoutua mukavasti patjaan.




Kantokahvat/evakuointivyöt kaikissa neljässä kulmassa mahdollistaa käyttäjän siirtämisen/hätäevakuoinnin patjalla.



36 dynaamisilla SmartCell- soluilla täytetty "osasto" joiden alla on vaahtomuovipatja.


Tekniset tiedot

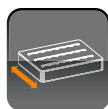

800 / 900 / 1050 /
1200 mm
Lasten patja:
680 mm



2000 mm
Lasten patja:
1400 mm

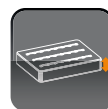

140 mm



8 / 9 kg



250 kg



Päällinen 95°
SmartCells
käsinspesu

Päällinen

CE



Hygieniapäällinen

Joustava, kosteutta läpäisemätön, irrotettava, kaksikerroksinen päällinen voidaan pestä 95°:ssa.



Valmistaja:
Vicair B.V.
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
+31 (0)75 - 642 9999

Camp Mobility Finland pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2017 Camp Mobility Finland