

Jalkaohjaus



Camp Mobility sähköpyörätuolin jalkaohjaus - uusi tekninen innovaatio!

Camp Mobility kehittämä sähköpyörätuolin jalkaohjaus on laajasti patentoitu tekninen innovaatio, joka toimii hienosti myös kaarreajossa ja käännöksissä. Helposti liikuteltava jalkaohjaus toimii kuten normaali joystick herkillä nilkan liikkeillä. Liikuta nilkkaa eteenpäin, kun haluat mennä eteenpäin, taaksepäin kun haluat peruuttaa ja vapautua keskelle, kun haluat jarruttaa. Kääntyminen on helppoa vain kääntämällä nilkkaa hieman sivulle.

Yhteensopiva NYT myös universaalien R-net -elektronian kanssa sekä LiNX- ja DX2 -elektronian kanssa. Jalkaohjauksen mukana tulee ulkoiset ohjauskytkimet, jotka asennetaan pyörätuoliin käyttäjälle sopivaan paikkaan. Ohjaus helposti vaihdettavissa jalkaohjauksesta avustajan-ohjaukseen yhdellä napin painalluksella.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet



Toimii kuten joystick, - mutta nilkan liikkeillä!

Liikuta nilkkaa eteen liikkuaaksesi eteenpäin, taaksepäin peruuttaaksesi, vapautta keskelle jarruttaaksesi. Käännä nilkkaa sivulle kääntyäksesi.



Laajasti patentoitu - yhteensopiva R-net, LiNX- ja DX2 elektroniiikan kanssa

Sopii useimpiin perussähköpyörätuoli malleihin, yhteensopiva universaalien R-net sekä LiNX- ja DX2 elektroniiikan kanssa.




Jalkaohjauksella säädettävissä kaikki tuolin perustoiminnot kuten virta päälle / pois, sähkösäädöt ja ajonopeudet



Kiinnitys jalkatukeen

Jalkaohjaus kiinnitetään sähköpyörätuolin jalkatukeen. Tukeva ja turvallinen poljin toimii kuten normaali joystick: ohjaus vain nilkan liikkeillä.

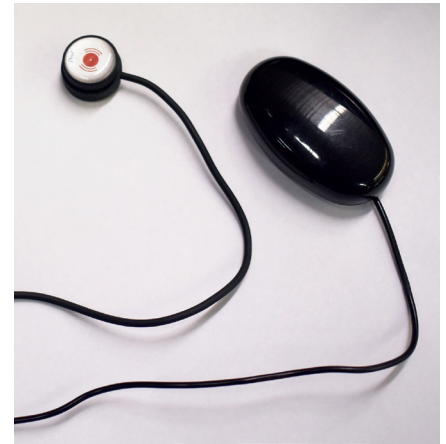

Mukana ulkoiset ohjauskytkimet

Ohjauskytkimet kiinnitetään pyörätuoliin käyttäjälle sopivaan paikkaan. Ohjaus helposti vaihdettavissa jalkaohjauksesta avustajan ohjaukseen painonapin avulla.

Tekniset tiedot



Mitat:
260 x 165 x 50 mm



Paino: 1,25 kg

Valmistus ja myynti:
Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
Finland

Pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä
esitteessä ilmoitettuja tuote-
spesifikaatioita.
Camp Mobility © 2020

**Kiinnostaako jälleenmyynti?
Ota yhteyttä**
info@campmobility.fi