

**LiNX[®]**

Storm⁴ LiNX-elektroniikalla – tyylikästä ja joustavaa liikkuvuutta vaativille käyttäjille

Invacare Storm⁴-sähköpyörätuoli on kehitetty vastaamaan monimutkaisia käyttäjävaatimuksia, jotka koskevat konfiguroitavuutta, adaptoitavuutta ja funktionaalisuutta. Storm4:ssa on vaikuttava suorituskyky sekä ulko- että sisätiloissa. Se tarjoaa turvallisen ja vakaan käyttökokemuksen helppoa ohjattavuutta unohtamatta. Nykyaikaisen muotoilun ansiosta se on myös elegantti ja tyylikäs.

Avainominaisuuksia:

- **Erittäin konfiguroitava**
- **Helppo käyttää**
- **Esteettinen design**
- **LiNX Smart Technology**

Storm⁴ on saatavana nyt vakiona uudella **LiNX**-ohjausjärjestelmällä.

Saatavana myös **Storm⁴ Max 220 kg** ja **UltraLowMaxx** matalalla istuinjärjestelmällä sekä **Storm⁴ X-plore** vaativaan maastoon.

**Yes, you can.[®]**



Erittäin konfiguroitava

Invacare Storm⁴ adaptoituu helposti erilaisiin käyttäjätarpeisiin modulaarisen konseptinsa ansiosta:

- Moottorin tyyppi ja nopeus voidaan valita sisä- tai ulkikäyttöön sopivaksi.
- Modulite™-istuinjärjestelmä ja laaja valikoima selkäosavaihtoehtoja, jotka takaavat hyvän asennon käyttäjälle.
- Mahdollisuus vaihtaa istuinta ja selkäosan leveyttä suuremmalla alueella.
- Teleskooppi-istuin hissi tarjoaa erityisen matalan istuinkorkeuden, jotta pääset paremmin esim. pöydän ääreen.

Helppo käyttää

Storm⁴ on kehitetty erityisesti käytettävyys ja helppous mielessä. Akut ovat erittäin yksinkertaiset irrottaa ja elektroniikkaan pääsee helposti käsiksi, mikä helpottaa nopeaa ja ongelmattonta huoltoa.

Esteettinen design

Storm⁴:n moderni design alleviivaa tukevaa rakennetta, hyviä ajo-ominaisuuksia ja suorituskykyä. Modernit LED-ajovalot lisäävät tyylikkyyttä ja värilliset, vaihdettavat etuhaarukoiden suojat täydentävät valittua runkoväriä.

LiNX Smart Technology: Liikkumisen uusi määritelmä

Invacare LiNX on oivalluksen innoittama ohjausjärjestelmä kehittyneellä teknologialla, joka tarjoaa erinomaisen ajokokemuksen käyttäjille ja antaa ammattilaisille mahdollisuuden konfiguroida ja räätälöidä sähköpyörätuolit nopeasti ja intuitiivisesti.

Älykäs ohjausjärjestelmä mahdollistaa ohjelmointi- ja ylläpitopäivitysten tekemisen langattomasti ja reaaliajassa, ja sillä on suora pääsy tuolin tilastotietoihin ja diagnostiikkaan, mikä antaa ammattilaisille täydellisen näkyvyyden tuotteen käyttö- ja vikahistoriaan.

Kosketusnäyttöteknologia

REM400 ohjaimessa on vaikuttava 3.5" kosketusnäyttö, joka vaatii minimaalisesti voimaa käyttää. Invacare määrittelee liikkumisen apuvälineiden teknologian uudelleen tuomalla modernin nykyaikaisen teknologian sähköpyörätuolimarkkinoille. Tämä innovatiivinen, interaktiivinen ohjain voidaan konfiguroida käyttäjän fyysisten ja kognitiivisten edellytysten mukaisesti.



Erityisohjaimet

LiNX:iin on saatavana valikoima erilaisia ohjaimia niille, jotka eivät pysty käyttämään vakio-ohjainta eikä etähallintaa, mikä maksimoi käyttäjän oman hallinnan ja itsenäisyyden. Vaihtoehtoisia ohjaimia ovat esim. kompakti kauko-ohjain, pienikokoinen kauko-ohjain vähäisellä käyttövoimakkuudella, leukaohjain sekä erilaiset kaksoisohjausmahdollisuudet.

... ja optiot

USB-laturiportit

2 x USB 2.0 porttia tarjoaa 1A virran / portti. Kiskoasennus-ominaisuus mahdollistaa helpon pääsyn.



Integroitu Bluetooth

REM400 ohjain voi olla yhdistettynä 3 eri laitteeseen samanaikaisesti. Lisäksi siinä on hiiritoiminto.

LiNX G-trac teknologia optiona

LiNX-elektronikka parantaa toiminnallisuutta, ajo-ohjausta ja suorituskykyä. Monimutkaisempiin ohjaustarpeisiin LiNX G-Trac (lisävaruste) parantaa ja varmistaa, että tuoli seuraa ohjaimen osoittamia ohjeita.



Matala istuinkorkeus

Erittäin matala istuinkorkeus 400 mm istuinhiissillä mahdollistaa paremman pääsyn pöytien ääreen ja helpommat siirtymiset tuoliin tai ajoneuvoihin.



Istuinkallistus

Manuaalisesti säädettävä tai moottoroitu istuinkallistus max. 25° takaa optimaalisen mukavuuden ja asennon.



Teleskooppi-istuinrunko

Modulite istuinrunгон teleskooppi-design mahdollistaa monenlaiset istuinvaihtoehdot.



Ylöskääntyvät käsituet

Modulite istuimeen voidaan yhdistää monisäädettävät ylöskääntyvät käsituet, jotka helpottavat siirtymisiä ja lisäävät personoitua käyttömukavuutta.



Moottoroitu kallistus

Moottoroitu istuinkallistus tarjoaa korkean keskipisteen luonnollista liikettä varten. Se voidaan asentaa myös jälkikäteen.



Värilliset etuhaarukat

Värilliset, helposti vaihdettavat etuhaarukoiden suojat antavat persoonallisen silauksen.



Sivukiskot

Modulite-teleskooppi-istuimen sivukiskot, mahdollistaa käsitukien ja lisävarusteiden säätämisen täysin yksilöllisesti.



Helppo akkujen sijainti

Akut liukuvat esiin helposti. Avaava vain takaluukku ja vedä akut ulos - ei voi olla helpompaa!










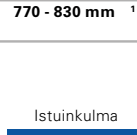
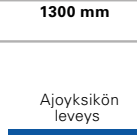

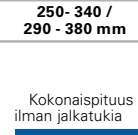
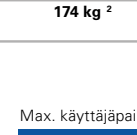
















LED-valaisinjärjestelmä

Miellyttävä design ja vahvat, kirkkaat valot edessä ja takana - turvallista ajoa.



Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Selkäosan korkeus	Kokonaiskorkeus	Selkäosan kulma	Käsituen korkeus	Kokonaispaino
Modulite™	 380 - 530 mm	 410 - 510 mm	 480, 540, 560 mm ^{1,9}	 1020 - 1190 mm	 90 - 120°	 275 - 340 / 325 - 390 mm ¹⁰ 245 - 310 / 295 - 360 mm ¹¹	 174 kg ²
Recaro	 490 - 530 (360) mm	 460 - 510 mm	 770 - 830 mm ¹	 1300 mm	 90 - 135°	 250- 340 / 290 - 380 mm	 174 kg ²
	Istuinkorkeus	Jalkatukien pituus	Istuinkulma	Ajoyksikön leveys	Kokonaispituus sis.jalkatuet	Kokonaispituus ilman jalkatukia	Max. käyttäjäpaino
Invacare Storm⁴	 400 - 650 mm ³ 450 / 480 mm without lifter	 290 - 460 mm ⁴	 0° - 25° ⁸	 630 mm (wheelbase)	 1190 mm ⁶	 910 mm	 150 kg
	Akkukapasiteetti	Kääntösäde	Max. esteen- ylityskyky	Max. kallistuskulma	Moottoriteho	Max.nopeus	Ajomatka
Invacare Storm⁴	 73.5 Ah	 1770 mm	 60 / 100 mm	 20% (11.3°) 15% (8°) hissillä	 340 W	 6, 10 tai 12 km/h	 37 km ⁷




- Mitattu istuinlevystä
- Riippuu kokoonpanosta
- Maasta istuinlevyyn ilman tyynyä
- Mitattu jalkalaudasta istuinlevyyn
- + 50 mm käsituen säätö
- Jalkatuet laajimmassa kulmassa

- Riippuu moottorikonfiguraatiosta, mitattu ISO 7176-4 mukaan @ 6 km/h
- Moottoroitu kallistus; manuaalisesti sääd. 0-9°
- Riippuu selkäosasta
- Yhtenäisellä istuinlevyllä


- Teleskooppi-istuinlevyllä
- Invacare Modulite istuinkomponentit ovat ristiinsopivat kaikkien Invacare sähköpyörätuolien ja osittain Invacare Rea® tuoteperheen kanssa.

Runko- ja tehostevärit

Vakio:

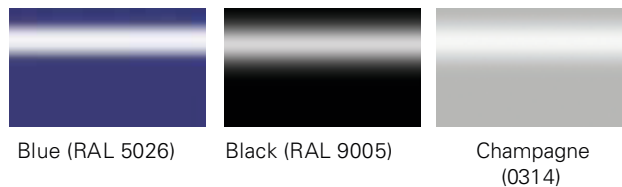

Optiona:

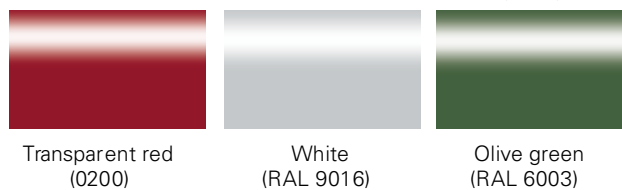

*Erikoistilauksesta mikä tahansa RAL -väri

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© Camp Mobility Finland 2019

Muut mallit

Storm⁴ Max 220 kg

Storm⁴ Max on suunniteltu erityisesti suurempikokoisten henkilöiden tarpeisiin. Sen pidempi runko tukee painon jakautumista ja parantaa kehon liikkuvuutta. Extra vahvat käsi- ja jalkatuet tukevat, kun käyttäjän täytyy työntää itsensä takaisin oikeaan istuma-asentoon tai suorittaa käsillä ja jaloilla jonkinlaista paineenalennusta.

Helppo käyttää

Aivan kuten koko Invacare Storm⁴ -perheelle on ominaista helpokäyttöisyys, myös Maxissa akut ja elektroniikka ovat helposti saatavilla, joten huolto on helppoa. Istuimen syvyyttä on helppo säätää kolmessa vaiheessa, jotka on merkitty istuinrunkoon. Lisävarusteena adapteri istuinsyvyyden lyhentämiseksi.

Sähköinen istuinkallistus 25°

Yksilöllisen istuimukavuuden ja -asennon säätämiseksi myös Storm⁴ Max:ssa on moottoroitu istuinkallistus optio. 0° - 25° kallistus korkealla keskipisteellä vähentää hankausvoimaa ja sitä kautta alentaa painetta.

Optiona saatavana G-Trac™

LiNX G-Trac™ takaa parhaat mahdolliset ajo-ominaisuudet ja -seurannan.



LiNX ohjain ja elektroniikka

Myös Maxissa on LiNX-ohjauksjärjestelmä vakiona. LiNXin uusimman teknologian avulla käyttäjä voi tarkasti hallita ja ennustaa ajamisen.

Vahvistetut käsituet

voidaan asentaa useisiin eri asentoihin sekä säätää leveyssuunnassa.

Yhtenäinen jalkalauta

tukee erilaisia jalkojen asentoja. Se on tarpeeksi vahva, jotta käyttäjä voi työntää itsensä takaisin paikalleen ja tehdä jaloilla jonkinlaista paineenalennusta.

Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus	Jalkatuen pituus	Istuinkulma	Selkäosan kulma	Kokonaispituus
Storm ⁴ Max	490 - 610 mm ¹	560, 595, 630 mm ²	480, 510 mm	570 mm ^{3,4} 630 mm ⁴	360 - 480 mm	0°- 15° ⁵ , 0°- 9° ⁶	0 - 25°	1390 mm
	Ajoyksikön leveys	Kääntöng Kääntösäde	Max. esteen-ylityskyky	Max. kallistus	Moottori	Ajomatka	Nopeus	Max. käyttäjä-paino
Storm ⁴ Max	630 mm ⁷	2080 mm ³	60 mmu	6°(10,5 %)	50 W	p to 31 km ⁸	6 km/h	220 kg

1. Käsituessa + 100 mm säätövara armrest
2. Saatavana adapteri, joka vähentää 130 mm istuinsyvyyttä
3. Vain pienempään (490 mm) istuinrunkoon
4. + 50 mm korkeudensäätö

5. Moottoroitu istuinkallistus
6. Manuaalisesti säädettävä istuinkallistus
7. Pyörien leveys ; Kokonaisleveys : min 670 – max. 855 mm - 975 mm sis. käsituikien leveysäättö
8. ISO 7176-4:2008



Storm⁴ Ultra Low Maxx

Ultra Low Maxx on uusi, innovatiivinen, moottoroitu, ultra matala istuinjärjestelmä, jossa on mm. uudenlainen teknologia painetasaukseen ja asentovaihteluun sis. moottoroitu kallistus (170°), moottoroitu hissi, modulaarinen istuinrunko, 2 eri leveys- ja 2 eri syvyyssäätövaihtoehtoa, eri selkäosavaihtoehtoja ja täysin uudenlainen käsi- ja jalkatuki-valikoima, jotka mahdollistavat laajat säätövaihtoehdot.

Muut ominaisuudet kuten **Storm⁴**.



Kallistus 170°



Hissi 300 mm



Kasvava istuinlusta

Leveys- ja syvyyssäädettävä istuinlusta tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kasvuun. Ultra Rail, modulaarinen kiskojärjestelmä mahdollistaa +100 mm lisäsyvyyssäädön.

Ultra Rail

Jokaisessa kiskossa on liukukanava, jota voidaan käyttää helpottamaan esim. lantionhinnan ja lonkatukien, asentamista.














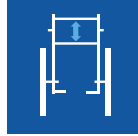







ULTRALow maxx
By Motion Concepts



LNX- ja Pivot Plus -jalkatuet

Moottorilla varustetut jalkatuet takaavat tasaisen liikkeen niveltyvällä alustalla.

Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Selkäosan korkeus	Kokonaiskorkeus	Selkäosan kulma	Käsituen korkeus	Kokonaispaino
Invacare Storm ⁴ Ultra Low Maxx	 405 - 610 mm	 380 - 580 mm ⁵	 60 - 660 mm ^{1,2}	 1250 - 1350 mm ³	 90 - 170° ⁴	 240 - 330 / 320 - 405 mm ⁵	 188 kg ⁶
Invacare Storm ⁴ Ultra Low Maxx	 480 mm ⁷	 280 - 490 mm ⁸	 0 - 50° 0 - 45° ⁹	 630 mm (wheelbase)	 1300 mm ¹	 015 mm	 136 kg ¹⁰
Invacare Storm ⁴ Ultra Low Maxx	 73.5 Ah ¹	 770 mm ⁶	 0 / 100 mm ²	 0% (11.3°)	 340 W	 6 / 10 km/h	 36 km



G-Trac® optiona

- Mitattu istuinlevystä
- Riippuu selkäosasta
- Ilman päätukea
- Vaihtoehtoisesti 8° tai 30° esiasetus
- Riippuu käsituista

- Riippuu konfiguraatiosta
- Maasta istuinlevyyen ilman tynnyä
- Mitattu jalkalaudasta istuinlevyyen
- Hissillä
- 100kg istuinsyvyys 405mm, 90kg istuinsyvyys 380mm