

# Storm<sup>®4</sup> Max



Så mycket mer än  
en stor elrullstol!

LINX<sup>®</sup>



Invacare **Storm<sup>4</sup> Max** är en elrullstol framtagen för tyngre brukare och ger möjligheter i vardagen. Det längre chassit ger en bättre viktfordelning i stolen när brukaren byter position och tyngdpunkten flyttas. Förstärkta arm- och benstöd hjälper brukaren vid förflyttning i och ur stolen. **G-trac<sup>®</sup>** funktionen ger en superb kursstabilitet och brukaren känner sig säkrare och kan njuta av en skönare körupplevelse.

Den eleganta **Storm<sup>4</sup> Max** gör **Storm<sup>4</sup>**-familjen komplett.

## Enkel att använda

Precis som resten av **Invacare Storm<sup>4</sup>**-familjen kännetecknas även **Max** av sin användarvänlighet. Batterier och elektronik är lättåtkomliga för snabb och problemfri service. Sitsens djup kan enkelt justeras i tre steg, som anges på sitsramen. En adapter för att ytterligare minska sittdjupet erbjuds som tillval.

## Egenskaper och tillbehör



### Tilt och ryggfällning

För bästa individuella komfort och positionering kan **Storm<sup>4</sup> Max** utrustas med elektrisk tilt och ryggfällning som tillval. Ryggen kan fällas inom intervallet 0 - 25° och är utformad för att reducera skjuvkrakter.

### Armstöd

De starka och stilfulla armstöden kan monteras i flera olika lägen samt justeras i bredd.

### Fotplatta

Uppfällbar fotplatta.

### Vadplattor

De extra breda vadplattorna till Max är individuellt inställbara i djup och vinkel för att ge maximalt stöd.

## Tekniska data


För mer information om denna produkt, inklusive produktens bruksanvisning, hänvisar vi till [www.invacare.se](http://www.invacare.se).

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Underbenslängd	Sitsvinkel	Intervall ryggstödsvinkel	Längd inkl. benstöd
<b>Storm<sup>4</sup> Max</b>	490 - 610 mm <sup>1</sup>	560, 595, 630 mm <sup>2</sup>	480, 510 mm	570 mm <sup>3,4</sup> , 630 mm <sup>4</sup>	360 - 480 mm	0°- 15° <sup>5</sup> , 0°- 9° <sup>6</sup>	0 - 25°	1390 mm
	Hjulbas	Vändutrymme Max hindertagning	Max säker lutning	Motoreffekt	Körsträcka	Hastighet	Max brukarvikt	
<b>Storm<sup>4</sup> Max</b>	630 mm <sup>7</sup>	2080 mm	6°(10,5%)	350W	up to 31 km <sup>8</sup>	6 km/h	220 kg	


1. Adapter för att minska sittdjup med 130 mm finns
2. Endast för liten sitsram (490 mm)
3. Ytterligare 50 mm höjjustering
4. Elektrisk sitstilt
5. Manuellt inställbar sitstilt
6. Bredd hjulbas, övergripande mått: min 670 - max 890 mm inkl armstödsbredd.
7. enligt ISO 7176-4:2008



## Standardfärger

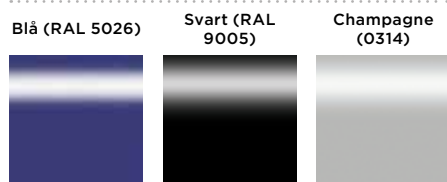

## Alternativa färger

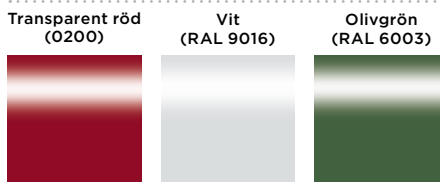

Kundservice: 08-761 70 90  
 Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
 Box 66 - 163 91 Spånga  
 Sweden

