



**LiNX**<sup>®</sup>

## **TDX SP2<sup>NB</sup> -sähköpyörätuoli + LiNX -ohjausjärjestelmä – keskivetoisten parhaimmistoa kapealla alustalla**

*Invacare* **TDX SP2<sup>NB</sup>** on keskivetoinen sähköpyörätuoli huomattavan pienikokoisella, kapealla, kestäväällä ja suorituskykyisellä alustalla. **TDX SP2<sup>NB</sup>**:ssä on hyvä ohjattavuus sisätiloissa ja ulkona sekä laaja valikoima istuinvaihtoehtoja optimaalisen mukavuuden ja tuen saavuttamiseksi. **TDX SP2<sup>NB</sup>** on sähköpyörätuoli henkilöille, jotka tarvitsevat täydellistä toiminnallisuutta, mutta eivät halua tinkiä tyylikyydestä.

Ainutlaatuinen **Module<sup>TM</sup>** -istuinjärjestelmä tekee oikeiden säätöjen löytämisestä yksinkertaista ja helppoa.

**TDX SP2<sup>NB</sup>** on saatavana nyt myös uudella **LiNX**-ohjausjärjestelmällä (optio). Vakiona DX2-ohjain.

Saatavana myös **TDX SP2** leveämmällä alustalla sekä molemmat mallit uudella **UltraLowMaxx** -matalalla istuinjärjestelmällä.



**Yes, you can.<sup>®</sup>**

## TDX SP2<sup>NB</sup>:n merkittävimpiä etuja ovat:

- Uusi kapeampi NB -alusta
- Parempi stabiliteetti
- Intuitiivinen ajokokemus
- Hissi ja kallistus (optio)
- LiNX<sup>®</sup> -ohjausjärjestelmä (optio, vakiona DX2 )
- Modulite<sup>™</sup> -istuinjärjestelmä (optio)
- MatrX<sup>™</sup> -istuinpehmusteet (lisävaruste)
- G-Trac<sup>®</sup> -järjestelmä (lisävaruste)



## Kehittynyt vakaus

**TDX SP2<sup>NB</sup>** on kokeiltu, testattu ja kestävä. Stability Lock -vakauslukitustoiminto takaa vakauden ja turvallisuuden, ja että kaikki kuusi pyörää pysyvät tukevasti maassa epätasaisellakin alustalla. Patentoitu SureStep<sup>®</sup> -jousitustekniikka mahdollistaa tasaisen pyörimisen ja myötäilee epätasaisia haastavia pintoja.

## Intuitiivinen ajokokemus

**TDX SP2<sup>NB</sup>**:n käyttäjät voivat sanoa "Kyllä" liikkuvuudelle ja "Ei" kompromisseille. Uskomattoman tiukan kääntösäteen ja kompaktin alustan sekä sen keskivetoisen pyörärakenteen ansiosta NB -alusta tarjoaa erinomaisen ohjattavuuden ja intuitiivisen ajokokemuksen.

## Simply Smart LiNX -ohjausjärjestelmä

Invacare **LiNX** on uusi ohjausjärjestelmä, joka oppii ajan mittaan käyttäjän ajotavat ja mahdollistaa käyttäjille uudenlaisen ajokokemuksen. Ainutlaatuisen modulaarisen muotoilun ansiosta järjestelmää voidaan saumattomasti laajentaa ja räätälöidä käyttäjien tarpeiden mukaan. LiNXin yksinkertaisesti älykäs Simply

Smart -tekniikka sisältää ohjelmointi- ja ylläpitopäivityksiä, jotka voidaan tehdä langattomasti ja reaaliajassa, mikä helpottaa huoltopalvelua. Helppokäyttöisten tilastotietojen ja diagnostiikkatietojen ansiosta LiNX mahdollistaa ammattilaisille täydellisen näkyvyyden tuotteen käyttö- ja vikahistoriaan.



### REM400-kosketusnäyttöohjain

Invacare on tuonut nykyaikaisen kosketusnäyttöteknologian sähköpyörätuolimarkkinoille: REM400-kaukosäätimessä on vaikuttava 3,5 tuuman kosketusnäyttö, joka vaatii vain vähän voimaa. Tämä innovatiivinen interaktiivinen kaukosäädin voidaan konfiguroida käyttäjien fyysisten ja kognitiivisten kykyjen mukaiseksi.

### Paljon muitakin ohjainvaihtoehtoja

LiNX:iin on saatavana valikoima erilaisia ohjaimia niille, jotka eivät pysty käyttämään vakio-ohjainta eikä etähallintaa, mikä maksimoi käyttäjän oman hallinnan ja itsenäisyyden. Vaihtoehtoisia ohjaimia ovat esim. kompakti kauko-ohjain, pienikokoinen kauko-ohjain vähäisellä käyttövoimakkuudella, leukaohjain sekä erilaiset kaksoisohjausmahdollisuudet.

### Integroitu Bluetooth

REM400 ohjain voi olla yhdistettynä 3 eri laitteeseen samanaikaisesti. Lisäksi siinä on hiiritoiminto.

## Ominaisuudet



### LiNX G-Trac® teknonologia

G-Trac® (lisävaruste) tuo lisseeratavuutta käyttöön ja varmistaa, että tuoli toimii ohjaukseen ohjelmoitujen ohjeiden mukaisesti.



### Yhdet sivuhaarukat

Pienentää alustan etuosaa ilman ulkonevia ruuveja tai haarukan osia.

### USB-laturi

2 USB 2.0 porttia, kukin 1A virtasyötöllä pitää laitteet ladattuina. Helppo pääsy kiskokiinnityksellä.



### DuraWatt moottorit

Hiljaiset moottorit, joissa on tiiviit käyttöikäiset harjat, vähentävät mahdollisia harjatoleranssiongelmia.



### Mustat renkaat ja tukipyörät

Mustat, ei-jälkiä jättävät tukipyörät ja renkaat, joissa on mustat vanteet, antavat tyylikkään modernin ilmeen.



### SureStep® ja Stability Lock

Mahdollistaa esteiden ykityksen ja takaa sujuvat siirtymiset alaspäin.



### Keskivetoinen kapea NB-alusta

Mahdollistaa erinomaisen ohjattavuuden kapeissa tiloissa ja takaa intuitiivisen ajokokemuksen.



### LED-valaisinjärjestelmä

Miellyttävä design ja vahvat, kirkkaat valot edessä ja takana - turvallista ajoa.



### Istuinhissi ja kallistus

Tarjoaa helposti ulottuvuuden korkeammalle ja kallistus mahdollistaa rentoutumisen ja paineen uudelleenjakamisen.



### Moottoroitu, kiinteä Pivot Tilt -jalkaosan kallistus (lisävaruste)

Mahdollistaa istuinkulman sijoittamisen uudelleen enintään 20°.



### Moottoroitu tilt-in-space -kallistus

Suurin istuinkulma 30° mukavasti ja turvallisesti.



### Korkeussäädettävät jalkatuet

Sivulle asennettavat jalkatuet saatavana manuaalisella tai sähköisellä korkeudensäädöllä.



### Moottoroidut, keskikiinnitteiset LNX-jalkatuet

Tarjoaa aktiivisen istuma-asennon ja mahdollistaa jalkojen pidon 90° kulmassa.



### Moottoroitu selkäosan kallistus

Suuri kääntösäde, joka sopii selän luonnolliselle liikkeelle ja nopea irrotusmekanismi, joka helpottaa taittoa ja kuljetusta.



### Teleskooppi-istuinalusta

Erityinen matalaprofiilinen sisäkehys, yhdessä "tiltin" ja "hissin ja tilitin" kanssa, mahdollistaa erilaisille käyttäjille optimaaliset istuinkorkeudet.

## Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosankorkeus	Käsituenkorkeus	Jalkatuen pituus	Istuinkulma
<b>Modulite™</b> 1-osainen istuin	440 - 480 mm <sup>1</sup>	410 - 510 mm	450 mm <sup>4</sup>	480 mm <sup>7</sup>	275 - 340 mm	290 - 460 mm <sup>8</sup>	0 - 8°
<b>Modulite™</b> teleskooppi-istuin	380 - 530 mm <sup>2</sup>	410 - 510 mm 510 - 560 mm <sup>3</sup>	450 / 475 mm <sup>4,5</sup> 475 - 775 mm <sup>6</sup>	480, 540, 560 mm <sup>7</sup>	245 - 310 mm	290 - 460 mm <sup>8</sup>	0 - 20° / 0 - 30° <sup>5</sup>
	Selkäosankulma	Kokonaiskorkeus	Kokonaisleveys	Kokonaispituus sis.jalkatuet	Kokonaispituus ilman jalkatukia	Max.käyttäjäpaino	Akkukapasiteetti
<b>Modulite™</b> 1-osainen istuin	90° - 120°	1010 mm <sup>11</sup>	610 mm <sup>10</sup>	1160 mm <sup>9</sup>	980 mm	150 kg	50 Ah
<b>Modulite™</b> teleskooppi-istuin	90° - 120°	1010 - 1170 mm <sup>11</sup>					
	Kääntösäde	Max. esteen- ylityskorkeus	Max. kallistuskulma	Moottorikapasiteetti	Nopeus	Ajomatka	Paino
	1120 mm	75 mm	9° / 16 %	2 x 340 W	up to 26 km <sup>12</sup>	6 and 10 km/h	138 kg <sup>11</sup>



**matrix**  
SEATING SERIES

Invacare **Modulite™**  
Individual fit and adaptability



- Istuintyynyllä 430 mm
- 50 mm lisää käsitukien säädöllä
- Pidemmillä profiilikiskolla pidennetty istuinsyvyys
- Maasta istuinlevyyden ilman tyyntyä
- Hissillä ja moottoroidulla tilitillä
- Hissillä
- Mitattuna istuinlevystä
- Mitattuna jalkalevystä istuinlevyyden

- Riippuu istuinrasenosta
- Alustan leveys
- Riippuu kokoonpanosta
- ISO 7176-4:2008 mukaisesti
- Invacare Modulite™ istuincomponetit ovat yhteensopivia kaikkien Invacare sähköpyörätuolien kanssa ja osan Invacare Rea®-tuoteperheen tuotteiden kanssa.

## Runkovärit




Island Blue



Lights Out Matte - Black



RockStar Red

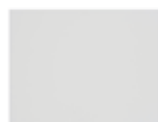

WhiteOut



SpaceStation Silver



Monster Green



Tangy Orange



Invacare Blue



Black Ice - Glossy



Grape JellyBean

Valmistaja:  
Invacare International Sàrl  
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland  
Tel: +41 (0)22 354 60 10  
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
hqeurope@invacare.com  
www.invacare.eu.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2017



Scan here to access the LINX website.