



LiNX

TDX SP2 NB -sähköpyörätuoli + LiNX -ohjausjärjestelmä – keskivetoisten parhaimmistoa kapealla alustalla

Invacare TDX SP2NB on keskivetoinen sähköpyörätuoli huomattavan pienikokoisella, kapealla, kestäväällä ja suorituskykyisellä alustalla. TDX SP2NB :ssä on hyvä ohjattavuus sisätiloissa ja ulkona sekä laaja valikoima istuinvaihtoehtoja optimaalisen mukavuuden ja tuen saavuttamiseksi. TDX SP2NB on sähköpyörätuoli henkilöille, jotka tarvitsevat täydellistä toiminnallisuutta, mutta eivät halua tinkiä tyylikyydestä.

Ainutlaatuinen **Module™** -istuinjärjestelmä tekee oikeiden säätöjen löytämisestä yksinkertaista ja helppoa. TDX SP2NB:ssä on vakiona LiNX-ohjausjärjestelmä.



Saatavana myös TDX SP2 leveämmällä alustalla sekä molemmat mallit uudella **UltraLowMaxx** -matalalla istuinjärjestelmällä.



Yes, you can.®

TDX SP2NB:n merkittävimpiä etuja ovat:

- Uusi kapeampi NB -alusta
- Parempi stabiliteetti
- Intuitiivinen ajokokemus
- LiNX® -ohjausjärjestelmä
- Modulite™ -istuinjärjestelmä
- MatrX™ -istuinpehmusteet (lisävaruste)
- G-Trac® -järjestelmä (lisävaruste)



Kehittynyt vakaus

TDX SP2 NB on kokeiltu, testattu ja kestävä. Stability Lock -vakauslukitustoiminto takaa vakauden ja turvallisuuden, ja että kaikki kuusi pyörää pysyvät tukevasti maassa epätasaisellakin alustalla. Patentoitu SureStep® -jousitustekniikka mahdollistaa tasaisen pyörimisen ja myötäilee epätasaisia haastavia pintoja.

Intuitiivinen ajokokemus

TDX SP2 NB:n käyttäjät voivat sanoa "Kyllä" liikkuvuudelle ja "Ei" kompromisseille. Uskomattoman tiukan kääntösäteen ja kompaktin alustan sekä sen keskivetoisen pyörärakenteen ansiosta NB -alusta tarjoaa erinomaisen ohjattavuuden ja intuitiivisen ajokokemuksen.

Simply Smart LiNX -ohjausjärjestelmä

Invacare LiNX on oivalluksen innoittama ohjausjärjestelmä kehittyneellä teknologialla, joka tarjoaa erinomaisen ajokokemuksen käyttäjille ja antaa ammattilaisille mahdollisuuden konfiguroida ja räätälöidä sähköpyörätuolit nopeasti ja intuitiivisesti.

Älykäs ohjausjärjestelmä mahdollistaa ohjelmointi- ja ylläpitopäivitysten tekemisen langattomasti ja reaaliajassa, ja sillä on suora pääsy tuolin tilastotietoihin ja diagnostiikkaan, mikä antaa ammattilaisille täydellisen näkyvyyden tuotteen käyttö- ja vikahistoriaan.



REM400-kosketusnäyttöohjain

Invacare on tuonut nykyaikaisen kosketusnäyttöteknologian sähköpyörätuolimarkkinoille: REM400-kaukosäätimessä on vaikuttava 3,5 tuuman kosketusnäyttö, joka vaatii vain vähän voimaa. Tämä innovatiivinen interaktiivinen kaukosäädin voidaan konfiguroida käyttäjien fyysisten ja kognitiivisten kykyjen mukaiseksi.



Paljon muitakin ohjainvaihtoehtoja

LiNX:iin on saatavana valikoima erilaisia ohjaimia niille, jotka eivät pysty käyttämään vakio-ohjainta eikä etähallintaa, mikä maksimoi käyttäjän oman hallinnan ja itsenäisyyden. Vaihtoehtoisia ohjaimia ovat esim. kompakti kauko-ohjain, pienikokoinen kauko-ohjain vähäisellä käyttövoimakkuudella, leukaohjain sekä erilaiset kaksoisohjausmahdollisuudet.



Integroitu Bluetooth

REM400 ohjain voi olla yhdistettynä 3 eri laitteeseen samanaikaisesti. Lisäksi siinä on hiiritoiminto.

Ominaisuudet



LiNX G-Trac® teknonologia
G-Trac® (lisävaruste) tuo lisseuratavuutta käyttöön ja varmistaa, että tuoli toimii ohjaukseen ohjelmoitujen ohjeiden mukaisesti.



Yhden sivuhaarukat
Pienentää alustan etuosaa ilman ulkonevia ruuveja tai haarukan osia

USB-laturi
2 USB 2.0 porttia, kukin 1A virtasyötöllä pitää laitteet ladattuina. Helppo pääsy kiskokiinnityksellä.



Mustat renkaat ja tukipyörät
Mustat, ei-jälkiä jättävät tukipyörät ja renkaat, joissa on mustat vanteet, antavat tyylikkään modernin ilmeen.



SureStep® ja Stability Lock
Mahdollistaa esteiden ykityksen ja takaa sujuvat siirtymiset alaspäin.



Keskivetoinen kapea NB-alusta
Mahdollistaa erinomaisen ohjattavuuden kapeissa tiloissa ja takaa intuitiivisen ajokokemuksen.



LED-valaisinjärjestelmä
Miellyttävä design ja vahvat, kirkkaat valot edessä ja takana - turvallista ajoa



Istuinhissi ja kallistus
Tarjoaa helposti ulottuvuuden korkeammalle ja kallistus mahdollistaa rentoutumisen ja paineen uudelleenjakamisen.



Moottoroitu, kiinteä Pivot Tilt -jalkaosan kallistus (lisävaruste)
Mahdollistaa istuinkulman sijoittamisen uudelleen enintään 20°.



Moottoroitu tilt-in-space -kallistus
Suurin istuinkulma 30° mukavasti ja turvallisesti.



Korkeussäädettävät jalkatuet
Sivulle asennettavat jalkatuet saatavana manuaalisella tai sähköisellä korkeudensäädöllä.



Moottoroidut, keskikiinnitteiset LNX-jalkatuet
Tarjoaa aktiivisen istuma-asennon ja mahdollistaa jalkojen pidon 90° kulmassa.



Moottoroitu selkäosan kallistus
Suuri kääntösäde, joka sopii selän luonnolliselle liikkeelle ja nopea irrotusmekanismi, joka helpottaa taittoa ja kuljetusta.



Teleskooppi-istuinalusta
Erityinen matalaprofiilinen sisäkehys, yhdessä "tiltin" ja "hissin ja tilitin" kanssa, mahdollistaa erilaisille käyttäjille optimaaliset istuinkorkeudet.

Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosankorkeus	Käsituenkorkeus	Jalkatuen pituus	Istuinkulma
Modulite™ 1-osainen istuin	440 - 480 mm ¹	410 - 510 mm	450 mm ⁴	480 mm ⁷	275 - 340 mm	290 - 460 mm ⁸	0 - 8°
Modulite™ teleskooppi-istuin	380 - 530 mm ²	410 - 510 mm ³ 510 - 560 mm	450 / 475 mm ^{4,5} 475 - 775 mm ⁶	480, 540, ⁷ 560 mm	245 - 310 mm	290 - 460 mm ⁸	0 - 20° / 0 - 30° ⁵
	Selkäosankulma	Kokonaiskorkeus	Kokonaisleveys	Kokonaispituus sis.jalkatuot	Kokonaispituus ilman jalkatukia	Max.käyttäjäpaino	Akkukapasiteetti
Modulite™ 1-osainen istuin	90° - 120°	1010 mm ¹¹	610 mm ¹⁰	1160 mm ⁹	980 mm	150 kg	50 Ah
Modulite™ teleskooppi-istuin	90° - 120°	1010 - 1170 mm ¹¹					
	Kääntösäde	Max. esteen- ylityskorkeus	Max. kallistuskulma	Moottorikapasiteetti	Nopeus	Ajomatka	Paino
	1120 mm	75 mm	9° / 16 %	2 x 340 W	up to 26 km ¹²	6 and 10 km/h	138 kg ¹¹



matrix
SEATING SERIES

Invacare® **Modulite™**
Individual fit and adaptability



- Istuintyynyllä 430 mm
- 50 mm lisää käsitukien säädöllä
- Pidemmillä profiilikiskolla pidennetty istuinsyvyys
- Maasta istuinleveyden ilman tyyntyä
- Hissillä ja moottoroidulla tilitillä
- Hissillä
- Mitattuna istuinleveyttä
- Mitattuna jalkaleveyttä istuinleveyden

- Riippuu istuinrasennosta
- Alustan leveys
- Riippuu kokoonpanosta
- ISO 7176-4:2008 mukaisesti
- Invacare Modulite™ istuinomponentit ovat yhteensopivia kaikkien Invacare sähköpyörätuolien kanssa ja osan Invacare Rea® -tuoteperheen tuotteiden kanssa.

Runkovärit




Island Blue



Lights Out Matte -
Black



RockStar Red

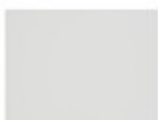

WhiteOut



SpaceStation
Silver



Monster Green



Tangy Orange



Invacare Blue



Black Ice - Glossy



Grape JellyBean

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Valmistaja pidättää itsellään
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2017



Scan here to access
the LINX website.