



Verso

Lightweight Adaptable
POWERED WHEELCHAIR

VERMEIREN
we care for you

Verso

kevyt,kokoontaitettava SÄHKÖPYÖRÄTUOLI

Verso on monipuolinen, pienessä tilassa liikuteltava kevytsähköpyörätuoli. Sen kevyt muotoilu tekee siitä täydellisen pyörätuolin käyttäjille, jotka haluavat laajentaa liikkuvuuttaan mukavuudesta tinkimättä.

Laajan optiovaihtoehtojen ja asiantuntemuksemme ansiosta Verso tarjoaa käyttäjälleen huomattavan mukautumiskyvyn eri tilanteisiin. Verso on suunniteltu yhdistämällä manuaalipyörätuolin rungon kestävyys kahden moottoroidun takapyörän edistyneisiin ominaisuuksiin. Se on täydellinen valinta mukavaksi, kevytsähköpyörätuoliksi joka voidaan muuntaa manuaalipyörätuoliksi takarenkaat vaihtamalla. Litium-akku voidaan irrottaa latausta varten, mikä lisää mukavuutta päivittäisessä käytössä.

VERMEIREN
we care for you







STANDARDI KOKOONPANO



EASY TO USE

Yksinkertaista, mutta silti täydellistä. Versossa on kaikki tarvitsemasi ominaisuudet. Irrota pyörätuoli takarengaista muutamassa sekunnissa. Kaikki osat ovat helppoja kuljettaa, eivätkä ne ole liian painavia helppoon kuljettamiseen autossa.

Kokoaminen on helppoa Click&Drive-järjestelmän avulla. Et tarvitse työkaluja, kytke vain akku ja olet valmis ajamaan! Irrotettavan akun ansiosta voit ladata tuolin milloin ja missä haluat.



Verso soveltuu kuljettamiseen lentokoneessa!

Irrota vain akku ja pyörätuolin voi ottaa mukaan lennolle. Katso kuljetusohjeet käyttöohjeesta.

EASY TO TRAVEL

Verson ainutlaatuinen ominaisuus on irrotettava moottori ja akkukotelo. Irrota pyörätuoli akusta ja pyörän akkukotelosta, jotta se on helppo säilyttää ja kuljettaa. Sekä Verson rungossa että "moottoriosassa" on lisäpyörä, jotta varmistetaan, ettei mikään osa voi vaurioitua irrottamalla. Ne mahdollistavat myös helpon ohjaamisen. Istuinosaa voidaan helposti taittaa kokoon kuten mikä tahansa manuaalipyörätuoli. Täydellinen kuljetukseen auton takakontissa tai säilytykseen kotonasi.



LIGHTWEIGHT

31,3 kg

Kokonaispaino



16,2 kg

Painavin osa



9,9 kg

Kuljetuspaino
(sis. istuintyyny, käsi- ja jalkatuet)

Välitämme sinusta... ja selästäsi. Verso on erittäin kevytsähköpyörätuoli, jonka moottoriosaa painaa vain 16,2 kg ja runko 9,9 kg. Helppo nostaa ilman rasitusta.






DRIVING EXPERIENCE



Ohjain

P&G-ohjain on juuri sellainen kuin mistä me pidämme VERMEIRENeissä: Akun tila -ilmaisimen, nopeussäätimen ja mukavan joystickin ansiosta tämä ohjain on helppokäyttöinen. Myös perusohjelmointi on mahdollista mukauttaaksesi ajokokemuksesi itsellesi sopivaksi.

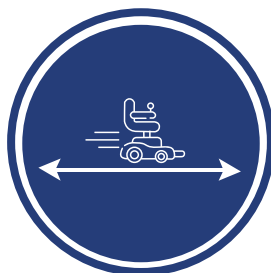

Jopa 21 km

Koe pidempi ajomatka isommalla 17,5 Ah:n akulla.



6 km/h

Verson 6 km/h nopeuden avulla voit ajaa juuri sopivalla nopeudella ja käydä mukavaa keskustelua ja kävelyvauhtia ystäväsi ja perheesi kanssa.



AKKU - MOOTTORIT

Litium-ioni-akussa (saatavana 12,8 Ah tai 17,5 Ah) on akun tilan ilmaisin ja se on kevyt. Avaa akun lukitus helposti omalla varkaudenestoavaimellasi ladataksesi akun missä haluat. Jos ei ole aikaa ladata, lisääkku on saatavana lisävarusteena.

Akku sijaitsee kätevästi pyörätuolin takana, joten siihen pääsee helposti käsiksi. Se on irrotettava lataamista varten tai tarkistaaksesi akun tilan nopeasti.

2 x 250 W moottorilla ja 12" PU-renkailla Verso kilpailee kategoriassaan muiden kanssa. Loistava ja kestävä valinta kevytsähköpyörätuoliksi jokapäiväiseen käyttöön.

Irrotettava
Li-ion
akku

12,8 Ah - 24 V
17,5 Ah - 24 V

2 x 250 W
moottorit





CAUTION
• Store in cool and dry place!
• Do not expose the product to fire, water or moisture!

100% 80% 50% 20%

A close-up photograph of a black bicycle frame. A bright blue rectangular label with the word 'Verso' in black, stylized font is attached to the frame with two black screws. The background is blurred, showing other parts of the bike and a white background.

DESIGN & COLOUR

Tyylikäsi muotoilu ja hauskoja väriaksentteja sisältävä Verso voidaan mukauttaa mieltymystesi mukaan samalla, kun se näyttää modernilta ja houkuttelevalta. Värikorosteilla on kaksi tarkoitusta: niiden avulla voit helposti paikantaa myös moottoriosan vivut. Lisäsimme turvallisuutta myös lisäämällä heijastimia.

VÄRIT

Värit ovat henkilökohtainen valinta, aivan kuten Versosikin. Valitse tyyliisi parhaiten sopiva väriyhdistelmä.

Valitse rungon väri kiiltävän valkoisen ja kiiltävän mustan väliltä ja tee siitä tyyliisi sopiva tehostevärillä.

Tehosteväri- vaihtoehdot

• Verso •

glossy light blue

• Verso •

glossy light green

• Verso •

glossy orange

• Verso •

glossy white





HIGHLY CONFIGURABLE

Varustele Versosi tarpeisiisi sopivaksi. Verso on erittäin muokattavissa oleva tuoli, jossa yhdistyvät VERMEIRENin laaja lisävarustevalikoima ja asiantuntemuksemme sähköpyörätuoleista. Valitse mikä sopii sinulle parhaiten!

TWO in ONE

MUUTA **Verso** MANUAALIPYÖRÄTUOLIKSI

24" kelausrenkailla

Verso tarjoaa ainutlaatuisen vaihtoehdon ihmisille, jotka tarvitsevat sekä manuaali- että sähköpyörätuolia. 24" kuljetuspyöräsarjan avulla voit helposti vaihtaa manuaali- ja sähköpyörätuolin välillä.

Plug and drive!



OPTIOT

Laajan optio- ja lisävarustevalikoiman ansiosta Verso sopii täydellisesti yksilöllisiin tarpeisiin sekä avustajan/ huoltajan tarpeisiin. Kokoa tarvitsemasi tuoli laajan valikoimamme avulla.



Lisää lisävarusteita tilauskaavakkeessa.



TEKNISET TIEDOT

■ Kokonaisleveys	IL + 17cm
■ Kokonaispituus	1078 mm
■ Istuinkorkeus	521 mm
■ Istuinleveydet	440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Istuinsyvydet	420 - 480 mm
■ Selkäosan korkeudet	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm

■ Akut	12,8 Ah - 24 V 17,5 Ah - 24 V
■ Moottorit	2 x 250 W
■ Nopeus*	6 km/h
■ Ajomatka*	15 km 21 km
■ Paino	31,3 kg
■ Max. käyttäjäpaino	130 kg

*Mitat mm ja kg. Koko- ja painopoikkeamat (15 mm ja 1,5 kg) ovat mahdollisia. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Kuvat ovat vain havainnollistavia. Tietyt ominaisuudet voivat olla optiona.



Verso

Lightweight Adaptable
POWERED WHEELCHAIR

VERMEIREN Group

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgium

www.vermeiren.com
info@vermeiren.com



Myynti Suomessa:

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

09-350 76 310
info@campmobility.fi

www.campmobility.fi