



FOURX



FourX **Ainoa suomalainen sähköpyörätuoli** **nelivetovoimaa sisä- ja ulkokäyttöön ja suomalaisiin sääolosuhteisiin**

FourX 4-vetosähköpyörätuolit suomalaiseen sisä- ja erityisesti ulkokäyttöön tarkoitetut, nelivetoiset sähköpyörätuolit soveltuvat vaativaan ajoon epätasaisillakin alustoilla. Ainutlaatuisen 4-pyörävedon, 4-pyöräohjauksen ja 4-pyöräjousituksen ansiosta ajo rankassakin maastossa on taiseisen varmaa.

Four X DL on vakiona aina patentoitu joustorunko, jossa kallistus, iskunvaimennus ja istuimessa painopisteen säätö. Joustorunko takaa, että vaikeissakin olosuhteissa, kaikki neljä pyörää pysyvät maassa. Lisäksi Four X -sähköpyörätuoleissa on LiNX-tai R-Net elektroniikka (optio), led-ajo-

valot, vilkut, säädettävät pää-, käsi- ja jalkatuet, turvavyöt ja kiinnityspisteet. Vakio-ohjausrasia LiNX REM216. Valittavissa myös esim. uusi REM400 kosketusnäyttöohjain ja muita erikoisohjaimia. Ajomatka n. 35 km. Nopeus max. 10 km/h. Käyttökaltevuus 20°. Esteenylityskyky 11,5 cm. Saatavana myös FourX DL Lift hissitoiminnolla tai pystyynnostava FourX SSS (Stand Support System) -malli.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet

Four X DL -malli on aina varustettu kattavasti käyttövalmiilla ominaisuuksilla kuten:

- Patentoitu joustava alusta
- Istuin ja selkäosan kallistus
- Painopisteen säätö
- Led-ajovalot ja merkkivalot
- LED-takavalot ja merkkivalot
- 4 taksikoukku (ISO 7176-19)
- Turvavyö
- Säädettävä pää-/niskatuki
- Säädettävät käsinojat
- Säädettävä jalkatuki
- Vakiokokoiset istuin- ja selkäosantyynt



Joustava ja kääntyvä etu- ja taka-akseli



REM 216

Ajotoiminnot, nopeuden-, vilkkujen, ajo- ja varoitusvalojen ja istuimen säätö, äänitorvi, diagnostiikka



REM 400

Kosketusnäyttö + joystick

Tekniset tiedot


| Istuinleveys | Istuinsyvyys | stuinkorkeus | Selkäosankorkeus | Kokonaisleveys | Pituus (sis. jalkatuet) | Korkeus (ilman päätukea) |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| 40-48 cm | 39-51 cm | 46,5 cm * | 50-60 cm | 69,5 cm (74,5 cm leveät renkaat) Max. esteen-ylityskorkeus | 125 cm | 70-85 cm |
| Paino | Max.käyttäjäpaino | Akkukapasiteetti | Kääntösäde | Max. kallistuskulma | Muut | |
| | | | | | | |
| 140 /170 kg** | 125 kg | 4 x 74 Ah | 115 cm | 11,5 cm | 20% | |
| Moottorikapasiteetti | Nopeus | Ajomatka | | | | |
| | | | | | | |
| 4 x 250 W | Max. 10 km/h | noin 35 km | | | | |

* 8" renkailla
** DL Lift ja SSS



Täyttää EU direktiivin MDD93/42 ja vaatimukset

* Vakiovärit ovat musta ja harmaa, muut RAL-värit erikoistilauksella.

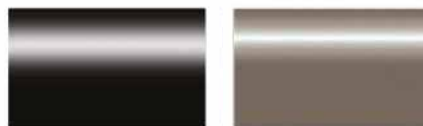

Musta

Harmaa

Optiot

FourX DL Lift (hissillä)



FourX SSS (seisomaannostava)



Custom värit / RAL-kartastovärit



MOVENTURAS OY
Laskutus: Laajalahdentie 23,
00330 Helsinki, Finland.
Toimitusosoite:
Moventuras Oy
Kettulanlahdentie 10,
70400 Kuopio, Finland
First name@moventuras.com
www.moventuras.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland