

Sisäsähkö- pyörätuolit

Euroflex



Flexmobil i6 SitRite


Flexmobil i6 SitRite on sisäkäyttöön kehitetty sähköpyörätuoli/työtuoli, joka tarjoaa liikkumisen vapauden kotona, töissä sekä perheen ja ystävien kanssa vietetyllä ajalla. Tuoli on varustettu innovatiivisella rungolla, jossa on laajempi istuinkorkeus ja hiljainen ääni. Istuin kallistuu jopa -19 asteeseen, mikä helpottaa tuoliin siirtymistä ja siitä poistumista. Sinä olet se, joka näkyy ja kuuluu – ei tuoli.

Sopii käyttäjille, joilla aktiivisuustaso heikentynyt:

✓ vähän ✓ keskitaso ✓ laaja ✓ sisään ulos lapsille ✓ aikuisille



ISTUINJÄRJESTELMÄT SitRite

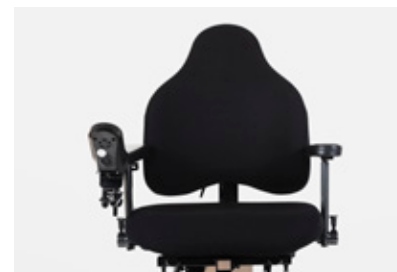

SitRiten edut ovat piilossa istuimen pinnan alla kahdessa eri tiheyksisessä vaahtomuovimateriaalissa. Alempi, kovempi vaahtomuovi auttaa pitämään lantion hyvässä asennossa, ylempi, pehmeämpi vaahtomuovi jakaa painetta ja on paksumpi istuinluiden alla kuin reisien alla.

SitRite on erinomainen esimerkki siitä, kuinka muotoilu ja tiheys toimivat yhdessä luoden parempaa tasapainoa, selkärangan tukea ja käsien liikkeiden hallintaa. Nämä kaikki yhdessä tarjoavat parhaan mukavuuden ja vakauden. SitRiten selkä on ergonomisesti muotoiltu, joka tukee suurta osaa vartalosta heikentämättä käsien liikkumisvapautta. Paine jakautuu laajalle alueelle, ja istuin on myös tuettu sivuilta, mikä lisää mukavuutta ja vakautta ja vähentää väsymystä, kun käyttäjän voimat ovat heikentyneet. Kun vartalo on vakaa, myös käsien ja pään liikkeiden hallinta paranee.

Saatavana myös lasten istuinjärjestelmällä - kysy lisää oman alueen myyjältäsi!

Istuin (leveydet ja syvyydet)	40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Käsitukien väli	38-56 cm
Istuinsyvyyydet	40-59 cm
Istuinkorkeudet (korkeus istuinlevyyden)	36-61, 43-83 cm
Istuimen kallistus ((sähköinen, kaasujousi tai käsiruuvi)	-19° to 20°
Selkäosa (korkeussäädettävä)	37-62 cm
Selkäosa (leveys x korkeus)	37x43, 42x45, 47x47 cm
Säädettävä selkäosan kulma	30°
Istuinverhoilu	Black Atlantic
Käsitukien korkeussäätö	0-26 cm
Käsituen mitat	30x8x3 cm

Istuinkorkeus on säädettävissä sähköisesti ja siitä on saatavana korkea ja matala versio. Molemmat on listattu peräkkäin teknisissä tiedoissa järjestyksessä "matala / korkea".

RUNKO

Flexmobil i6



Flexmobil i6 helpottaa sekä "istumista lähellä lattiaa" että "seisomista ja työskentelyä" runsaan minimi- ja maksimiasennon ansiosta.

Runkoa on saatavana 2 eri moottorilla ja istuinkorkeuden säätöalueella "matala" ja "korkea".

Vetävän pyörän keskisijoituksen ansiosta Flexmobilia on helppo ajaa. Tuoli pyörii oman akselinsa ympäri erittäin pienellä kääntösäteellä, joka ei vaadi paljon tilaa.

Alustan leveys	57 cm
Alustan pituus	80 cm
Kokonaispaino	98 kg
Käyttäjän paino, max.	150 kg
Kääntösäde	96 cm
Max. nopeus	4 km/h
Max. ajomatka	8.5 h
Elektroniikka	LINX
Esteenylityskyky	3 cm

Lisävarusteet E07

Miniflex SitRite

Miniflex SitRite on yksinkertainen ja luotettava sisäkäyttöinen pyörätuoli/työtuoli minimaalisilla ulkomitoilla. Sen pieni ja monipuolinen muoto on erittäin käyttäjäystävällinen, samoin kuin edistynyt työtuoli-istuin, joka on kehitetty yhdessä istumisergonomian asiantuntijoiden kanssa. Sen avulla käyttäjä pääsee helposti pöytien ja työtasojen ääreen. Miniflexissä on vetävät etupyörät. Hieman suuremmat vetopyörät mahdollistavat kynnysten yli ajamisen vaivattomasti. Nivelletyn takapyöräparin ansiosta Miniflex pysyy aina kosketuksissa lattiaan. Istuin kallistuu jopa -22 asteeseen, mikä helpottaa tuoliin siirtymistä ja siitä poistumista.

Sopii käyttäjille, joilla aktiivisuustaso heikentynyt:

- ☒ vähän
- ☒ keskitaso
- ☒ laaja
- ☒ sisään
- ☐ ulos
- ☐ lapsille
- ☒ aikuisille



ISTUINJÄRJESTELMÄT SitRite



SitRiten edut ovat piilossa istuimen pinnan alla kahdessa eri tiheyksisessä vaahtomuovimateriaalissa. Alempi, kovempi vaahtomuovi auttaa pitämään lantion hyvässä asennossa, ylempi, pehmeämpi vaahtomuovi jakaa painetta ja on paksumpi istuinluiden alla kuin reisien alla.

SitRite on erinomainen esimerkki siitä, kuinka muotoilu ja tiheys toimivat yhdessä luoden parempaa tasapainoa, selkärangan tukea ja käsien liikkeiden hallintaa. Nämä kaikki yhdessä tarjoavat parhaan mukavuuden ja vakauden.

SitRiten selkä on ergonomisesti muotoiltu, joka tukee suurta osaa vartalosta heikentämättä käsien liikkumisvapautta. Paine jakautuu laajalle alueelle, ja istuin on myös tuettu sivuilta, mikä lisää mukavuutta ja vakautta ja vähentää väsymystä, kun käyttäjän voimat ovat heikentyneet. Kun vartalo on vakaa, myös käsien ja pään liikkeiden hallinta paranee.

Saatavilla myös lasten istuinjärjestelmällä - kysy lisää oman alueen myyjältäsi!

Istuin (leveydet ja syvyydet)	40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Käsitukien väli	38-56 cm
Istuinsyvyydet	40-59 cm
Istuinkorkeudet (korkeus istuinlevyyen)	40-58, 45-70 cm
Istuimen kallistus (sähköinen, kaasujousi ja käsiruuvi)	-22° - 15°
Selkäosa (korkeussäädettävä)	37-62 cm
Selkäosa (leveys x korkeus)	37x43, 42x45, 47x47 cm
Säädettävä selkäosan kulma	30°
Istuinverhoilu	Black Atlantic
Käsitukien korkeussäätö	0-26 cm
Käsituen mitat	30x8x3 cm

Istuinkorkeus on säädettävissä sähköisesti ja siitä on saatavana korkea ja matala versio. Molemmat on listattu peräkkäin teknisissä tiedoissa järjestyksessä "matala / korkea".

RUNKO Miniflex



Yksi markkinoiden pienikokoisimmista sisäkäyttöön tarkoitetuista sähköpyörätuoleista, jonka runko ei ole suurempi kuin perinteisen manuaalipyörätuolin. Helposti ohjattavan ja kompaktin koon ansiosta sillä on helppo ajaa pöytien tai työtasojen ääreen.

Alustassa on etuveto ja nivelletty taka-akseli, mikä varmistaa, että takapyöräpari on aina kosketuksissa lattiaan.

Alustan leveys	57 cm
Alustan pituus	72 cm
Kokonaispaino	60 kg
Käyttäjän paino, max.	140 kg
Kääntösäde	120 cm
Max. nopeus	4 km/h
Max. ajomatka	n. 15 km
Elektroniikka	LiNX
Esteenylityskyky	3 cm
Akku	12V/18Ah

Lisävarusteet E10

Lisävarusteet

Meillä on palava intohimo yksilölliseen mukautuvuuteen. Jotta voimme tarjota parasta laatua ja eniten vaihtoehtoja, olemme kehittäneet laajan valikoiman lisävarusteita, jotka täydentävät tuotteitamme monin eri tavoin. Kaikkea mitä sinä käyttäjänä tarvitset löytääksesi parhaan avun jokapäiväisesen elämäsi, olipa sinun tarpeesi tai kehon kokosi mikä tahansa.

Tästä syystä valikoimassamme on monia tuotteita, joilla on sama toiminto. Kaikki tuotteet ovat säädettävissä omalla tavallaan ja luovat erilaisia mahdollisuuksia niskan, pään, vartalon, alaselän, reisien tai jalkojen tukemiseen. Lisäksi meillä on monia lisävarusteita, jotka tekevät elämästä hieman helpompaa, turvallisempaa, mukavampaa, miellyttävämpää tai käytännöllisempää.

Jokaisen tuotteen alta löydät lisävarustekoodin. Kirjain ja numero osoittavat, mitä tuotteitamme lisävaruste koskee. Huomaa, että jotkut lisävarusteet sopivat useampaan kuin yhteen tuotteeseen. Tarvittaessa työpajallamme on mahdollisuus räätälöidä myös lisävarusteesi tarpeesi mukaan. Autamme mielellämme oikean lisävarusteen löytämisessä.

Olet lämpimästi tervetullut ottamaan meihin yhteyttä!


Euroflex Lisävarusteet




Päätuki
E01-E05, E07-E11




Päätuki Forma
E02-E03, E07, E10

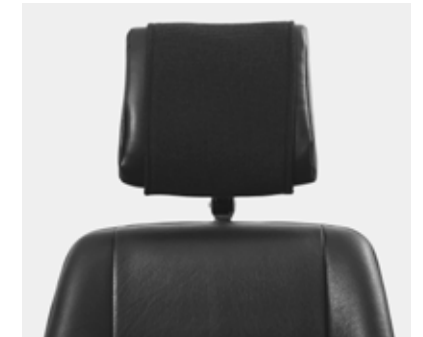


Päätuki Comfort
E09

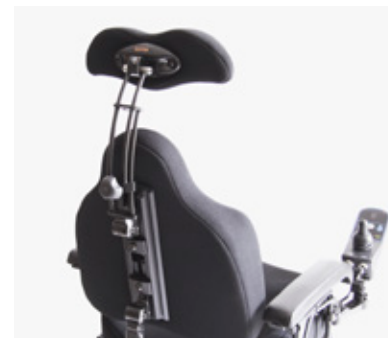


Päätuki SitRite
E02-E03, E07, E10

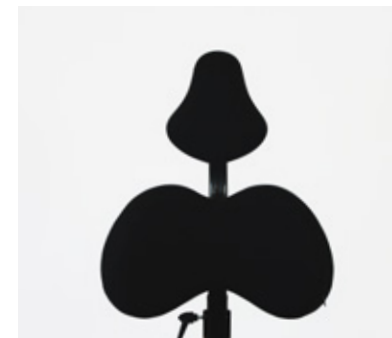


Forma, active back selkäosa
E01-E03, E05, E07, E10

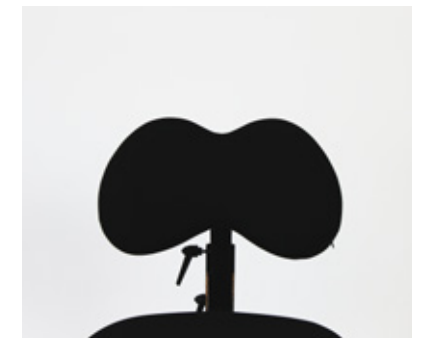


Forma basic selkäosa
E01-E03, E05, E07, E10

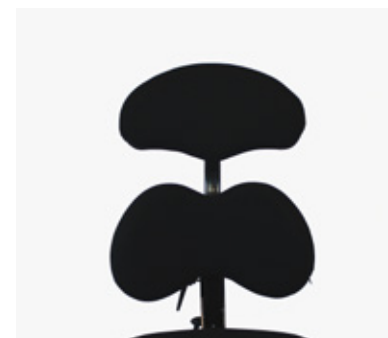

Forma comfort, selkäosa
E01-E03, E05, E07, E10

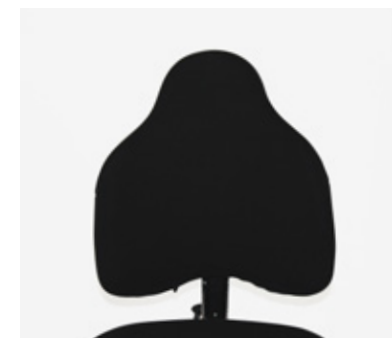

SitRite, selkäosa
E01-E04, E07-E08, E10-E11

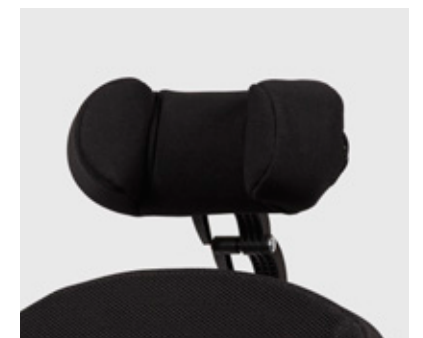

Headrest Comfort II
XXXXX

Euroflex Lisävarusteet



Vartalotuki Comfort
E09



Vartalotuki
E04, E08, E11



Vartalotuki
E02-E04, E07-E08, E10-E11



Vartalotuki vahvistettu SitRite
E02, E04, E07-E08, E10-11



Kiinnike tukivöille
E02, E04, E07-E08, E10-E11



Selkäosa, slingback
E01-E03, E05, E07, E9-10



Alaselkätuki, puhallettava tyyny
E01-E11



Käsituki, kiinteä
E01-E11



Käsituki, kääntävä
E01-E05, E07-E08, E10-E11

Euroflex Lisävarusteet



Hemiplegia käsituki
E01-E03, E05-E07, E09-E10



Käsitukipehmuste 5 cm
E01-E11



Käsitukipehmuste 3 cm
E01-E11



Nostettava ja taitettava käsituki
E09



Vartalovyöliivi
E02-E04, E07-E08, E10-E11



Lantiovyö
E01-E11



Pöytälevy akryylia
E01-E05, E07-E11



Ohut istuin
E01-E04, E06-E11



Forma, Coxit istuin
E01-E03

Euroflex

Lisävarusteet



Istuinpäällinen
E01-E08, E10-E11



Haarakiiila
E01-E05, E07-E11



Amputaatiotuki
E01-E11



Polvistoppari
E01-E11



Etac jalkatuen adapteri
E01-E11



Sähköstätöinen jalkatuki
E07, E09-E10



Etac jalkatuki
E01-E11



Yhtenäinen / osittainen jalkatuki
E07, E09-E10



Yhtenäinen jalkatuki, sähköstätöinen
E07, E09-E10

Euroflex

Lisävarusteet



Erilliset jalkatuet
E01-E11



Jalkalauta
E01-E11



Taksikoukku, Miniflex
E10-E11



Koukku
E09



Keppiteline
E09

Euroflex

Lisävarusteet



Sähkötoiminnot
esim. istuin- ja selkäosan
kallistus
E02-E11




Käsituen kiinnike
E04, E08, E11



Combi-Käsituen kiinnike
E01-E05
Combi-kiinnikkeet ovat vakiona
sisäsähköpyörätuoleissa



Reisituot
E01-E11

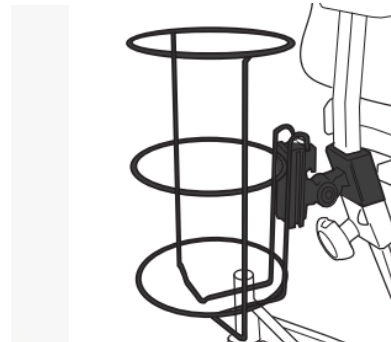

Happipulloteline

Valmistaja:

Eurovema Mobility AB 

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden

Tel: +46 (0) 371-390 100

Fax: +46 (0) 371-189 82

eurovema.se | info@eurovema.se

Myynti Suomessa:

Camp Scandinavia Oy /
Camp Mobility 

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere, Finland

Puh: +358 (09) 350 76 310

Varaosat: +358 (09) 350 76 312

www.campmobility.fi | info@campmobility.fi