

UUTUUS!



### Mini Crosser X sähkömopot max. 15 km/h

Medema **Mini Crosser** -mallisto on uudistunut! Uusissa **Mini Crosser X1** -mopoissa on uudistettu jousitus, uudet väri vaihtoehdot ja uusia käyttöominaisuuksia. Alan laadukkain, aito, originaali, Mini Crosser soveltuu erinomaisesti Suomen sääolosuhteisiin. Mini Crosser X-mallit ovat hiotun käyttömukavuuden lisäksi luotettavia ja kestäviä. Törmäystestattu ja TÜV:n hyväksymä, ABE-tyyppihyväksyty Saksassa. 10 vuoden varaosatakuu.

Tanskalaista käsityötä olevissa **Mini Crosser X1**:ssä on taloudellinen ja vahva moottori, jonka ansiosta ajomatka yhdellä latauksella on jopa yli **70 km**. Max. nopeus säädettävissä **10, 13** tai **15 km/h**. Max. kuormitus **175 kg**, HD malli **250 kg**. Monisäätoinen, kääntyvä **Ergo2**-istuin vakiona, johon valittavissa poikkeuksellisen monta istuinleveyyttä 35, 40, 45, 50, 60 (HD) tai 70 cm (HD).

Mini Crosser X -mopoihin on saatavana paljon lisävarusteita, joilla varmistetaan käyttäjien erityistarpeet. Saatavana myös **Mini Crosser X2** -mallit, joissa on mm. ajotietokone, **MC X Kabine** -koppimopo ja **MC X Joy** -joystick-ohjattava malli, ilman ohjaustankoa.

Lue lisää [www.minicrosser.com](http://www.minicrosser.com)



medemagroup

## Värvaihtoehdot



**Metallic Copper Orange**



**Metallic Black**

## Ominaisuuksia



### Vakionopeussäädin

Mini Crosser X -mallit on varustettu kaasukahvalla jota voidaan käyttää peukalolla tai neljällä sormella. Kaasukahva voidaan asentaa molemmille puolille. Vaatimuksista riippuen voidaan asentaa myös käännettävä kaasukahva tai jalkapoljin.



### Parempi jousitus

Mini Crosserin jousitus myötäilee ajotietä ja takaa hyvän ja miellyttävän ajon. Jousien muoto ja käämitys sekä teräksen laatu takaavat jousien pitkän käyttöiän.



### Paljon lisälaitteita

Mini Crossereihin on saatavilla on laaja valikoima lisävarusteita. Kuvassa peili ja nopeusmittari. Tutustu lisävarustevalikoimaan erillisen lisävaruste-esitteen avulla.



### Jalkasuojus

4-pyörämallisissa on mahdollisuus laittaa jalat etukotelon alle suojaan.





MC X1 3-pyöräinen



MC X1 4-pyöräinen

## Ergo 2 -istuin

### Säätöominaisuuksia:

- ohjauspylvään kulma
- ohjauspylvään korkeus
- istuinkorkeus
- istuin kallistus
- Istuinsyvyys
- käsinojen korkeus
- käsinojen kulma
- käsinojen leveys
- päätuen kulma
- päätuen korkeus



### Istuimen kallistus

Vedä istuimen oikealla puolella oleva kahva ulos.



Kallistus taakse 45 °



Kallistus eteen 90 °



Kääntyvä istuin



### Säädettävä istuinsyvyys

Selkänöjää voidaan siirtää istuinsyvyys 320 mm:stä 550 mm:iin.



Käsitukia voidaan säätää leveysuunnassa 25 mm.



Kokoontaittava istuin ja ohjauspylväs



Käsinojen kallistus-säätö



### Korkeus- ja kulmasäädettävä niskatuki

Niskatukea voidaan säätää ylös- ja alaspäin ja kallistaa eteen- ja taaksepäin



## Mini Crosser X HD 250 kg

### Mini Crosser X HD

Erittäin vahva, haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu 4-pyörämalli.

Käyttäjän paino jopa 250 kg. Taattu turvallisuus ja liikkuvuus raskaammille käyttäjille. Vahvistettu runko ja istuinputki.

Extra vahvistettu HD- istuin. Istuinleveydet 60 cm ja jopa 70 cm. Myös erikoisleveyksiä saatavilla, kysy lisää myyntineuvottelijoilta.

Saatavana sekä X1 HD että X2 HD malli.

Max. nopeus 10 km/h.



## Ominaisuuksia



**Max.käyttäjäpaino 250 kg!**  
Vankkaa laatua oleva, erittäin vahva, MiniCrosser HD 4-pyöräinen, jonka käyttäjän paino voi olla jopa 250 kg.



**Vahvistettu jousitus**  
Mini Crosser HD perustuu X-malliin. Varmistettu kuormitus jopa 250 kg.



**HD istuin 60 cm tai 70 cm**  
Extra vahvistetuissa HD-istuimissa on vahvistetut istuin ja käsinojat siten, että ne kestää 250 kg:n painon. Saatavana istuinleveydet 60 cm ja 70 cm. Myös erikoisleveyksiä saatavilla.



## Mini Crosser X lapsille

### Mini Crosser X Kids

Mini Crosser X Kids -malli lapsille ja nuorille, sopii alkaen jo 3-vuotiaille lapsille.

Saatavana 3- ja 4-pyöräiset mallit. 3-pyöräisellä Mini Crosser X Kids:ssä on pieni kääntösäde ja hyvä ohjattavuus. 4-pyöräinen takaa vakaan ajon.

Erittäin tehokas ja luotettava sähkömopo on erittäin vakaa oman painonsa ansiosta. Erityisesti suunniteltu Skandinavian ilmasto- ja maasto-olosuhteisiin.

Saatavana valikoima erityisiä värejä tilauksesta.

Kids istuimen leveys 35 cm.

Mini Crosser Kids:ssä on lapsilukko, jolla max. nopeus on mahdollista puolitaa.

Mini Crosser Kids voidaan varustaa automaattisella nopeuden vähentämisellä käännoksissä.



Kids istuin 35 cm



Kasvaa lapsesi mukana


Mini Crosser X Kids räätälöidään lapselle sopivaksi ja se "kasvaa" lapsen mukana. Säädettävät lastenistuin, ohjauspylväs, jalkalevy ja pienet kaasukahvat.



Junior kaasukahva

Lapsille voi olla vaikeaa painaa normaalia kaasua. Siksi Kids-malliin voidaan asentaa Junior-kaasukahva.

## Mini Crosser X-Joy – joystick-ohjaimella

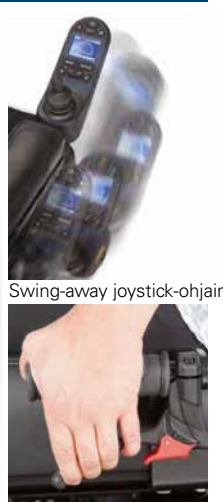

Swing-away joystick-ohjain

Seisontajarru optiona

Mini Crosser X-Joy kehitettiin käyttäjille, joilla on heikot käsivoimat. Sopii lapsille, nuorille ja aikuisille. Suuret pyörät ja erinomainen jousitus. Suuren painonsa ansiosta X-Joy on erittäin vakaa. Myös X-Joy voidaan varustaa Mini Crosser istuimilla ja lisävarusteilla. Saatavilla myös Kabine-versiona.

## Mini Crosser X Kabin



Kaikki 4-pyöräiset X-mallit, myös X-Joy, voidaan varustaa Kabin-koppimopoksi. Sopii erityisesti, keuhko- ja hengityspotilaille. Ohjaamossa on pyyhkimet ja aluslevy, avautuvat ikkunat ja irrotettavat ovet. Lukittava. Lämmitys ja kamera optiona.



MC X2 3-pyöräinen



MC X2 4-pyöräinen

## Ominaisuuksia



### Varashälytin

X2:een voi asentaa myös varkaudenesto hälytysjärjestelmän.



### Näyttö

Suuri näyttö tarjoaa yksinkertaisen yleiskuvan. Näyttö antaa sinulle tietoa esimerkiksi matkasta, akunkestosta yms. - vain painiketta painamalla.



### Huoltoinformaatio

Huoltotiedot painikkeen painaminen antaa sinulle paljon tietoa Mini Crosseristä.




### Automaattinen ajovalojen aktivointi

Päivä- ja yösensorit varmistavat, että ajovalot syttyvät esimerkiksi hämärässä tai ajettaessa autotalliin. Lisäksi näyttö reagoi muuttuviin valo-olosuhteisiin.



### Ajotietokone

X2 -malliin on mahdollista lisätä käyttäjälle tärkeitä toimintoja, kuten äänimerkki peruuttaessa tai painik-eiden painamisesta. Toimintoja voi kytkeä pois ja laittaa päälle manuaalisesti tai automaattisesti.

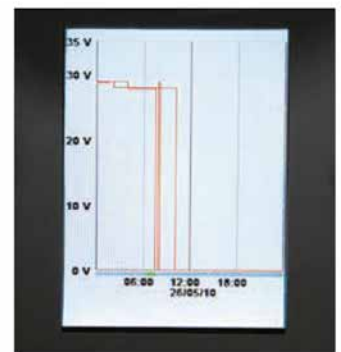

### Tallennus

Ajotiedot tallennetaan turvallisuutesi vuoksi, jolloin huolto on nopeampaa ja tehokkaampaa.



## Lisävarusteita

Lisää lisävarusteita lisävaruste-esitteessä.



Peili, vakio tai X-Joy oikea ja vasen tilataan erikseen



Peilin jatke 10 cm vasen / oikea



Peilit Kabine- koptiohjaamoon oikea, vasen tai peruutuspeili



Rollaattoripidike Max. 20 kg



Rollaattoripidike Max. 20 kg



Rollaattoripidike Troja Max. 20 kg



Pyöratuolipidike Max. 20 kg

Laaja valikoima vaihtoehtoja rollaattorien ja manuaalipyörätuolien jne. asentamiseksi Mini Crosseriin.



Etukori



Korinpidike Kabine-koptiohjaamoon



Takakori Kabine koptiohjaamoon



Traileri, musta, lukko- ja perävaunukytkimellä  
Traileri, musta, lukitus, vetokoukku, valaistus X1.



Vetokoukku perävaunulle

Traileri, musta, lukitus, perävaunun kiinnitys ja valaistus X2



Käsitukilaukku ERGO2



Mukiteline ERGO 2



X-Grip matkapuhelin pidike ERGO2



Kierroslukumittari X1



Ohjaukakahva, pidennetty 40 mm



Vasen ja oikea kaasukahva kytkimellä



Takalokero lukolla



Happipulloteline+pidike



Golf-laukun pidike



Kääntyvä kaasukahva vasen tai oikea



Jalkapoljinkaasu Jalka-akseli oikea / vasen



Suojapeite



Keppiteline kahdelle kyynärsauvalle



Signaalilippu koriin taakse tai asennus C-kiskoon



Tuulilasi



Vedenpitävä istuinsuoja, lapsille ja aikuisille



Sadeviitta, lapsille ja aikuisille



Jalkakorke 3- tai 4-pyöräiseen malliin



Keppiteline kahdelle keppille



Säädettävä kahva, jossa tuulilasi X-Joylle



Jalkalevyn korotus, 5 cm pieni, 3-pyöräiseen malliin  
Jalkapöydän korotus, 5 cm pitkä, 3-pyöräiseen malliin



Jalkalevyn korotus, 5 cm pieni, 4-pyöräiseen malliin  
Jalkapöydän korotus, 5 cm pitkä, 4-pyöräiseen malliin



Jalkalevyn jatke 3-pyöräiseen malliin oikea ja vasen

## Lisävarusteita



Amputaatiotuki, oikea tai vasen



Säädettävä reisituki 100x320 mm, vasen tai oikea

Lisää lisävarusteita lisävaruste-esitteessä.



Vakiokäsituki ERGO2-istuimeen



Vaihtoehtoiset käsituet ERGO2-istuimeen



Lasten käsituet ERGO2-istuimeen



Takakori istuimen taakse



Keppiteline kahdelle kepillle ERGO2



Turvavyö ERGO2



Varoituskolmio pidikkeellä ERGO2



Mukiteline ERGO2



X-Grip matkapuhelimen pidike ERGO2



Käsitukilaukku ERGO2


## Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Ajoyksikön leveys	Kokonaispituus	Paino	Max. käyttäjäpaino
3-pyöräinen	350 / 400 / 450 / 500 mm	320-510 mm	680 mm	1340 mm	115 kg	175 kg
4-pyöräinen	350 / 400 / 450 / 500 mm	320-510 mm	680 mm	1400 mm	124 kg	175 kg
HD	600 / 700 mm*	320-510 mm	680 mm	1400 mm	124 kg	250 kg
	Akkukapasiteetti	Kääntösäde/halkaisija	Maavara	Max. ajomatka	Max. nopeus	
3-pyöräinen	2 x 12 V/51/85/94 Ah (C5) GEL / AGM	1340 mm / 2680 mm	110 mm	70 km**	10 / 13 / 15 km/h	* kysy myös muita istuinleveyksiä ** 94 Ah akuilla
4-pyöräinen	2 x 12 V/51/85/94 Ah (C5) GEL / AGM	1725 mm / 3450 mm	110 mm	70 km****	10 / 13 / 15 km/h	
HD	2 x 12 V/ 85/94 Ah (C5) GEL / AGM	1725 mm / 3450 mm	110 mm	70 km	10 km/h	


## Värit ja materiaalit



Musta verhoilu

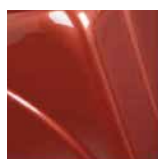

Metallic Copper Orange

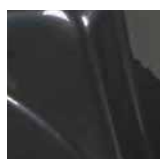

Metallic Black

Valmistaja:  
Medema A/S  
Enggaardvej 7  
DK-7400 Herning  
Danmark  
Tel. +45 70 10 17 55  
www.medema.com  
info@minicrosser.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© Camp Mobility Finland 2019