



Yes, you can.®

Orion Metro



Invacare® Orion Metro 3-pyöräinen tai 4-pyöräinen sähkömopo max. 10/12 km/h

Nautitko tavata ystäviäsi ravintoloissa ja käydä vaikka shoppailemassa? Jos nautit päivittäisistä kauppareissuista tai pidät jopa pidemmistä matkoista **Invacare® Orion Metro** antaa vapauden ajaa joka paikkaan huoletta.

Tyylikäs ja ergonominen design ja **Orion Metro**:n toiminnallisuudet on suunniteltu sekä vanhojen että uusien mopojen käyttäjien tarpeet huomioon ottaen. Tuloksena syntyi lukuisilla käyttäjäystävällisillä ominaisuuksilla varustettu, turvallinen ja helppokäyttöinen ajopeli.

Orion Metro on täydellinen yhdistelmä mukavuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta! **Orion Metrossa** on tietokoneella ohjelmoitava elektroniikka, vikaloki ja käyttötunnit luettavissa tietokoneella. Ohjauspylväs on säädettävissä ilman työkaluja. Kaasuvipu vaihdettavissa peukalo- tai puristusotteella käytettäväksi ja kätisyys

muutettavissa. Jousitettu alusta edessä ja takana, jousituksen jäykkyys säädettävissä. 50 Ah akut, kapasiteetti (C20). LCD-näyttö, ulkoinen, kosteussuojattu latauslaite (IP44) 8A, Monitorakuvioiset 12" ilmakumirenkaat ja halkaistavat vanteet. Istuimen korkeuden säätömahdollisuus 5 cm. Istuimen kääntömahdollisuus 180° molempiin suuntiin, lukittuu kääntäessä vähintään 90° välein. Istuimen liukusäätö etu-taka-suunnassa ilman erillisiä työkaluja. Selkänojan kulmaa voi säätää ilman erillisiä työkaluja. Taaksekäännettävät ja korkeussäädettävät käsinojat.

Ajomatka 54 km,
Max.nopeus 10 km/h
Max.käyttäjätaino 136 kg
Takuu 1v Määräikaishuoltoväli 1 v

CAMP[®]
MOBILITY

Nautitko tavata ystäviäsi ravintoloissa ja käydä vaikka shoppailemassa?

Orion Metro on täydellinen yhdistelmä tyylikästä designia, ajomukavuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta!

Varma ja luotettava

Orion Metro:n jousitus edessä ja takana on suunniteltu tarjoamaan mukava ajomatka tienpinnasta riippumatta, joten voit rentoutua ja nauttia luotettavasta ja mukavasta ajamisesta. Voimakas moottori yhdessä 11" pneumaattisten renkaiden kanssa vie sinut tasaisesti ja turvallisesti yli eri esteiden tai epätasaisten pintojen.

Turvallisuus vakiona

Ainutlaatuisen valaistusjärjestelmän lisäksi **Orion Metro** on varustettu nopeuden hidastuksella, joka automaattisesti vähentää käynnösten nopeutta, mikä lisää turvallisuutta. Lisäksi kaksisuuntainen vapautuskytkin estää mopon liikkumasta vahingossa. Nämä ominaisuudet yhdessä riippumattoman TÜV-laboratorion laajan testien kanssa takaavat, että turvallisuus on vakiona **Orion Metro**:ssa.

Yksinkertainen huoltaa

Akkukotelon kansi on helppo irrottaa, mikä tekee akkujen, elektroniikan, moottorien ja kaapelien huollosta helppoa ja yksinkertaista.

Ohjausyksikkö ja elektroniikka on suojattu vesiroiskeilta ja likaa ja kosteutta vastaan, mikä takaa mopon hyvän toiminnan ja estää tarpeettomat tekniset häiriöt.



Lisävarusteita ja ominaisuuksia



3-pyöräinen malli



4-pyöräinen malli



Säädettävä ohjauspylväs

Säätövipu on sijoitettu käsijarrua vastapäätä, johon on helppo ylettyä. Yhdessä säädettävän kääntöistuimen kanssa voit säätää itsellesi juuri sopivan ajoasennon.



Ergonominen ohjaustanko

Ergonomisesti suunniteltu ohjaustanko tekee ohjaamisesta helpompaa ja kontrolloidumpaa.



Käsijarrut

Varmistaa jarrutuksen nopeissakin tilanteissa.



Integroidut jarruvalot

HD jarruvalot varoittavat ihmisiä, kun mopo hidastaa vauhtiaan.




Moottorin vapautuskytkin

Kaksoistoiminto estää mopoa vahingosta joutumasta vapaalle.



Automaattinen vauhdin hidastin

Tämä ominaisuus hidastaa automaattisesti vauhtia kääntyäessä.

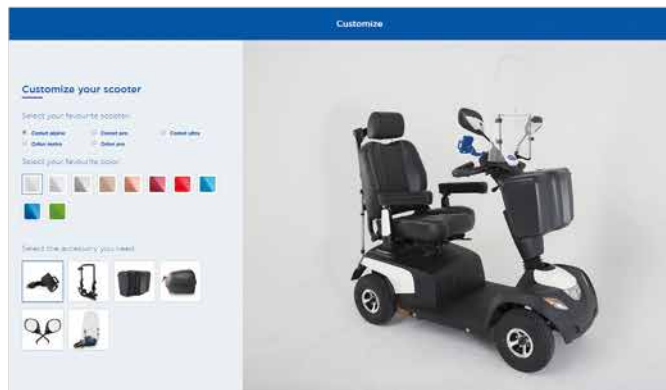

Kustomoi moposi eri väreillä ja lisävarusteilla

Voit valita 10 eri väristä ja 25 lisävarusteesta kustomoidaksesi scooterisi yksilölliseksi oman makusi ja tarpeidesi mukaan. Lue lisää www.invacarescooter.com.

Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus	Kokonaisleveys	Kokonaispituus	Paino
3-pyöräinen	510 mm	Comfort ja Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	660 mm	1240 mm	103 kg
4-pyöräinen	510 mm	Comfort ja Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	660 mm	1270 mm	110 kg

	Painavin osa	Max.käyttäjäpaino	Akkukapasiteetti	Kääntösäde (halkaisija)	Max esteenylityskyky	Maavara	Kallistus
3-pyöräinen	52 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	2250 mm (=säde 1125 mm)	80 mm	80 mm	10° / 18%
4-pyöräinen	57 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	2600 mm (=säde 1400 mm)	80 mm	80 mm	10° / 18%

	Ajomatka	Nopeus	Moottoriteho
3-pyöräinen	54 km	10 km/h	10 km/h: 240W / 600W
4-pyöräinen	54 km	10 km/h	10 km/h: 240W / 600W

Värit ja materiaalit



Musta verhoilu



Valkoinen Safiirinsininen Vihreä Beige Kupari



Karmiinpun. Kromi Hopea Sininen Punainen



Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2022