

UUTUUS!



Orion Pro sähkömopo max. 15 km/h

Tarvisetko mopon, joka on ihanteellinen pidempiin matkoihin kaupunkiin tai esim. iltapäiviin puiston ympäri lastenlastesi kanssa?

Jos nautit pidemmistä matkoista **Invacare® Orion Pro:ssa** on enemmän tehoa ajaa joka paikkaan huoletta.

Uusi, ergonomisesti muotoiltu **Orion PRO** on tehokkaampi versio Orion METRO-mallista. Suurempi akkujen suorituskyky, erinomainen, paranneltu jousitus edessä ja takana ja suuret 12" pyörät. Uusi Orion PRO on ihanteellinen käyttäjille, jotka tarvitsevat mopoltaan enemmän suorituskykyä.

Orion PRO :ssa yhdistyy extra suorituskyky kaikkiin olemassa oleviin mukavuus-, turvallisuus- ja luotettavuusominaisuuksiin. Se on ihanteellinen valinta käyttäjille, jotka vaativat enemmän.



Yes, you can.®

Tarvisetko mopon pidempiin matkoihin kaupunkiin tai esim. iltapäiviin puiston ympäri lastenlastesi kanssa?

Orion Pro on täydellinen yhdistelmä tyylikästä designia, ajomukavuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta ja parempaa suorituskykyä!

Parannettu jousitus – tasaisempaa ajoa

Orion Pro:n edistyksellinen jousitusjärjestelmä edessä ja takana on suunniteltu parantamaan suorituskykyä ja tarjoamaan tasaisemman ajon eri pinnoilla ja maastoissa. Lisäksi

Orion PRO:ssa on tehokas moottori ja 12" pneumaattiset renkaat, jotka varmistavat, että olitpa kaupungissa tai maalla, voit mennä minne haluat, mukavasti ja tyylikästä.

Suorituskykyä ja turvallisuutta

Orion PRO on läpäissyt saksalaisen itsenäisen TÜV-laboratorion turvallisuustestit, joka varmistaa, että käyttäjät voivat luottaa siihen, että heillä on mopo, joka täyttää viimeisimmät eurooppalaiset lääketieteellisiä laitteita koskevat standardit.

Orion Pro:n elektroninen nopeuden hidastusjärjestelmä vähentää automaattisesti kierroslukuja käännoksissä ja varmistaa, että käyttäjät voivat ajaa mopolla turvallisesti ja mukavasti myös käännoksissä.


Lisäksi kaksisuuntainen moottorinvapautuskytkin estää renkaiden vapaan pyörimisen,

Nopea ja helppo huoltaa

jos mopo vahingossa joutuu vapaalle.....

Orion PRO on rakennettu käyttämällä vain laadukkaita komponentteja, joiden ansiosta se on sekä luotettava että helppokäyttöinen. Elektroniikalla ja moottorilla on lisäsuojaus, vettä ja korroosiota vastaan, joka suojaa myös tarpeettomia toimintahäiriöitä vastaan.

Yläkannen voi myös helposti irrottaa moottorin, akkujen, elektroniikan ja kaapeleiden tarkistamiseksi.

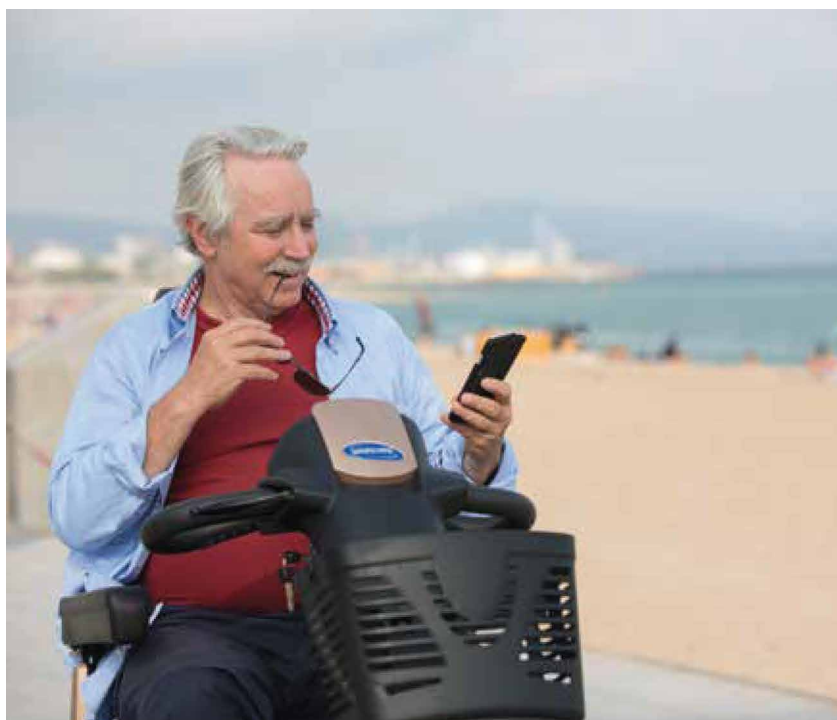

Lisävarusteita ja ominaisuuksia



4-pyöräinen malli



3-pyöräinen malli



Säädettävä ohjauspylväs

Säätövipu on sijoitettu käsijarrua vastapäätä, johon on helppo ylettyä. Yhdessä säädettävän kääntöistuimen kanssa voit säätää itsellesi juuri sopivan ajoasennon.



Ergonominen ohjaustanko

Ergonomisesti suunniteltu ohjaustanko tekee ohjaamisesta helpompaa ja kontrolloidumpaa.



Käsijarrut

Varmistaa jarrutuksen nopeissakin tilanteissa.



Integroidut jarruvalot

HD jarruvalot varoittavat ihmisiä, kun mopo hidastaa vauhtiaan.




Moottorin vapautuskytkin

Kaksoistoiminto estää mopoa vahingosta joutumasta vapaalle.



Automaattinen nopeuden hidastin

Tämä ominaisuus hidastaa automaattisesti vauhtia kääntyessä.

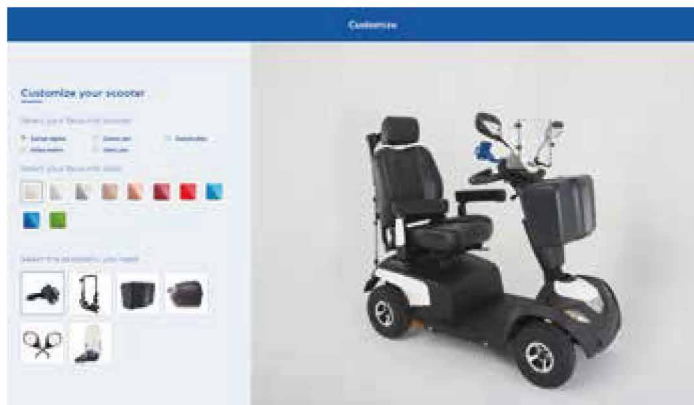

Kustomoi moposi eri väreillä ja lisävarusteilla

Voit valita 10 eri väristä ja 25 lisävarusteesta kustomoidaksesi scooterisi yksilölliseksi oman makusi ja tarpeidesi mukaan. Lue lisää www.invacarescooter.com.

Tekniset tiedot

	Selkäosan leveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus	Ajoyksikön leveys	Kokonaispituus	Paino
3-pyöräinen	510 mm	Comfort & Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	650 mm	1300 mm	126 kg
4-pyöräinen	510 mm	Comfort & Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	650 mm	1320 mm	136 kg


	Painavin osa	Max. käyttäjäpaino	Akkukapasiteetti	Kääntösäde	Max. esteen- ylityskyky	Maavara	Max.kallistuskulma
3-pyöräinen	noin: 62 kg	127 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2500 mm	100 mm	100 mm	10 °
4-pyöräinen	noin: 62 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10 °

	Max. ajomatka	Max. nopeus	Moottoriteho	1. Peak performance
3-pyöräinen	52 km	10 / 12.8 / 15 km/h	10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 12.8 km/h: 550 W / 1600 W ¹ 15 km/h: 550 W / 1600 W ¹	
4-pyöräinen	52 km	6 / 10 / 12 / 12.8 / 15 km/h	6 km/h: 240 W / 500 W ¹ 10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 12 km/h: 550 W / 1500 W ¹ 12.8 km/h: 550 W / 1600 W ¹ 15 km/h: 550 W / 1600 W ¹	


Värit ja materiaalit




Musta verhoilu

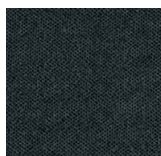

Valkoinen Sähkösininen Jadevihreä Luxor beige Kupari

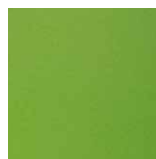

Karmiinpun. Iconic Chrome Diamond Silver Safiirinsininen Punainen

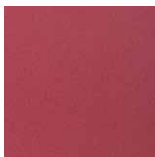

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2020