



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

DONDOLINO



DONDOLINO

Liikkuvaa vakautta

Dondolino on edestäpäin seisomista tukeva seisomateline, jonka Ormesa on suunnitellut ja valmistanut auttamaan lapsia **ylläpitämään pystyasentoa itsenäisemmin.**

Dondolinson käyttö arjen eri tilanteissa **rohkaisee vuorovaikutukseen** ympäristön kanssa tukemalla yläraajojen ja pään liikkuvuutta sekä yksilöllisten motoristen taitojen kehitystä.

Dondolino on erittäin monipuolinen apuväline, jota on saatavana kolmessa koossa, ja jossa on laaja säätömahdollisuuksien valikoima. Se soveltuu 75-150 senttisille lapsille ja nuorille ja **mukautuu heidän kasvuunsa, taitojen kehitykseen sekä lantion ja polvien koukistustarpeisiin.**



PRODUCT
MARKED **CE**

DONDOLINO is a MEDICAL DEVICE that COMPLIES WITH THE SAFETY REQUIREMENTS defined with the REGULATION (EU) 2017/745





Kallis -tuva runko

Jousimekanismilla toimivan säädön avulla voidaan siirtyä pystyasennosta etunoja-asentoon, mikä tukee pään ja vartalon aktiivista hallintaa.

Asennon muutokset voidaan tehdä täysin sulavasti myös silloin, kun lapsi on seisomatelineessä ilman, että ne aiheuttavat epämukavuutta lapselle.

Dondolino mukautuu lempeästi lapsen tarpeisiin pakottamatta, sovittaen rakenteensa erilaisiin asennonhallinnan vaatimuksiin.



Ominaisuuudet ja
säädöt



Runko

Lapsille, jotka harjoittelevat pystyasennon hallintaa. Ilman reunoja turvallisuuden varmistamiseksi – näin lapsella on mahdollisuus vartalon kiertoon ja yläraajojen maksimaaliseen liikkumisvapauteen. Sulava ja portaaton säätö onnistuu jousiavusteisen kallistussäädön avulla.



Ilman työkaluja

Ormesan suunnittelemien erityisnappien ansiosta säätöjä voi tehdä ilman työkaluja, helposti ja turvallisesti. Nupit takaavat tukevan otteen ja pitävät säädöt luotettavasti paikoillaan sisäisen mekanismin avulla, vahingoittamatta tai kuluttamatta putkirakenteita.




Asteikot



Säätöputkien asteikkojen avulla terapeutti löytää helposti lapselle sopivan asennon.



Lantion ja rintakehän tuki




Sekä lantion että rintakehän tuet ovat säädettävissä erikseen ympärysmitan, korkeuden ja etu-takasuunnan mukaan. Jos käyttäjällä on riittävä vartalonhallinta, rintatuen voi myös poistaa kokonaan.

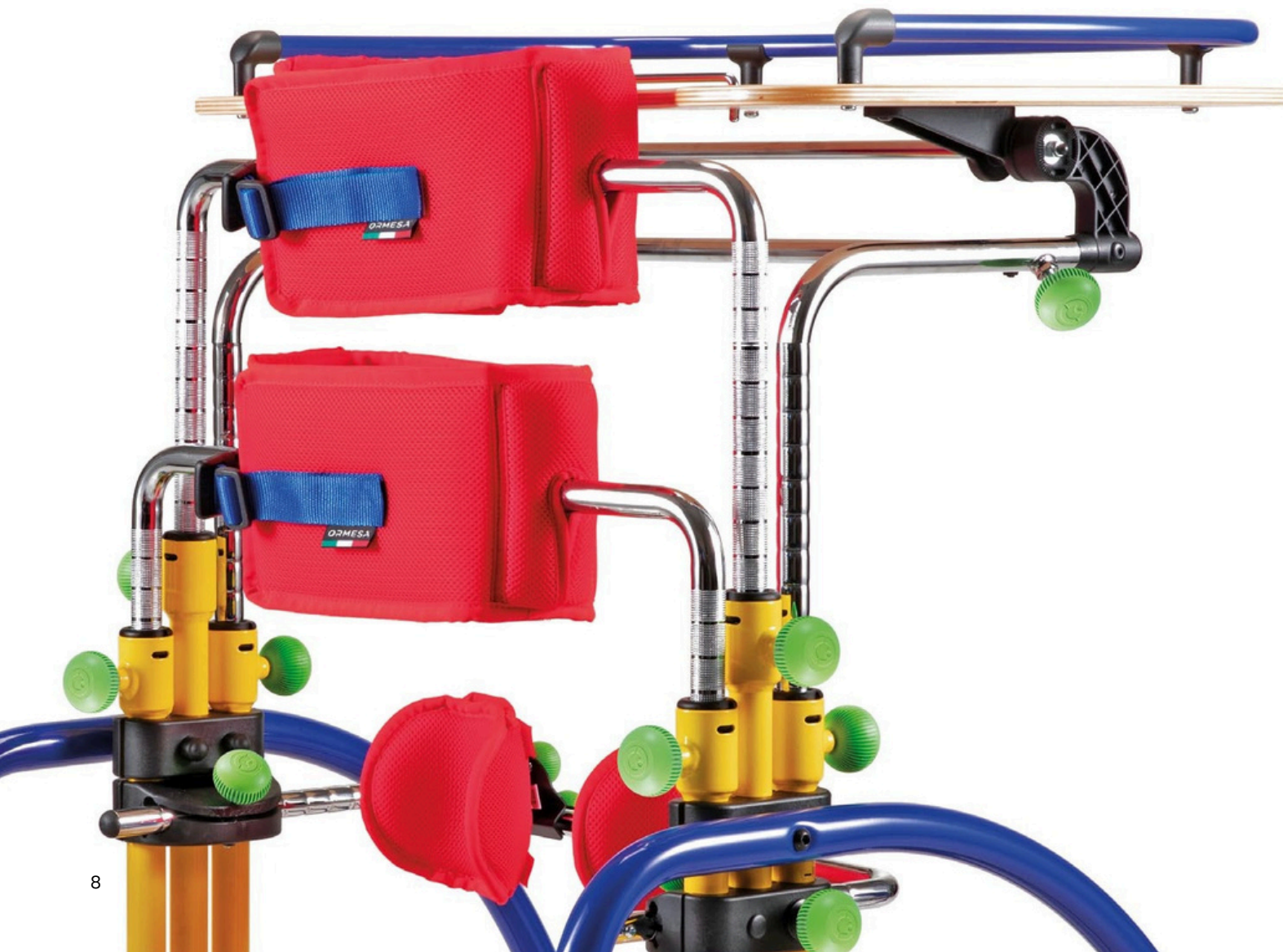

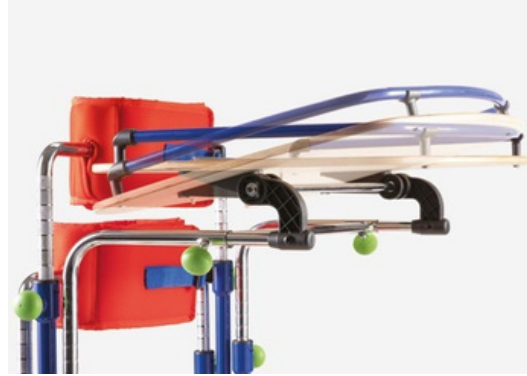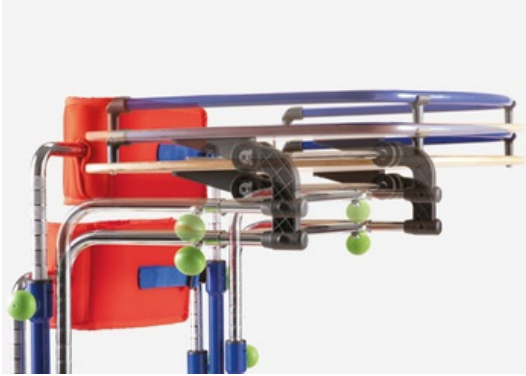


Koivuvaneripöytä

Opetuskäyttöön suunniteltu pöytä tukee yläraajoja ja voidaan tarvittaessa irrottaa, jolloin käsien ja vartalon harjoittelu helpottuu. Pöydän korkeutta, kallistusta ja etu-takasuuntaa voidaan säätää.

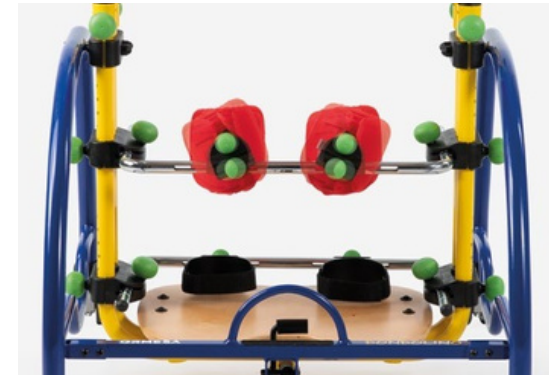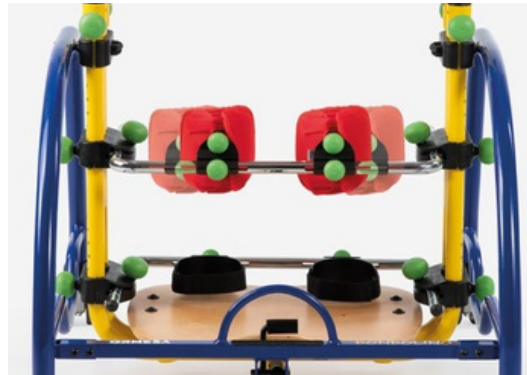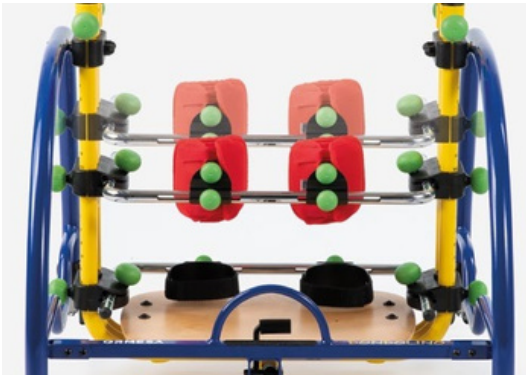


Polvipehmusteet

Irrotettavilla ja pestävillä pehmusteilla varustetuissa polvituissa on aukot polvilumpion kohdalla paineen keventämiseksi. Tuet ovat säädettävissä yksilöllisesti korkeuden, kierron, loitonnuksen sekä etu-takasuunnan mukaan.

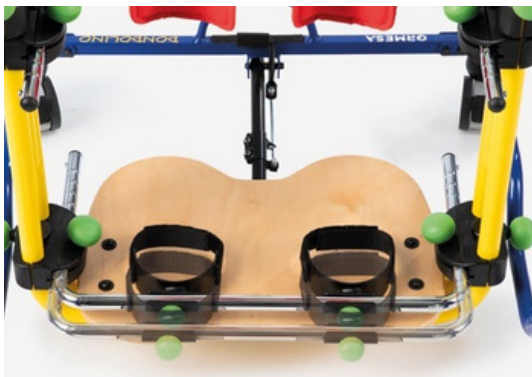

Kantatuet

Leveys ja syvyys säädettävissä.

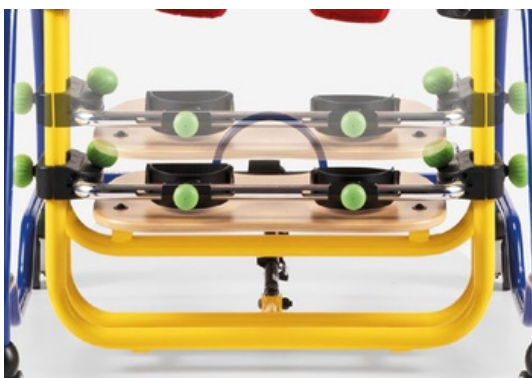

Jalkatuki koivuvanerista

korkeuden säädöllä.




Kääntyvät kaksoispyörät

75 mm:n pyörät jarruilla. Pyörien ansiosta laitetta voidaan liikuttaa huoneesta toiseen myös käytön aikana.



Lisävarusteet

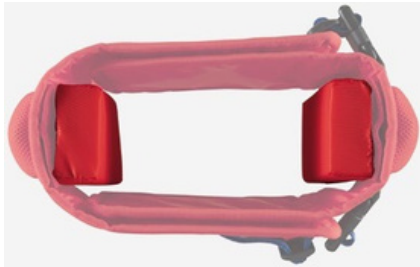

944 Ympärysmitan pienentäjät

Paksuus 3cm / puoli. Voidaan asentaa telineeseen kapeampia käyttäjiä varten.



865 Säädettyä niskatuki


korkeus, kallistus ja etu- takasuunnassa säädettävissä nuppien avulla.






Dondolino tekniset tiedot

	koko 1	koko 2	koko 3
A: alustan ulkomitat	63cm	77 cm	83 cm
B: pituuden ulkomitat	75 - 85 cm	81 - 91 cm	85 - 95 cm
C: korkeus jalkatuesta pöytäan	45 - 79 cm	52 - 90 cm	62 - 107 cm
D: leveyden ulkomitat	63cm	67 cm	71 cm
E: korkeus jalkatuesta polvitukiin	12 - 26 cm	12 - 36 cm	14 - 48 cm
F: korkeus jalkatuesta lantion tukeen	39 - 59 cm	47 - 74 cm	58 - 93 cm
G: korkeus jalkatuesta rintatukeen	51 - 76 cm	56 - 90 cm	70 - 110 cm
L: tukien ympärysmitta	60 cm	65 cm	70 cm
M**: tukien sisäleveys	18 cm	23 cm	28 cm
N: käyttäjän pituus	75 - 100 cm	90 - 125 cm	120 - 150 cm
P: rungon kallistus	0° - 19°	0° - 14°	0° - 11°
Kokonaispaino	21 kg	24 kg	26 kg
Max. käyttäjäpaino	35 kg	45 kg	55 kg

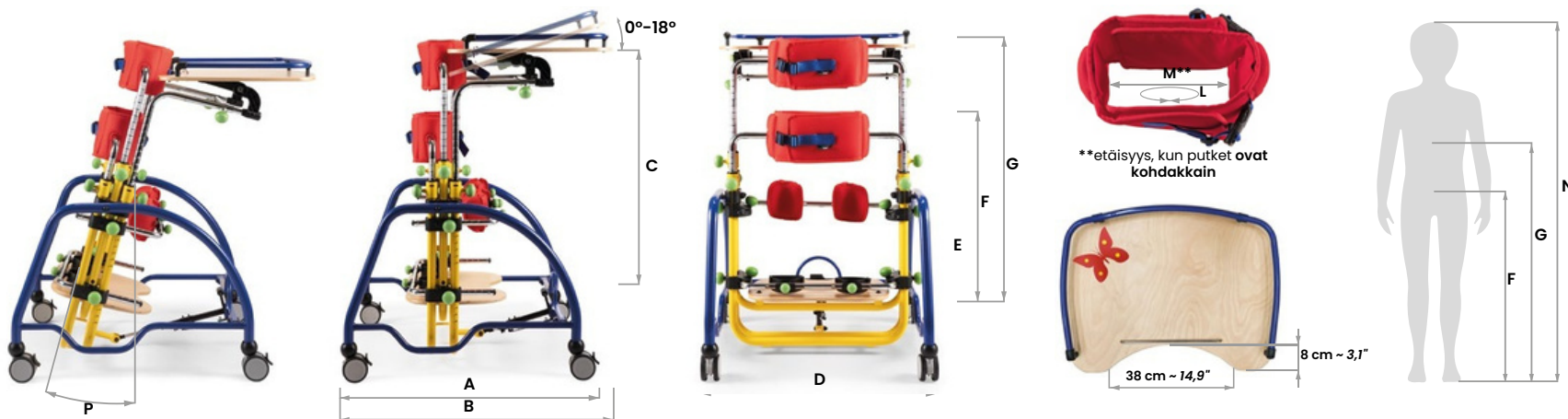

Varmista, että kuvassa esitetyt mitat F ja G eivät ylitä tukien ilmoitettua suositeltua vaihteluväliä.



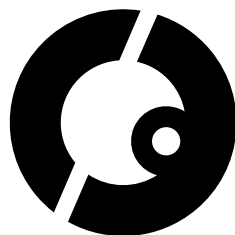

A special thanks to the families who participated with enthusiasm in our project. It is thanks to our customers and their stories that we find the energy and stimuli to evolve day by day.

CE complies with MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX+39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com