



Helposti
kokoontaittuva
Ketterä runko
Uniikit
työntökahvat



Carl-Oskar on täydellinen rollaattori aktiiviselle käyttäjälle. Sen kestävä runko on helppo ohjata, ja siinä on ergonomiset työntökahvat miellyttävää otetta varten. Erittäin suuret pyörät tekevät siitä erinomaisen valinnan ulkoiluun – jopa lumisissa talviolosuhteissa.

Erinomainen vakaus

Carl-Oskar on yksi Human Caren tunnetuimmista ja myydyimmistä rollaattoreista maailmassa. Se on turvallinen ja luotettava, ja siinä on erittäin suuret 30 cm:n pyörät, jotka mahdollistavat kevyen rullaamisen säilyttäen samalla vakauden lähes kaikilla alustoilla. Carl-Oskar on ihanteellinen valinta maaseutualueille, myös lumisilla pinnoilla liikuttaessa.

Uniikit työntökahvat

Carl-Oskar -rollaattorissa on ainutlaatuiset kulmasäädettävät työntökahvat, joiden avulla käyttäjä voi löytää optimaalisen asennon mukavuuden ja vakauden kannalta. Ergonominen muotoilu varmistaa, että paino jakautuu tasaisesti, mikä takaa tukevan otteen. Carl-Oskar voidaan myös varustaa yhden käden jarrulla, jolloin käyttäjä voi hallita

rollaattoria joko vasemmalla tai oikealla kädellä.

Vahvistettu vaihtoehto

Carl-Oskar on saatavilla eri kokonaislevyysillä, jotta se sopii monenlaisille käyttäjille. Vahvistetut mallit bariatriseen käyttöön kestävät jopa 275 kg:n kuormituksen. Kaikkiin malleihin on saatavana laaja valikoima lisävarusteita, joka vastaa useimpiin tarpeisiin. Kaikki mallit voidaan helposti taittaa säilytystä tai kuljetusta varten.

Lisävarusteet/ominaisuudet



Tarjotin

Käytännöllinen kevyiden esineiden alas laskemiseen. Max. kuormitus 2kg



Lokasuojia

Suojaa jalkoja ja vaatteita.



Työntötanko

Työntötanko sisältää yhden käden jarrun. Vain Carl-Oskar 62 -malliin.



Laahausjarru

Estää rollaattoria liikkumasta liian nopeasti ja mahdollistaa käyttäjälle hallitun kävelynopeuden.



Happipulloteline

Pitää happipullon tukevasti paikallaan.



Lukko

Joustovaijeri, joka suojaa rollaattoria varkaudelta sen ollessa valvomatta.



Keppiteline

Helpottaa kävelykepin tai sateenvarjon kuljetusta.



Yhden käden jarru

Mahdollistaa käsitoimintojen hallinnan yhdellä kädellä (asennettavissa vasemmalle tai oikealle). Erikoistilaustuote.




Laukkusetti

Sisältää yhden pienen kassin (kantavuus 5 kg) ja yhden suuren kassin (kantavuus 10 kg).



Happipulloteline

Pitää happipullon tukevasti paikallaan.

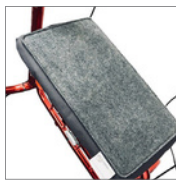

Istuinsuoja

Nykyaikainen teknologia pitää istuinosan viileänä kesällä ja lämpimänä talvella.



Selkätuki ja kori

Tekniset tiedot

Kuvaus	Leveys työntö- kahvojen välissä	Kokonais- leveys	Takapyörien välinen etäisyys	Tuotteen paino
Carl-Oskar 57	37cm	57cm	50.8cm	11.1kg
Carl-Oskar 62	42cm	62cm	50.8cm	11.3kg 11.3kg 13.2kg
Carl-Oskar 67	47cm	67cm	52.1cm	11.4kg 11.4kg 13.3kg
Carl-Oskar 72	52cm	72cm	52.1cm	11.5kg 11.5kg 13.4kg

Huom! Kaikki lisävarusteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Kuvaus (kaikki mallit)	
Työntökahvojen korkeus (Min - Max)	77cm - 95cm
Istuinkorkeus	64cm
Pyörät	30cm x 5cm
Istuimen koko	31.8cm x 17.8cm
Syvyys taitettuna	26cm
Max. käyttäjäpaino	Standardi 150kg Vahvistettu 275kg



Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

Valmistaja: Human Care HC AB

humancaregroup.com