

Fellow Classic



Viisi mallia
Sisä- ja ulko-
käyttöön
Uniikit
työntökahvat



Fellow Classic on korkealaatuinen rollaattori, joka soveltuu erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön. Turvallinen ja luotettava malli on saatavilla viitenä eri versiona – standardi, matala, korkea, leveä ja kapea. Pehmeä jarrujärjestelmä sopii erityisesti käyttäjille, joilla on rajoittunut käsien liikkuvuus.

Uniikki design

Fellow Classicissa on ainutlaatuinen haarukkarakenne, joka tekee siitä erittäin helppokäyttöisen ja ketterän, erityisesti pienissä tiloissa. Helppokäyttöinen kokoontaittojärjestelmä tekee säilytyksestä ja kuljetuksesta vaivatonta, ja kestävät pyörät estävät lian ja ruosteen kertymisen, mikä mahdollistaa sujuvamman liikkumisen.

Ergonomiset työntökahvat

Fellow Classicissa on ergonomisesti muotoillut työntökahvat, jotka jakavat niihin kohdistuvan painon tasaisesti. Yhdessä pehmeän jarrujärjestelmän kanssa tämä varmistaa, että pyörien lukitsemiseen tarvitaan vain minimaalinen käsivoima. Eteenpäin suuntautuvat työntökahvat mahdollistavat käyttäjälle pystymmän kävelyasennon,

mikä kuormittaa vähemmän sekä selkää että hartioita.

Käytännölliset lisävarusteet

Fellow Classic -rollaattoriin on valittavana laaja valikoima lisävarusteita, jotka helpottavat arkea. Tarjolla on esimerkiksi tarjotin ja keppiteline, joten löydät helposti tarpeisiisi sopivan varusteen. Verkko-osa on helppo irrottaa puhdistusta ja huoltoa varten.

Lisävarusteet/ominaisuudet



Tarjotin

Käytännöllinen kevyiden esineiden alas laskemiseen.
Max. kuormitus 2kg



Pehmeä kassi

Pehmeä kantolaukku tavaroiden kuljetukseen.



Heijastinsetti

Sisältää 30 itse-kiinnittyvää heijastinta.



Kori

Ihanteellinen esim. ostosten kuljettamiseen.



Polkaisuputki

Auttaa rollaattoria ylittämään kynnykset.




Lukko

Joustovaijeri, joka suojaa rollaattoria varkaudelta sen ollessa valvomatta.




Keppiteline

Helpottaa kävelykepin tai sateenvarjon kuljetusta.

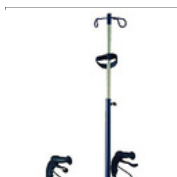

IV-teline

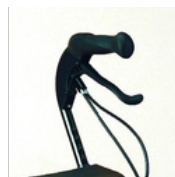

Yhden käden jarru

Mahdollistaa jarrujen käytön yhdellä kädellä.
Tilattava rollaattorin kanssa.



Laahausjarru

Estää rollaattoria liikkumasta liian lujaa.



Selkätuki

Antaa istuessa lisätukea selälle.

Tekniset tiedot

	Standard	Matala	Leveä	Kapea	Korkea
Työntökahvojen korkeus (Min - Max)	77cm - 95cm	68cm - 81cm	77cm - 95cm	77cm - 95cm	82cm - 100cm
Istuinkorkeus	59cm	51cm	60cm	60cm	64cm
Kokonaisleveys	63cm	62cm	69cm	60cm	63cm
Kokonaispituus	69cm	60cm	69cm	69cm	69cm
Leveys työntökahvojen välissä	44cm	44cm	50cm	44cm	44cm
Pyörät	20cm x 4cm	20cm x 4cm	20cm x 4cm	20cm x 4cm	20cm x 4cm
Tuotteen paino	8kg	7.7kg	8.7kg	8.1kg	8.1kg
Max. käyttäjäpaino	150kg	140kg	150kg	130kg	130kg



Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

Valmistaja: Human Care HC AB

humancaregroup.com