



Dolomite | **Melody**

Stilren design, lätt att manövrera



DOLOMITE MELODY är en nätt, stilren rollator med egenskaper som vida överträffar konkurrenterna i samma prisklass! Här finns den låga vikten, trots att stativet är i stål. Här finns den enkla anpassningen tack vare tydliga, säkra funktioner. Här finns den smidiga hanteringen eftersom den går att fälla ihop och står upp i hopfällt läge och här finns det hållbara, vajerlösa bromssystemet. **DOLOMITE MELODY** gör livet lite lättare. Är du med på noterna?



Vajerfri, integrerad broms

Ingen bromsvajer att haka upp sig i. Helt rostfri för lång livslängd. Patenterad bromsmekanism med testad funktion.

Står i hopfällt läge

Gör rollatorn enkel att parkera och förvara på liten yta. Tryck ner sitsen för att fälla ut rollatorn igen.


Enklare att gå och att nå saker. Sitsen är säker och bekväm. Den kan fällas upp för att ge större gångutrymme och göra det enklare att öppna dörrar och nå saker.



Steglös justering

Med små steg kan exakt höjd och vinkel ställas in. På detta sätt kan rollatorn anpassas för olika armlängder och handpositioner. Kombinationen av unika justeringsmöjligheter, tre höjdmodeller och ett brett utbud av tillbehör gör **DOLOMITE MELODY** till en av marknadens mest flexibla rollatorer.

Egenskaper och tillbehör

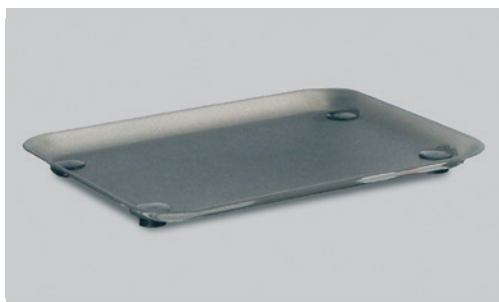

Bricka

Har fyra stabila fötter. Kan flyttas lastad från rollator till bord.



Kryckhållare

Gör kryckan lättåtkomlig utan att vara i vägen.



Ryggband

Ett bekvämt och tryggt stöd att luta sig mot. Monteras i körhandtagen och följer därmed med i höjdjusteringen.



Steghjälp

Underlättar passering över trottoarkanter och liknande. Kan monteras på höger eller vänster sida, utan verktyg. Tillverkad av rostfritt stål.



Hjulskydd

Förebygger att kläder fastnar och skyddar mot smuts.



Släpbroms

En trygghet som förhindrar att rollatorn rullar iväg. Perfekt vid gångträning och enhandslösningar.



Korg

Praktisk korg med handtag. Max last 10 kg (Melody M & L)
Max last 7 kg (Melody S)



Hängbag

Praktisk väska som skyddar tillhörigheter. Här ryms t ex handväskan. Kan kombineras med syrgashållare.



Dropphållare

Gör det möjligt att hänga droppåse på rollatorn. För inom och utomhusbruk. Monteras utan verktyg (ej för Melody S).



Skruv istället för ratt

Ersätter körhandtagsratt för att säkerställa att inställningen ej kan ändras.



Långa körhandtag

Ökar körhandtagshöjden på Melody S med 40 mm. Levereras i par.



Adapt-handtag

Kan anpassas till helt valfri handställning. OBS! Levereras endast fabriksmonterad som komplett produkt (ej för Melody S).



HP-handtag

För anpassning till enhands-/strokepatienter. OBS! Levereras endast fabriksmonterad som komplett produkt (ej för Melody S).



Enhandsbroms

Gör det möjligt att aktivera båda bromsarna med bara en hand. OBS! Levereras endast fabriksmonterad som komplett produkt.(Ej för Melody S).



Syrgastubhållare


Enkel att montera och passar olika storlekar av syrgastuber. Fästes framför sitsen utan att påverka rollatorns stabilitet. Monteras utan verktyg.

Tre olika höjder (körhandtag och sits)



MELODY S

Art no. 12014-44-21

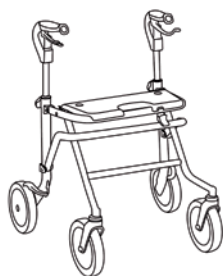

MELODY M

Art no. 12012-44-21



MELODY L

Art no. 12010-44-21

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Bredd mellan hjulen, yttre mått	Djup	Bredd mellan hjulen	Total höjd	Sitshöjd	Bredd mellan handtag	Hjuldiameter
Melody S	545 mm	670 mm	465 mm	660-805 mm	480 mm	365 mm	200 mm
Melody M	620 mm	660 mm	525 mm	710-915 mm	535 mm	430 mm	200 mm
Melody L	620 mm	700 mm	540 mm	795-995 mm	615 mm	430 mm	200 mm

	Max lastvikt	Max brukarvikt	Bredd ihopfälld
Melody S	7.3 kg	135 kg	200 mm
Melody M	7.7 kg	135 kg	260 mm
Melody L	8 kg	135 kg	320 mm

Färg

RAL 1035



QR
Code

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®

