



Rebel on kompakti rollaattori, joka soveltuu erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sen ketterä runko on vakaa, mutta silti helppo ohjata. Rebelissä on ergonomiset, korkeus- ja kulmasäädettävät työntökahvat, joiden avulla käyttäjä voi löytää itselleen optimaalisen käden asennon. Helpon kokoontaittojärjestelmän ansiosta se on vaivaton kuljettaa.

Täydellinen sisä- ja ulkokäyttöön

Olitpa kotona tai liikkeellä, Rebel on täydellinen valinta. Sen ketterä runko yhdistettynä vakaisiin pyöriin mahdollistaa sujuvan liikkumisen lähes kaikilla alustoilla. Eri leveyksinä saatavilla oleva Rebel on monipuolinen rollaattori, jota voidaan käyttää lähes missä tahansa. Vahvistettu malli tukevammille käyttäjille kestää jopa 250 kg:n kuormituksen.

Helppo kokoontaittojärjestelmä


Rebel taittuu helposti istuimeen integroidun kätevän taittokahvan avulla ja pysyy pystyssä myös taitettuna. Sen kompakti koko ja kokoontaittojärjestelmä tekevät siitä ihanteellisen vaihtoehdon kuljetukseen ja matkustamiseen.

Kuvassa lisävarusteina kori ja selkätuoli; Rebeliin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita, jotka vastaavat jokaisen käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin.

Ergonomiset työntökahvat

Parhaan ergonomian takaamiseksi kädensijat on suunniteltu tarjoamaan vakaa ja miellyttävä ote, joka jakaa niihin kohdistuvan painon tasaisesti. Lisäksi Rebelin kädensijat ovat kulma- ja korkeussäädettävät, joten jokaiselle käyttäjälle voidaan löytää optimaalinen käden asento.

Lisävarusteet/ominaisuudet

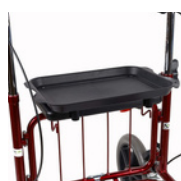


Tarjotin

Käytännöllinen kevyiden esineiden alas laskemiseen. Max. kuormitus 2kg



Polkaisuputki

Auttaa rollaattoria ylittämään kynnykset.

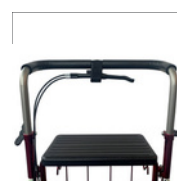

Työntötanko

Työntötanko sisältää yhden käden jarrun. Vain Rebel 62 -malliin.



Laahausjarru

Estää rollaattoria liikkumasta liian nopeasti ja mahdollistaa käyttäjälle hallitun kävelynopeuden.



Selkätuki ja kori

Selkätuki (72cm malliin)
Kori



Lukko

Joustovaijeri, joka suojaa rollaattoria varkaudelta sen ollessa valvomatta.



Keppiteline

Helpottaa kävelykepin tai sateenvarjon kuljetusta.



Yhden käden jarru

Mahdollistaa käsitoimintojen hallinnan yhdellä kädellä (asennettavissa vasemmalle tai oikealle). Erikoistilaustuote.



Laukkuseti

Sisältää yhden pienen kassin (kantavuus 5 kg) ja yhden suuren kassin (kantavuus 10 kg).




Happipulloteline

Pitää happipulettin tukevasti paikallaan.



Istuinsuoja

Nykyaikainen teknologia pitää istuinosan viileänä kesällä ja lämpimänä talvella.

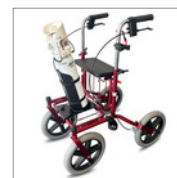

Happipulloteline

Pitää suuremman happipullon tukevasti paikallaan.

Tekniset tiedot

	Rebel 67	Rebel 72	Rebel vahvistettu 67	Rebel vahvistettu 72
Työntökahvojen korkeus (Min - Max)	68cm - 86cm	68cm - 86cm	75cm - 93cm	75cm - 93cm
Istuinkorkeus	54cm	54cm	54cm	54cm
Kokonaisleveys	67cm	72cm	67cm	72cm
Kokonaispituus	75cm	75cm	75cm	75cm
Leveys työntökahvojen välissä	47cm	52cm	47cm	52cm
Etäisyys takapyörien välissä	52.1cm	52.1cm	52.1cm	52.1cm
Pyörät	20cm x 4cm	20cm x 4cm	20cm x 4cm	20cm x 4cm
Tuotteen paino	9.5kg	9.7kg	11.6kg	11.8kg
Max. käyttäjäpaino	140kg	140kg	250kg	250kg



Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite ja täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

Valmistaja: Human Care HC AB