



Ormesa Grillo lasten kävelytelineet

Ormesa **Grillo** -kävelytelineet ovat suunniteltu lasten, nuorten ja aikuisten kävelyn harjoitteluun ja tuentaan. Grillo-tuotteissa on patentoitu korkeudensäätöjärjestelmä, jonka ansiosta se tarjoaa aina optimaalisen tuennan käyttäjälle.

Valittavissa 7. eri mallia: edestä työnnettävät tai takaa työnnettävät posterior-mallit.

Koot: MINI, S, M ja L.

Max. 110 kg koosta riippuen.

Saatavilla laaja valikoima erilaisia vartalo- ja käsivarsitukia sekä valjaita: Vartalotuki antaa vakaan tuennan eri asennoissa. Lantiotuki varmistaa vakaan ja turvallisen asennon. Kyynärvarsituki tarjoaa ergonomisen tuen ylävartalolle. Käsikahvat antavat tukea ylävartalolle. Työntökaari mahdollistaa kävelytelineen helpon liikuteltavuuden. Valjaat tukevat käyttäjää ja tasoittavat painetta kävelyssä.

Front Drive vaihtoehdot



P Configuration

Lantiotuki ja työntökaari

Käyttäjille, joilla on kohtalainen vartalogtuki, mutta vaatii lantion tukea.

SIZE mini

SIZE S

SIZE M

SIZE L



PT Configuration

Lantiotuki, vartalogtuki ja työntökaari

Käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä lantio- että vartalogtukea. 2 itse- näistä tukea mahdollistavat vartalogtaivutuksen joka helpottaa kävelyä.

SIZE mini

SIZE S

SIZE M

SIZE L



PA Configuration

Lantiotuki ja kyynärvarsituet

Käyttäjille, joilla on kohtalainen vartalogtuki, mutta vaatii lantion tukea. Kyynärvarsituet helpottaa vartaloghallintaa.

SIZE mini

SIZE S

SIZE M

SIZE L



PTM Configuration

Lantiotuki, työntökaari ja pöytä

Käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä lantion edestä että vartalogtukea. Yläraajatuki helpottaa vartaloghallintaa.

SIZE mini

Posterior vaihtoehdot



P Configuration

Lantiotuki ja käsikahvat

Käyttäjille, joilla on kohtalainen vartalogtuki, mutta vaatii lantion tukea.

SIZE mini

SIZE S

SIZE M

SIZE L



PT Configuration

Lantiotuki, vartalogtuki ja käsikahvat

Käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä lantio- että vartalogtukea. 2 itse- näistä tukea mahdollistavat vartalogtaivutuksen joka helpottaa kävelyä.

SIZE mini

SIZE S

SIZE M

SIZE L



PA Configuration

Lantiotuki ja kyynärvarsituet

Käyttäjille, joilla on kohtalainen vartalogtuki, mutta vaatii lantion tukea. Kyynärvarsituet helpottaa vartaloghallintaa.

SIZE mini

SIZE S

SIZE M

SIZE L



ONLY FOR INDOOR USE

928 Kapeat takapyörät seisontajarruilla, pari
200 mm kiinteät pyörät ja haarukat + seisontajarrupedaalit
Kaventaa runkoa:
koko M 76 cm > 68,5 cm
koko L 80 cm > 72,5 cm.



Takapyörät joissa

- > Anti-rollback
- > Säädettävä jarrutus
- > Seisontajarru

Lisävarusteet



865 Monisäätöinen päätuki
syvyys-, korkeus ja kulmasäätö



930 Ergonomiset valjaat
Lisäsäädettävyyttä kokoihin M ja L.
koko S > Grillo M
M > Grillo L



809 Kyynärvarsituet
Syvyys-, kulma-, rotaatio-, korkeus- ja pronosupinaation säätö. Myös sijoitettavissa kahvan ulkopuolelle.



943 Kiinnityshihnat kyynärvarsitukiin
Grillo mini



927 Irrotettavat nupit



810 Painotangot
Grillo S + 2,6 kg x 2
Grillo M ja L+ 3,4 kg x 2



815 Abduktiikiila
Korkeussäädettävä. Tarjoaa tukea tarvittaessa ja voi olla pois käytöstä kävelyn aikana.



890-C Jalkojen erotin + reisituet
Alaraajojen adduktion estämiseksi. Ohjaa askellusta ja helpottaa oikeaa liikesarjaa. Korkeus, ympärysmitta ja askelleveys säädettävissä. Innovatiivinen ergonominen jalkatuki jossa 3 vapausastetta: pitkittäinen, pystysuora ja rotaituva, mikä mahdollistaa luonnolliset fysiologiset kävelyliikkeet.



925 Vartalotuki
Ylempi vartalotuki: koko mini > Grillo S.
koko S > Grillo M, koko M > Grillo L.



894 Pöytälevy taakse Grillo PTM
ympärysmittan säätö
vain kokoon Grillo mini



943 Kiinnityshihnat kyynärvarsitukiin



937 Ergonomiset käsikahvat
Grillo mini PTM
Syvyys-, kulma-, rotaatio-, korkeus- leveys- ja etu-takasuunnan säätö.



919 Selkätuki
Korkeussäädettävä. Vain kokoihin S ja M.



946 Ergonominen satula
Säädettävät hihnat.



924 Lantiotuki
Ylempi lantiotuki: koko mini > Grillo S.
koko S > Grillo M, koko M > Grillo L.



926 Säädettävä työntökaari
syvyys-, korkeus ja kulmasäätö



809 Kyynärvarsituet Grillo mini
Korkeus-, syvyys- ja rotaatiosäätö



939 Ergonomiset käsikahvat
Syvyys-, kulma-, rotaatio-, korkeus- leveys- ja etu-takasuunnan säätö.



918 Taitettava istuin
Korkeussäädettävä, kokoonlaitettava. Vain kokoihin S ja M.



923 Avustajan työntökahva
Korkeussäädettävä.



890-SC Distaalinen abduktioputki
Korkeussäädettävä.

Ominaisuuksia



Mitta-asteikot runkoputkissa



Kulmansäätö



leveyden ja ympärysmitan säätö



Ergonomiset valjaat



Korkeudensäätö (koko L korkeussäätö rungossa)



Syvyyssäätö etu-takasuunnassa



Helppo taittaa kasaa ja kuljettaa



Wheel dimensions:

mini

front 15 cm
rear 20 cm

S

15 cm
20 cm

M

17,5 cm
25 cm

L

17,5 cm
25 cm

Takapyörät:

- Anti-rollback: estää taaksepäin valumisen
- Jarrusäätö vähentää kävelynopeutta. 5 asentoa.
- Seisontajarru: punainen painike.

Kääntyvät etupyörät:

- Ohjattavat pyörät: estävät etupyörien pyörimistä, takaa suoran kulkusuunnan ja mahdollistaa liikkumisen yksinomaan käyttövoimalla
- Vaihtamalla pyörien paikkaa voi front drive kokoonpanon muuttaa posterioriseksi ja päinvastoin

Tekniset tiedot

A: korkeus rintakehätuki

B: korkeus lantiotuki

C: pituus

D: kokonaisleveys

E: tukien sisäleveys

F: tukien halkaisija

G: käyttäjän pituus

Paino

Max.kuormitus

mini PTM

60 - 76 cm

42 - 61 cm

74,5 cm

62 cm

19 - 25 cm

53 - 79 cm

75 - 95 cm

15,4 kg

35 kg

mini

51 - 75 cm

42 - 61 cm

74,5 cm

62 cm

19 - 25 cm

53 - 79 cm

75 - 95 cm

15 kg

35 kg

small

66 - 100 cm

49 - 84 cm

75 cm

69 cm

19 - 25 cm

60 - 86 cm

90 - 135 cm

18,5 kg / 19 kg

45 kg

medium

73 - 124 cm

54 - 100 cm

91 cm

76 cm

22 - 36 cm

74 - 120 cm

110 - 165 cm

21,7 kg / 22,5 kg

90 kg

large

84 - 147 cm

63 - 120 cm

111 cm

80 cm

24 - 40 cm




81 - 140 cm

150 - 190 cm

28,5 kg / 29,5 kg


110 kg

Front drive

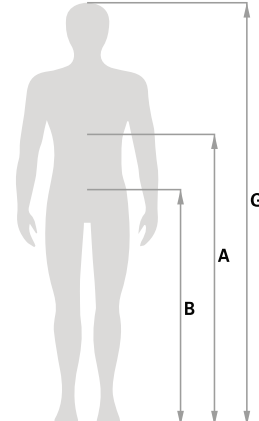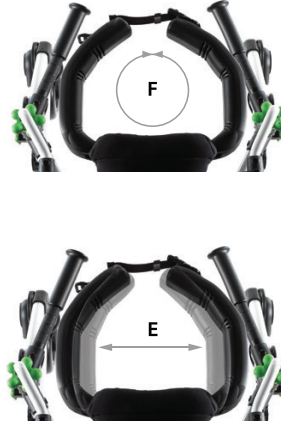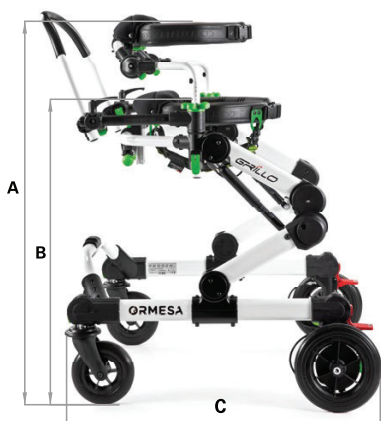

CE

Posterior

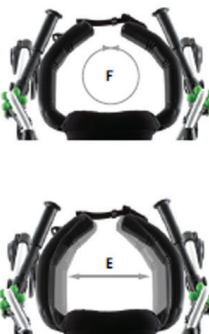

ORMESA SRL
Via A. Da Sangallo, 1
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com
www.ormesa.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi