



Rehasense® Platform - korkea kävelypöytä

Platform on helposti liikuteltava, kapeistakin oviaukoista (70 cm) mahtuva, korkea kävelypöytä, jossa on pehmustettu, kevytlinjainen, leveysäädettävä PU-pöytätaaso. Liikkuminen tapahtuu pöytätaasaan tukeutumalla ja käsikahvoista kevyesti ohjaamalla. Tarkoitettu henkilöille, joiden lihasvoimat tai tasapaino ei riitä normaalin rollaattorin käyttämiseen. Kahvoissa on käsijarrut, jotka voi lukita seisontajarruiksi. Lisävarusteena saatavana yhdenkäden jarru. Saatavana myös malli ilman käyttäjäjarruja.

Korkeudensäätö kaasujousella.
Lev. 66 - 80 cm pit. 80 cm.
Korkeus: 86 - 128 cm.
Väri: Valkoinen, musta pyöytätaaso.
Puhkeamattomat renkaat Ø75 mm.
Paino noin 14,6 kg. **Max. 150 kg.**

Ominaisuudet



Helppo korkeus-, leveys- ja pituussäätö

Kädensijan pituuden ja -kulman, käsivarren leveyden ja lukitusmekanismin säätö sekä korkeuden säätö sormiruuveilla. = Helppo säätää ilman työkaluja.




Muotoiltu pöytätaaso

Pehmeät ja mukavat PU-tyynytt optimaalisella paksuudella vakaamman tunteen saavuttamiseksi. Helppo leveysäätö. Saumaton ja vedenpitävä materiaali takaa paremman hygienian. Sivutuet estävät käsivarsia luistamasta.




Pituus ja kulmasäädettävät jarru- ja käsikahvat

Jarrujärjestelmä ja johdot pöytätaason alla. Pituus ja kulma säädettävissä käyttäjän tarpeiden mukaan

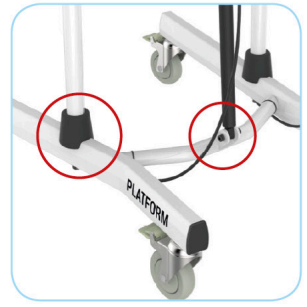

Kaksiosainen runko

Kaksiosainen runko, on helppo purkaa pieneen pakkaukseen laitteen kuljetusta ja varastointia varten. Kuljetusmitat: 85 x 77 x 23 cm

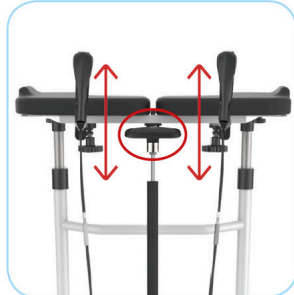

Korkeudensäätövipu

Korkeuden säätövipu toimii molempiin suuntiin (ylös ja alas).



100 mm tai 75 mm pyörät

Pienten pyörien ansiosta mahtuu hyvin huonekalujen alle; Kaikissa neljässä pyörässä suuntalukitus.



Mahtuu ovista

Kapea runko mahdollistaa kulkemisen kapeistakin oviaukoista.

Lisävarusteet



Yhdenkäden jarru



Tippateline



Happipulloteline

Tekniset tiedot



Kokonaisleveys ▼
69-80 cm



Pituus ▼
80 cm



Pöytälevyn korkeudensäätö:
90-130 cm ▼
Kokonaiskorkeus:
100-140 cm

Kuljetusmitat:
85 x 77 x 23 cm
(laatikossa osina)



Käsitukien välinen sisäleveys: ▼
31 - 48 cm



Renkaiden halkaisija ▼
100mm/75 mm*
* sopimuksen mukaan



Max.käyttäjäpaino ▼
150 kg



Tuotteen paino* ▼
18 kg

Väri



Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2020

Rajoitettu 2 v. takuu valmistusvirheille.

Kaikki Rehasense kävelytelineet ovat testattu ja hyväksytyt ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU direktiivin 93/42/EEC -vaatimukset.