

Action® Ampla™



Itsenäiseen ja aktiiviseen elämään.

INNOVATIIVINEN | KETTERÄ | DESIGN AWARD VOITTAJA



Bariatristen XXL-pyörätuolien uusi suunnannäyttäjä

Invacare **Action® Ampla™** on suunniteltu ja kehitetty erityisesti Plus-kokoisille käyttäjille ottaen huomioon kehon muodot, vaihtelevat aktiivisuustasot ja painorajoitukset. Tyylikäs ja minimalistinen pyörätuoli nyky-aikaisella ulkonäöllä, tarjoaa itsenäisyyttä ja tukea mukavaan ja aktiiviseen elämäntyyliin.



Design awards voittaja

Ketterä ja tyylikäs Invacare **Action® Ampla™** on voittanut jo tuotesuunnittelun Red Dot Design Awardin. Tämä kilpailu on yksi maailman suurimmista tuotekilpailuista, sekä myös yksi arvostetuimmista suunnittelupalkinnoista. **Action® Ampla™** on voittanut myös Italian Platinum A'Design Awardin ja Gold German Design Awardin.




reddot design award
winner 2019



Innovatiivinen selkäosan design



Action® Ampla™ :n suunnittelu mahdollistaa täydellisen istuvuuden sekä Plus-kokoisille mieskäyttäjille, joilla yleensä on "omenan" muotoinen keskivartalo, että Plus-koon naiskäyttäjille, jotka yleensä ovat "päärynän" muotoisia. **Action® Ampla™** innovatiivinen selkäosa on suunniteltu mukautumaan molempiin kehon muotoihin, mutta tarjoaa silti tukea ja mukavuutta käyttäjälle.

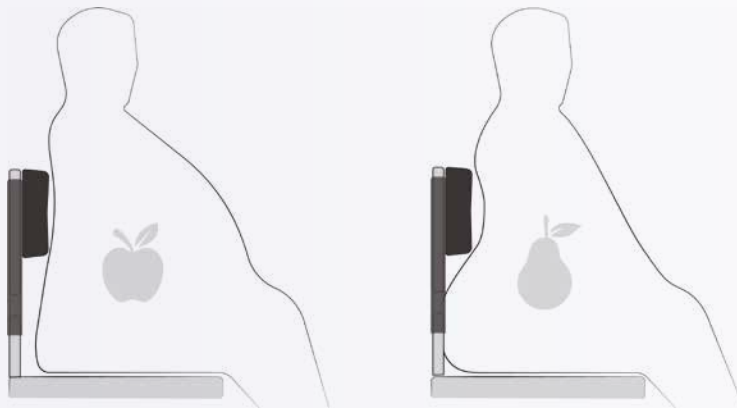

Pääpiirteet

- ▶ Sisäänrakennettu kuljetusratkaisu
- ▶ Ergonominen selkäosa
- ▶ Korkeussäädettävät tukikahvat
- ▶ Personoitavat tehostevärit
- ▶ Useita aktiivisia kelauspyörän asentoja

Lisäominaisuudet

- ▶ Elastinen, hengittävä selkäosan päällinen peittää koko pakara-alueen
- ▶ Vetojarrut ovat kauniisti integroitu sivusuojiin ja lisäävät esteettömyyttä siirtymisissä

5

AVAIN- OMINAISUUDET



Sisäänrakennetut siirtopyörät

1

Action® Ampla™ :n siirtopyörät on suunniteltu fikususti siirtämään paino pois pyörätuolista, mikä mahdollistaa siirtämisen helposti oviaukoista ja ahtaista paikoista:

1. Taita selkäosa alas
 2. Nosta jalkatuista tuoli ylös
 3. Käännä pyörätuoli siirtopyörien varaan.
- Tässä asennossa tuolia on helppo liikutella.

1.



2.



3.



Useita kelauspyörien asentoja

5

- ▶ Erittäin helposti kelattava
- ▶ Käyttäjät voivat liikkua pidemmälle käyttäen vähemmän energiaa





2

Ergonominen selkäosa

- ▶ Helppo ulottua kelausvanteisiin
- ▶ Esteetön
- ▶ Enemmän liikkumavapautta
- ▶ Ylivertainen suorituskyky ja ohjattavuus



3

Korkeussäädettävät tukikahvat

- ▶ Tukee tuoliin ja siitä pois siirryttäessä
- ▶ Voidaan kääntää sisään- ja ulospäin
- ▶ Voidaan laskea alemmaksi, jotta päästään lähemmäksi pöytää



4

Persoonalliset tehosteet

- ▶ Kolme tyylikästä värvaihtoehtoa




Tekniset tiedot ▼

Lisää tietoja tuotteesta, kuten tuotteen käyttöohjeet, löydät paikallisen Invacaren-jälleenmyyjän verkkosivuilta: www.campmobility.fi.

Istuinleveys ▼	Istuinsyvyys ▼	Istuinkulma ▼	Istuinkorkeus ▼	Selkäosan kulma ▼	Selkäosan korkeus ▼	
Action Ampla	505 / 555 / 605 / 655 / 705 / 755 mm	460 / 510 mm	1°	380 - 455 mm 25 mm välein	0°	450 - 525 mm
Eturungon kulma ▼	Jalkatukien pituus ▼	Ajoyksikön leveys ▼	Kokonaispituus sis. jalkatuet ▼	Kokonaispituus ilman jalkatukia ▼	Kokonaiskorkeus ▼	
Action Ampla	90 - 100°	365 - 525 mm 25 mm välein	Istuinleveys + 205 mm	1065 - 1145 mm	855 - 920 mm	825 - 900 mm
Max. kallistus ▼	Kääntösäde ▼	Max.käyttäjäpaino ▼	Kokonaispaino alk. ▼	Kuljetuspaino alk. ▼		
Action Ampla	7°	1420 - 1660 mm	300 kg	27 kg	19.5 kg	

Runkovärit ▼

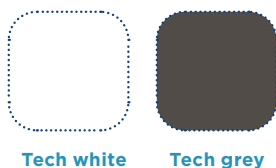

Tech white

Tech grey

Tehosteet ▼



Blue Pulse

Pink Pulse

Green Pulse

HUOM: värit voivat hieman erota esitteiden väreistä

Regulatory data ▼



Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland



Yes, you can.®